

GIGAS

01-3530

CHODZIK 4-KOŁOWY CTYRKOLÉ CHODÍTKO 4-KOLESOVÉ CHODÍTKO STIRIKOLESNI ROLATOR



PL Instrukcja obsługi
CZ Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo



PL Niniejszą instrukcję obsługi **POWINNIEN** otrzymać użytkownik produktu.
PRZED ROZPOCZĘCIEM korzystania z tego produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu w przyszłości.
CZ Tento návod k použití **MUSÍ** být vydán uživateli produktu.
NEŽ tento produkt použijete, **MUSÍTE** si přečíst tento návod k použití a uschovat si jej pro budoucí potřebu.
SK Tento návod sa **MUSÍ** odovzdať používateľovi výrobku.
PRED použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.
SL Ta navodila za uporabo je **TREBA** izročiti uporabniku izdelka.
PRED uporabo tega izdelka je **TREBA** skrbno prebrati ta navodila za uporabo in jih shraniti za morebitno prihodnjo uporabo.






PL

CZ


SK

SL

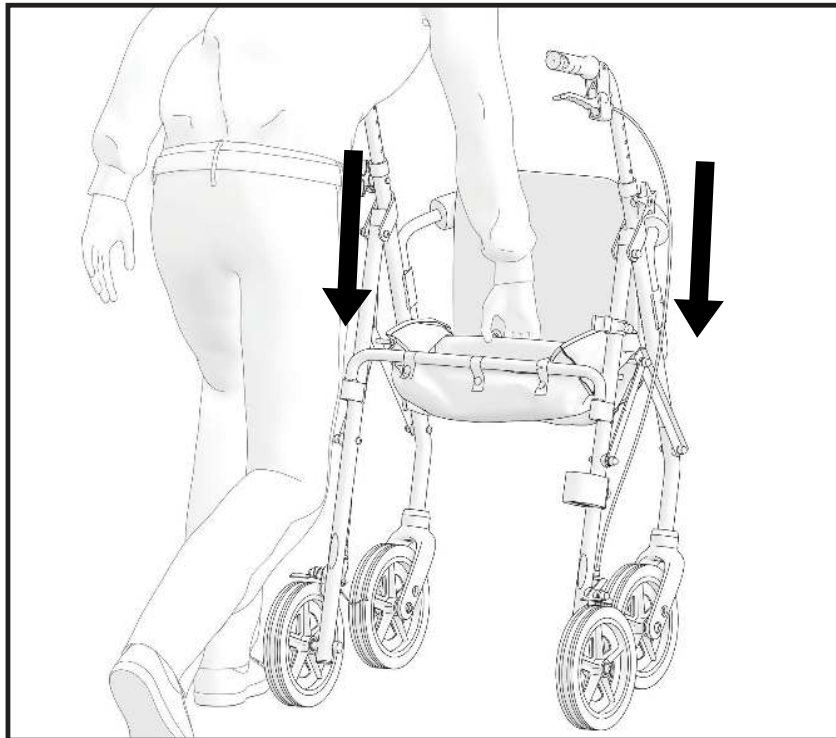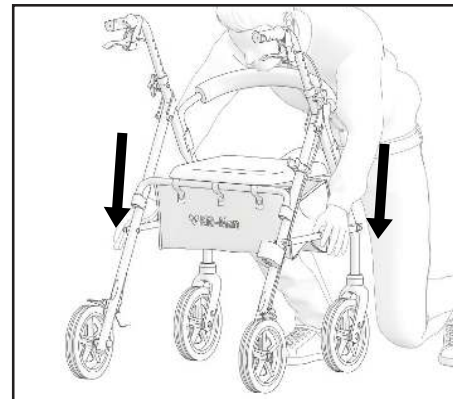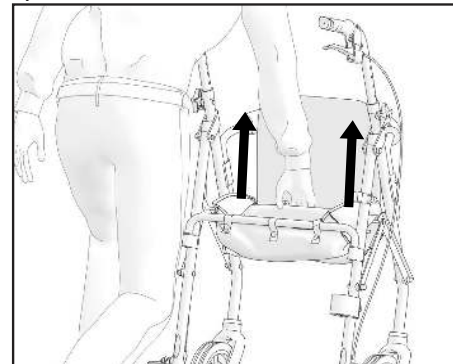
Rysunek 1 / Obrázek 1 / Obrázok č. 1 / Slika 1*Rysunek 2 / Obrázek 2 / Obrázok č. 2 / Slika 2**Rysunek 3 / Obrázek 3 / Obrázok č. 3 / Slika 3*









Rysunek 4 / Obrázek 4 / Obrázok č. 4 / Slika 4

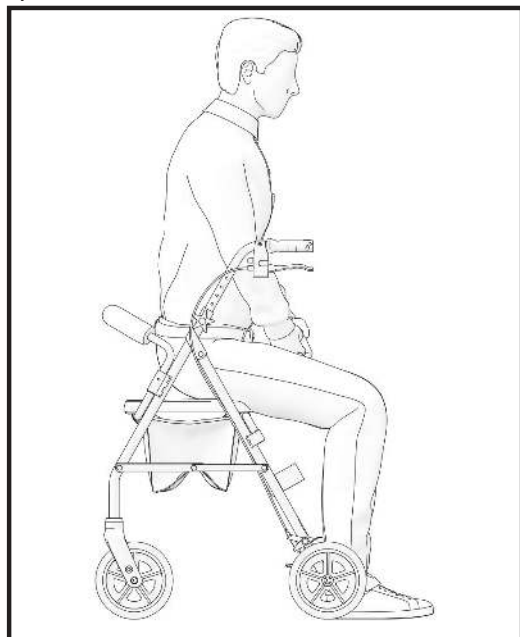

Rysunek 5 / Obrázek 5 / Obrázok č. 5 / Slika 5

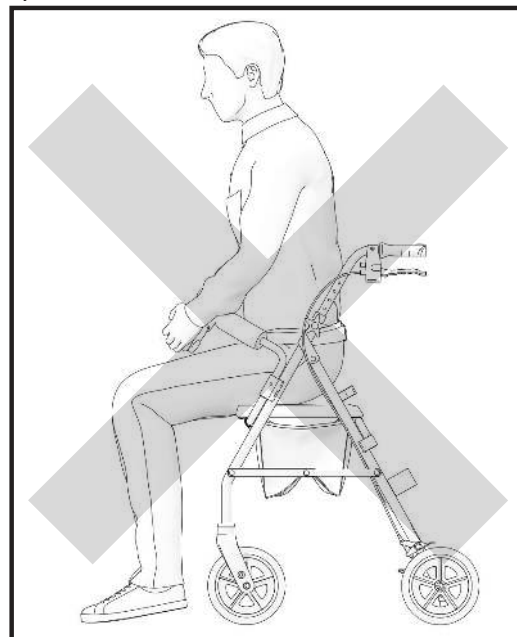

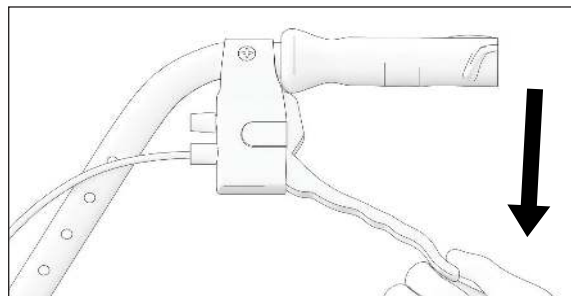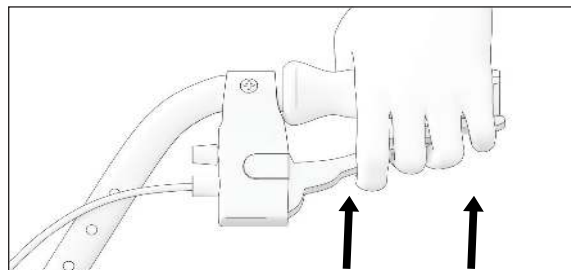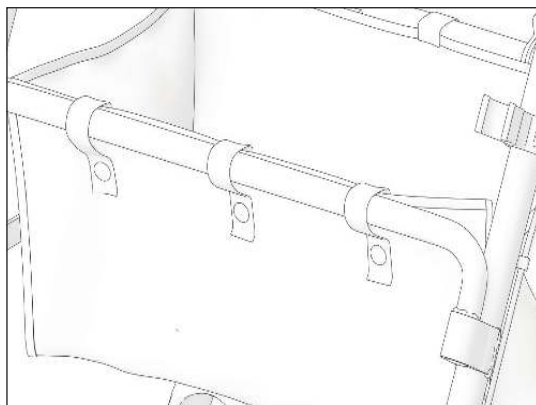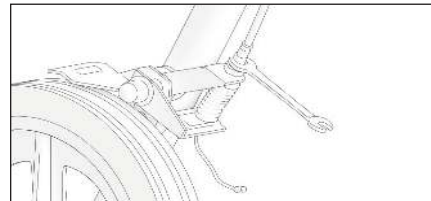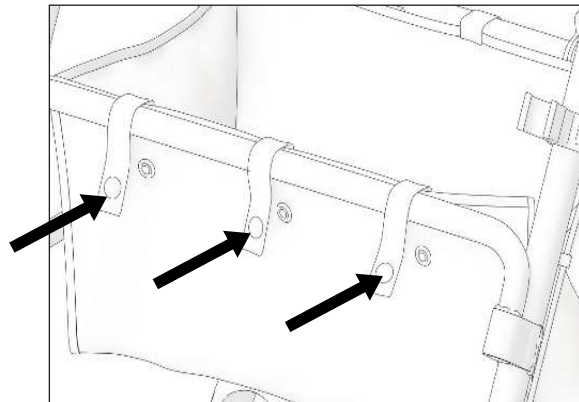

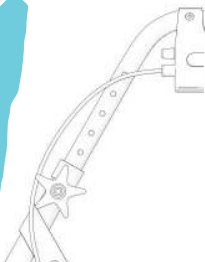

OZNACZENIA

i



OSTRZEŻENIE / UWAGA — aby wskazać, że podczas obsługi urządzenia konieczne jest zachowanie ostrożności. Aby wskazać, że w danej sytuacji wymagana jest uważność osoby obsługującej lub działanie osoby obsługującej w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji

Uwaga! Ten znak jest używany przy bardzo ważnych częściach związanych z twoim bezpieczeństwem. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Chodzik jest przeznaczona do użytkowania tylko przez jedną osobę.



UWAGA

Uważaj na zagrożenia w swoim otoczeniu, takie jak wąskie drzwi, stopnie schodów, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki itp. Nie sięgaj po przedmioty dalej, niż na odległość wyciągniętej ręki.



OSTRZEŻENIE

Zabrania się palenia tytoniu oraz przebywania w pobliżu ognia podczas korzystania z podpórki.



OSTRZEŻENIE

Chodzik nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niewidzące.



UWAGA

Na pochyłościach poruszać się powoli. Nie przekraczaj podanego maksymalnego nachylenia. Nie korzystaj ze schodów ruchomych. Nie cofaj po powierzchni pochyłej.



UWAGA

Ryzyko przytraśnięcia palców. Zawsze istnieje ryzyko, że np. palce lub ramiona mogą dostać się w ruchome części podpórki inwalidzkiej.



OSTRZEŻENIE

Zabrania się przekraczania maksymalnego bezpiecznego obciążenia produktu.



UWAGA

Podczas rozpakowywania należy pamiętać o ryzyku obrażeń w wyniku wciągnięcia palców pomiędzy szprychy a widelec.



OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania z podpórki należy używać obu hamulców jednocześnie, aby zapobiec skróceniu się koła bez hamulca i upadkowi użytkownika podpórki.

OGÓLNE

WPROWADZENIE

GWARANCJA

Dziękujemy za zaufanie okazanie firmie Kid-Man®. Każdy produkt jest fabrycznie sprawdzany i w idealnym stanie. Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że chodzik UAB Kasko Group I Kid-Man® będzie miała pozytywny wpływ na Wasze codzienne życie.

WARRANTY

Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje przeprowadzone bez zgody producenta powodują wygaśnięcie odpowiedzialności producenta. Obejmuje to przekraczanie maksymalnych obciążeń użytkowania i używanie produktu w niewłaściwy sposób. Gwarancja jest ważna tylko z właściwie wypełnioną kartą gwarancyjną. UAB Kasko Group | Kid-Man® (zwany dalej Producentem) po otrzymaniu reklamowanego towaru od kupującego w ciągu 4 tygodni podejmuje decyzję o rozpatrzeniu reklamacji w ramach gwarancji. Jeśli problem nie jest objęty gwarancją, a klient wyrazi na to zgodę, Producent, jeśli to możliwe, naprawi problem. Wszelkie koszty, w tym koszty transportu, ponosi klient. Naprawa gwarancyjna nie powoduje przedłużenia gwarancji.

NORMY I PRZEPISY

4-kołowy chodzik spełnia wymagania:

- a) ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/745 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylającego dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
- b) (ISO 11199-2:2021) Produkty wspomagające chodzenie z obsługą oburęczną – Wymagania i testy – Część 2: Podpórki inwalidzkie (ISO 11199-2:2021) EN ISO 11199-2:2021.

OKRES EKSPLOATACJI

Przewidywany okres użytkowania wynosi 5 (pięć) lat, przy założeniu, że produkt jest używany codziennie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, instrukcjami dotyczącymi konserwacji i użytkowania określonymi w niniejszej Instrukcji obsługi.

Po tym czasie 4-kołowy chodzik musi zostać poddany recyklingowi. Nie wyrzucaj podpórki razem ze zwykłymi odpadami (patrz rozdział „UTYLIZACJA”).

INFORMACJE O PRODUCENCIE

Producent: UAB „Kasko Group” (zarejestrowany znak towarowy Kid-Man®)
Adres A.Vivulskio 12D, Wilno, Litwa,

INFORMACJE O PRODUKCIE

PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA

4-kołowy chodzik GIGAS to urządzenie do chodzenia do użytku wewnątrz i na zewnątrz, idealne do kompensacji i poprawy ograniczonej zdolności chodzenia.

i Ta 4-kołowy chodzik musi być dostosowana do twoich uwarunkowań zdrowotnych.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie są znane przeciwwskazania do użytkowania 4-kołowej podpórki inwalidzkiej zgodnie z jej przeznaczeniem.

WSKAZANI UŻYTKOWNICY

4-kołowy chodzik GIGAS przeznaczona jest do kompensacji i poprawy mobilności osoby z ograniczoną możliwością chodzenia - maksymalny udźwig 135 kg.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko wypadku. Zabrania się przekraczania maksymalnego bezpiecznego obciążenia 4-kołowej podpórki inwalidzkiej.




UWAGA

4-kołowy chodzik może być użytkowana przez inne osoby. W tym celu 4-kołowy chodzik musi być najpierw dokładnie wyczyszczona i zdezynfekowana. Następnie wszystkie elementy 4-kołowej podpórki inwalidzkiej muszą zostać sprawdzone

ETYKIETA PRODUKTU

Etykieta identyfikacyjna jest przymocowana do ramy 4-kołowej podpórki inwalidzkiej (patrz rysunek).


1. Produkt
2. Wzór
3. Maksymalne obciążenie
4. Producent / dane kontaktowe
5. Data produkcji
6. Kod UDI /SN
7. Znak CE
8. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania

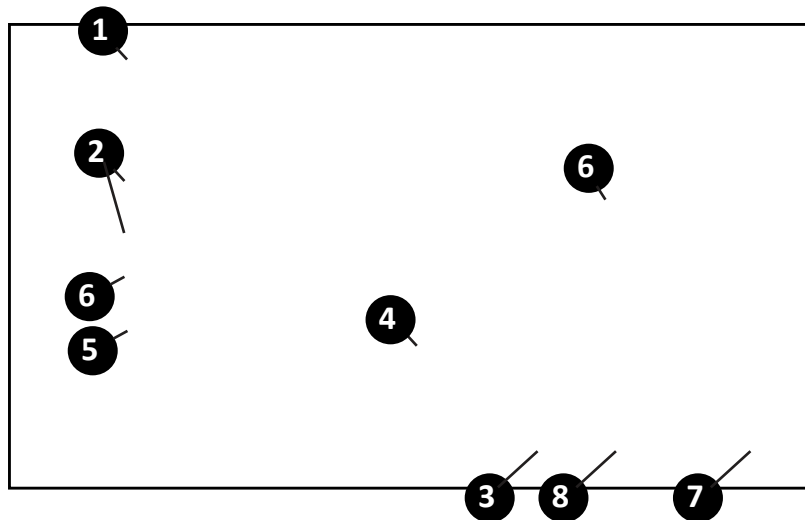

CZĘŚCI SKŁADOWE I FUNKCJE

Przegląd

1. Rączka
2. Hamulec
3. Przycisk regulacji wysokości uchwyty
4. Rama
5. Tylne koło
6. Kółko
7. Torba
8. Przewód hamulca
9. Siedzisko
10. Oparcie

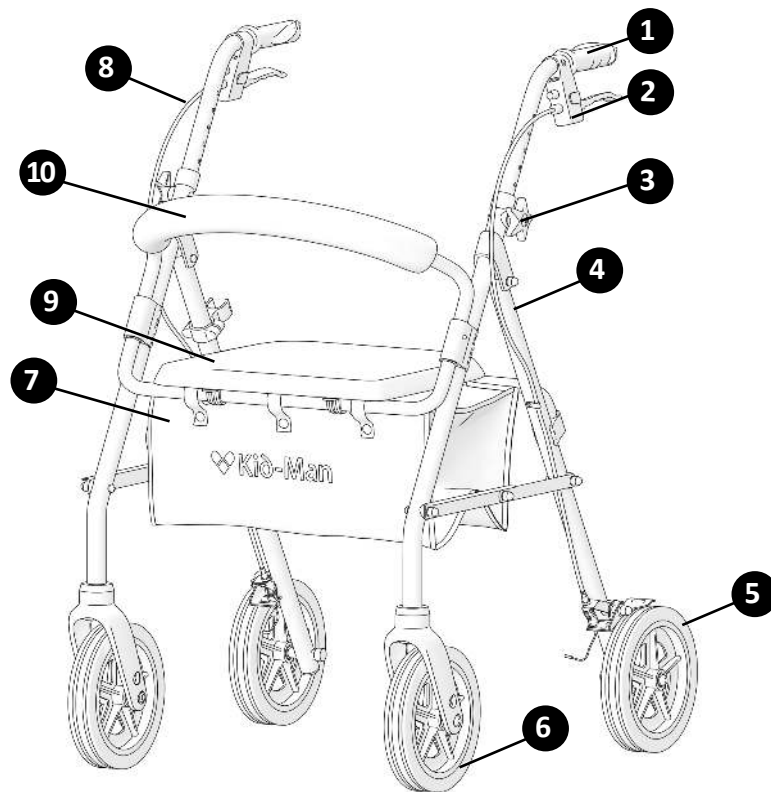

ROZKŁADANIE I SKŁADANIE PODPÓRKI INWALIDZKIEJ

- Aby rozłożyć podpórkę 4-kołową (Rysunek 1 - 2):
 - 1) Ustaw 4-kołową podpórkę inwalidzką przed sobą;
 - 2) Rękami otwórz siedzisko;
 - 3) Chwyć metalową dźwignię przez dolną część siedziska i popchnij ją w dół, upewniając się, że chodzik się rozkłada.
- Aby złożyć 4-kołową podpórkę inwalidzką (Rysunek 3, Rysunek 2):
 - 1) Ustaw 4-kołową podpórkę inwalidzką przed sobą;
 - 2) Rękami otwórz siedzisko;
 - 3) Chwyć metalową dźwignię przez dół siedziska i podnieś go, aż chodzik złoży się.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia palca podczas składania lub rozkładania 4-kołowej podpórki inwalidzkiej!

SIADANIE NA PODPÓRKĘ

Zanim usiądziesz na siedzisku podpórki inwalidzkiej, upewnij się, że zaciągnięty jest hamulec podpórki. Siadając, upewnij się, że stopy znajdują się pomiędzy tylnymi kołami (Rysunek 4) .

PODWIESZANA TORBA

Aby założyć torbę na podpórkę inwalidzką, należy przełożyć paski przez ramę z przodu i z tyłu pod siedziskiem (Rysunek 6 - 7).

OBSŁUGA



OSTRZEŻENIE

Nie ma miejsc ani punktów przeznaczonych do przenoszenia dodatkowych obciążeń.

HAMOWANIE

Ścieranie kół może mieć wpływ na skuteczność hamulców. Dlatego regularnie sprawdzaj hamulce. Aby uzyskać wymaganą siłę hamowania, wyreguluj hamulec ręcznie za pomocą śruby na obudowie hamulca lub za pomocą odpowiedniego narzędzia (nie wchodzi w skład zestawu) na przewodzie hamulcowym (patrz rysunek 8).

OBSŁUGA HAMULCÓW

Aby wyłączyć hamulce, podnieś dźwignie hamulców do góry i przytrzymaj je w tej pozycji (zgodnie ze strzałką).

Aby zwolnić hamulce, zwolnij dźwignie (Rysunek 9).

Aby zaciągnąć hamulce postojowe w chodziku czterośladowym, należy nacisnąć dźwignie hamulców, aż się zablokują i pozostaną w dolnej pozycji, jak pokazano strzałką (Rysunek 5).



OSTRZEŻENIE

Zanim usiądziesz na siedzisku, upewnij się, że hamulce są zaciągnięte.

REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTÓW

CHODZENIE

Kiedy chodzisz z podpórką inwalidzką, należy przyjąć pozycję wyprostowaną, a podpórkę należy trzymać blisko ciała. Dzięki temu uzyskasz prawidłową postawę ciała (Rysunek 14).



OSTRZEŻENIE

Chodzik jest przeznaczona do użytkowania tylko przez jedną osobę.

KONSERWACJA

Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę, należy regularnie przeprowadzać następujące kontrole i konserwację lub zlecić ich wykonanie innej osobie. Poniżej znajdziesz zalecany harmonogram konserwacji.



OSTRZEŻENIE

Naprawa, czyszczenie lub regulacja 4-kołowej podpórki inwalidzkiej powinna być wykonywana przez uprawnionego serwisanta, gdy nikt nie siedzi na ani nie korzysta z 4-kołowej podpórki inwalidzkiej.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Chodzik powinna być utrzymywany w czystości i wolny od kurzu. Można to zrobić za pomocą ściereczki do kurzu lub wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu.

i Piasek i woda morska mogą uszkodzić łóżyska, a części stalowe podpórki inwalidzkiej mogą rdzewieć, jeśli powierzchnia jest uszkodzona.

Po wystawieniu 4-kołowej podpórki inwalidzkiej na działanie piasku i wody morskiej przez krótki czas, należy ją oczyścić po każdej wyprawie na plażę.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać 4-kołową podpórkę inwalidzką w następujących warunkach:

- Ograniczenie temperatury: -20°C do +40°C;
- Wilgotność względna 20% do 75%;

PONOWNE UŻYCIE

4-kołowy chodzik nadaje się do ponownego użycia. Należy podjąć następujące działania:

Czyszczenie i dezynfekcja (patrz rozdział „CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA”).

Kontrola (patrz rozdział „KONSERWACJA”).

4-kołową podpórkę inwalidzką należy dostosować dla nowego użytkownika zgodnie z dokumentacją serwisową.

UTYLIZACJA



INCYDENTY

Każdy incydent, który miał miejsce w związku z urządzeniem, należy zgłosić UAB Kasko Group | Kid-Man® o
właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.



Dane kontaktowe:
UAB Kasko Group | Kid-Man® (zarejestrowany znak towarowy Kid-Man®)
Adres: A.Vivulskio 12D, Wilno, Litwa,
Tel: +370 5 265 0000
E-mail: info@kid-man.com
Strona internetowa: www.kid-man.com

CZ**SYMBOLY****i**

VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ — vyznačuje, že za provozu zařízení je třeba dbát opatrnosti. Vyznačuje, že aktuální situace vyžaduje pozornost obsluhy nebo zásah obsluhy, aby se zamezilo nežádoucím následkům.

Pozor! Tato značka se používá pro velmi důležité části související s Vaší bezpečností. Podívejte se prosím do návodu k použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**VAROVÁNÍ**

Toto chodítko je vhodné k použití jen pro jednoho.

**POZOR**

Dávejte si pozor na rizika ve svém prostředí, jako například úzké dveřní průchody, schody, domácí spotřebiče, dětské hračky atd. Nenahýbejte se k předmětům dále, než kam dosáhnete paží.

**VAROVÁNÍ**

Při používání chodítka je zakázáno kouřit či být poblíž plamenů.



VAROVÁNÍ

Chodítko není určeno k užívání nevidomými.



POZOR

Na svažitém terénu se pohybujte jen malou rychlostí. Nepřesahujte maximální uvedený gradient. Nevyužívejte eskalátory. Nejezděte zpátečkou na šikmé ploše.



POZOR

Riziko zachycení prstů. Vždy existuje riziko zachycení částí těla, jako například prstů nebo paží, do pohyblivých součástí chodítka.



VAROVÁNÍ

Je zakázáno překračovat maximální bezpečnou nosnost produktu.



POZOR

Při vybalování si buďte vědomi rizika poranění zachycením prstů mezi paprsek a vidlici.



VAROVÁNÍ

Při používání chodítka používejte obě brzdy současně, abyste zamezili překroucení nebrzděného kola, což by způsobilo pád uživatele chodítka.

OBECNÉ

ÚVOD

Tento návod k použití obsahuje důležité informace o správné manipulaci s výrobkem. Abyste zajistili bezpečné používání výrobku,

PŘEDMLUVA

Děkujeme Vám za důvěru, kterou prokazujete značce Kid-Man®. Každý výrobek je v továrně zkontrolován a opouští nás v bezvadném stavu. Přejeme Vám mnoho úspěchů a doufáme, že chodítka od UAB Kasko Group I Kid-Man® bude mít pozitivní dopad na Váš každodenní život.

ZÁRUKA

Poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu. Veškeré neoprávněné úpravy provedené bez svolení výrobce budou mít za následek zánik platnosti záruky. Sem patří například překročení maximálních uživatelských zatížení a používání produktu nesprávným způsobem. Záruka platí jen, je-li úplně vyplněn záruční list. UAB Kasko Group I Kid-Man® (dále jen Výrobce) po převzetí reklamovaného zboží od zákazníka v období 4 týdnů rozhodne, zda lze problém řešit cestou záruky. Jestliže se na problém záruka nebude vztahovat a zákazník s tím bude souhlasit, Výrobce, bude-li možno, problém opraví. Veškeré náklady, včetně nákladů na přepravu, musí uhradit zákazník. Záruční oprava neznamená prodloužení záruky.

NORMY A PŘEDPISY

Toto čtyřkolé chodítko vyhovuje požadavkům následujících směrnic:

- a) PŘEDPIS (EU) 2017/745 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 5. dubna 2017 o lékařských zařízeních, kterým se upravuje Směrnice 2001/83/ES, Předpis (ES) č. 178/2002 a Předpis (ES) č. 1223/2009 a odvolávají se Směrnice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.
- b) (ISO 11199-2:2021) Asistenční produkty k chůzi manipulované oběma rukama — Požadavky a zkušební metody — Část 2: Chodítka (ISO 11199-2:2021) EN ISO 11199-2:2021.

PROVOZNÍ ŽIVOTNOST

Očekávaná provozní životnost je 5 (pět) roků za předpokladu, že bude produkt každodenně užíván v souladu s bezpečnostními pokyny, návodem k údržbě a doporučeným použitím, jak je uvedeno v tomto Návodu k použití.

Poté bude třeba čtyřkolé chodítko recyklovat. Své čtyřkolé chodítko nevyhazujte do běžného domovního odpadu (viz kapitolu „LIKVIDACE“).

INFORMACE O VÝROBCI

Výrobce Skupina: UAB „Kasko Group“ (registrovaná obchodní známka Kid-Man®)

Adresa A.Vivulskio 12D, Vilnius, Litva,

Telefon +370 5 265 0000

E-mail info@kid-man.com

INFORMACE O VÝROBKU

URČENÍ A ZNAČENÍ

ČTYŘKOLÉ CHODÍTKO GIGAS je zařízení určené k používání při chůzi v interiéru i v exteriéru, dokonale ke kompenzaci a zlepšování omezené schopnosti chůze.

i Toto čtyřkolé chodítko musí odpovídat vašemu konkrétnímu zdravotnímu stavu.

KONTRAINDIKACE

Při používání čtyřkolého chodítka v souladu s jeho určením nejsou žádné známé kontraindikace.

ŘÁDNÍ UŽIVATELÉ

ČTYŘKOLÉ CHODÍTKO GIGAS je určeno ke kompenzaci a zlepšování mobility osoby s omezenou schopností chůze a jeho maximální nosnost je 135 kg.



VAROVÁNÍ

Riziko nehod. U čtyřkolého chodítka je zakázáno překračovat jeho maximální bezpečnou nosnost.




POZOR

Čtyřkolé chodítko je vhodné k používání ostatními. Chcete-li tak učinit, musíte čtyřkolé chodítko nejprve důkladně vyčistit a dezinfikovat. Poté musí všechny součásti čtyřkolého chodítka zkontrolovat prodejce autorizovaného servisu, zda jsou v dobrém celkovém stavu, nejsou opotřebený, a zda je případně není potřeba vyměnit.

ŠTÍTEK PRODUKTU

Identifikační štítek je připevněn na kostře Vašeho čtyřkolého chodítka (viz obrázek).

1. Výrobek
2. Model
3. Maximální zátěž
4. Výrobce / kontaktní údaje
5. Datum výroby
6. UDI (univerzální identifikátor zařízení) / SN (výrobní číslo)
7. Značka CE
8. Viz návod k použití

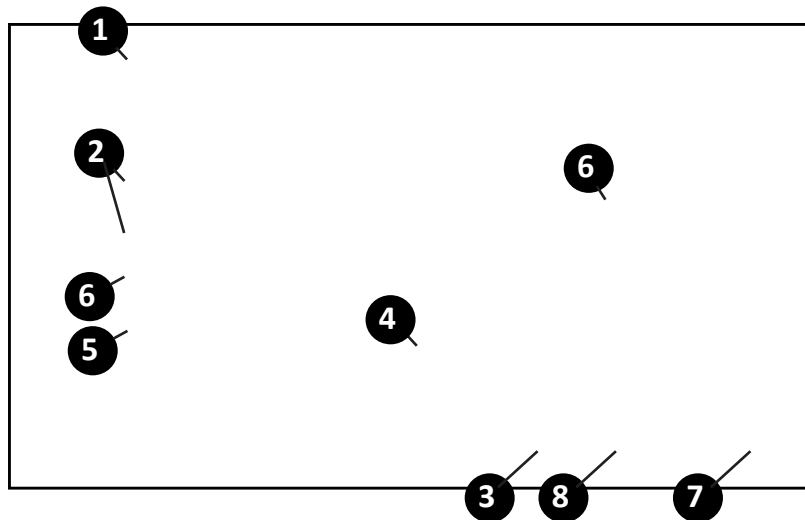

OBSAH BALENÍ

Čtyřkolé chodítko GIGAS je dodáváno v lepenkovém obalu a je připraveno k použití. Po vybalení si lepenkový obal prosím uschovejte. Možná jej budete později potřebovat k uskladnění nebo při vracení zařízení.


Až balíček obdržíte, zkontrolujte prosím, zda nebyl poškozen při přepravě.

Obsah balení:

1. 1 složené čtyřkolé chodítko
2. 1 opěrka
3. 2 knoflíky (a další podrobnosti) k montáži chodítka
4. 1 x taška
5. Návod k použití

i Jestliže zpozorujete známky poškození, okamžitě to prosím oznamte přepravní firmě.


i Zkontrolujte prosím obsah balení, a jestliže budou některé z níže uvedených součástí chybět, kontaktujte svého místního prodejce.

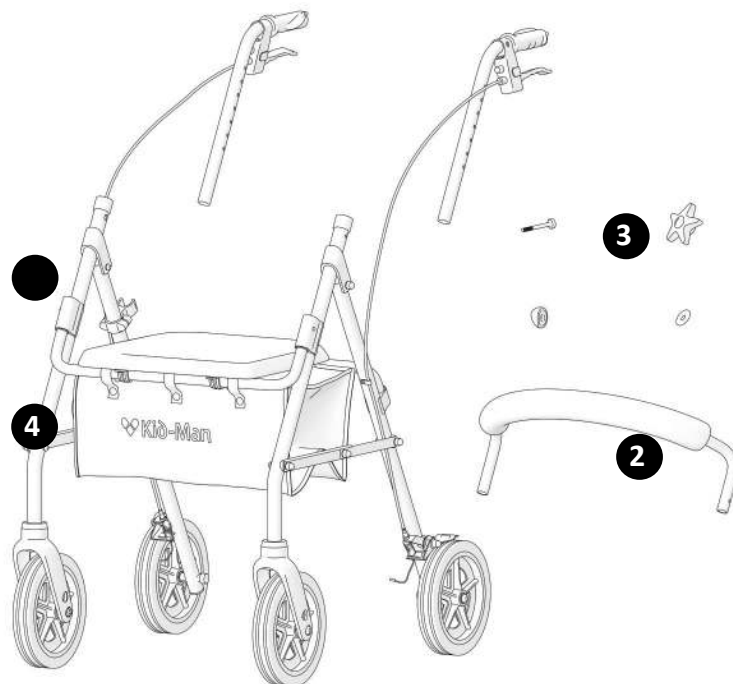

SOUČÁSTI A FUNKCE

Přehled

1. Rukojeť
2. Brzda
3. Výškově nastavitelný knoflík pro rukojeť
4. Rám
5. Zadní kolo
6. Kolečko
7. Taška
8. Brzdový drát
9. Sedadlo
10. Opěrka

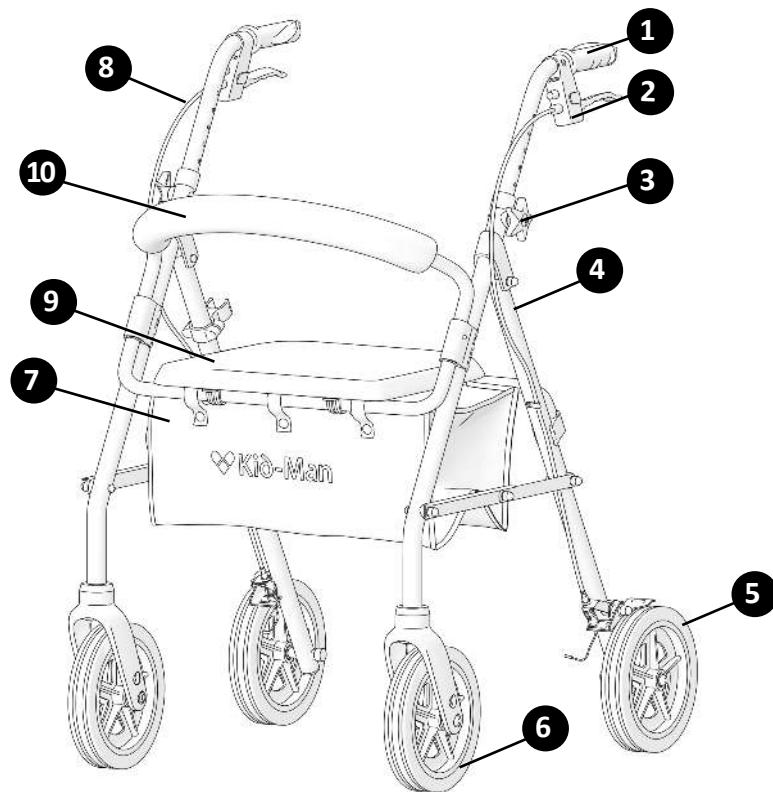

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA

- Chcete-li čtyřkolé chodítko rozložit (Obrázek 1 - 2):
 - 1) Umístěte čtyřkolé chodítko do polohy před sebou;
 - 2) Rukama otevřete sedadlo;
 - 3) Skrze spodek koše uchopte kovovou páčku a stlačujte ji dolů, čímž zajistíte, že se chodítko rozloží.
- Chcete-li čtyřkolé chodítko složit (Obrázek 3, Obrázek 2):
 - 1) Umístěte čtyřkolé chodítko do polohy před sebou;
 - 2) Rukama otevřete sedadlo;
 - 3) Skrze spodek koše uchopte kovovou páčku a zdvihejte ji nahoru, dokud se chodítko nesloží.



VAROVÁNÍ

Při skládání a rozkládání čtyřkolého chodítka vzniká nebezpečí zachycení prstů!

SEZENÍ NA CHODÍTKU

Než nasednete na sedadlo svého chodítka, ujistěte se, zda je chodítko zaparkováno parkovací brzdou. Když dosednete, zajistěte prosím, abyste měli nohy mezi zadními koly (Obrázek 4).

VĚŠENÍ TAŠKY

Chcete-li dát na chodítko tašku, musíte dát popruhy přes rám vpředu a vzadu pod sedadlem (Obrázek 6 - 7).

PROVOZ



VAROVÁNÍ

Nejsou žádné polohy bodů určených k ukotvení přídavných zátěží.

BRZDĚNÍ

Účinnost brzd může být ovlivněna odrhnutím kol. Proto brzdy pravidelně zkoušejte. Abyste dosáhli požadované brzdné síly, seřizujte brzdu buďto ručně šroubem na krytu brzdy, nebo vhodným nástrojem (který není v dodávce) na brzdovém drátu (viz Obrázek 8).

PROVOZ BRZD

Chcete-li brzdy aktivovat, zdvihněte brzdné páčky nahoru a podržte je tam (dle vyznačení šipkou).

Chcete-li brzdy uvolnit, uvolněte páčky (Obrázek 9).

Chcete-li zabrzdit parkovacími brzdami čtyřkolého chodítka, stiskněte brzdové páčky tak, aby zapadly do dolní polohy a zůstaly v ní, jak je vyznačeno šipkou (Obrázek 10).



VAROVÁNÍ

Než se usadíte na sedadle, ujistěte se, zda jsou brzdy zabrzděny.

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETÍ

CHŮZE

Až půjdete se svým chodítkem, zajistěte, abyste chodili zpřímá, s chodítkem podél těla. Tak si osvojíte správnou polohu těla (Obrázek 14).



VAROVÁNÍ

Toto chodítko je vhodné k použití jen pro jednoho.

ÚDRŽBA

Aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz, provádějte pravidelně následující kontroly a údržbu, nebo svěřte jejich provedení jiné osobě. Níže naleznete doporučený harmonogram údržby.

	Před použitím			



VAROVÁNÍ

Opravy, čištění a seřizování čtyřkolého chodítka smí provádět jen osoba z autorizovaného servisu, která přitom nesmí na čtyřkolém chodítku sedět ani jej používat.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Musí být udržováno čisté a nezaprášené. To můžete provádět mopem nebo mokrým hadrem a šetrným detergentem.

- i** Písek a mořská voda mohou poškozovat ložiska, a ocelové součásti chodítka mohou po poškození povrchu rezivět. Bude-li čtyřkolé chodítko krátkodobě vystaveno písku a mořské vodě, po každé návštěvě pláže jej vyčistěte.

SKLADOVÁNÍ

Čtyřkolé chodítko skladujte za následujících podmínek:

- Teplotní rozmezí -20 °C až +40 °C;
- Relativní vlhkost: 20 % až 75 %;

OPAKOVANÉ POUŽITÍ

Toto čtyřkolé chodítko je vhodné k opakovanému použití. Musíte provádět následující akce:

Čištění a dezinfekce (viz kapitulu „ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE“).
Inspekce (viz kapitulu „ÚDRŽBA“).

Čtyřkolé chodítko je třeba podle servisní dokumentace přizpůsobit novému uživateli.

LIKVIDACE

Buďte ekologicky uvědomělí a likvidujte své čtyřkolé chodítko řádně. Na likvidaci se vztahují národní a místní předpisy.

INCIDENTY

Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s používáním zařízení dojde, je třeba nahlásit společnosti UAB Kasko Group I Kid-Man® a příslušnému úřadu členského státu, na jehož území uživatel nebo pacient žije.



Kontakty

UAB Kasko Group | Kid-Man® (registrovaná obchodní známka Kid-Man®)

Adresa A.Vivulskio 12D, Vilnius, Litva,

Telefon +370 5 265 0000

E-mail info@kid-man.com

Web www.kid-man.com

SK**SYMBOLY****i**

VAROVANIE/VÝSTRAHA – signalizuje, že pri narábaní s pomôckou je potrebná obozretnosť. Upozorňuje, že v danej situácii sa vyžaduje pozornosť obsluhy alebo jej konanie, aby nedošlo k nežiaducim následkom.

Pozor! Toto označenie sa používa v dôležitých prípadoch týkajúcich sa vašej bezpečnosti. Pozrite si návod na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**VAROVANIE**

Chodítko je určené len pre jedného používateľa.

**VÝSTRAHA**

Buďte si vedomý možných rizík vo vašom okolí ako úzkych dverí, schodov, domácich spotrebičov, detských hračiek atď. Nepokúšajte sa dočiahnuť na predmety, ktoré nemáte na dosah ruky.

**VAROVANIE**

Pri používaní chodítka je zakázané fajčiť alebo sa pohybovať v blízkosti plameňov.



VAROVANIE

Chodítko nie je určené pre nevidiacich.



VÝSTRAHA

Na klesaniach sa pohybujte pomaly. Neprekračujte uvedený maximálny sklon. Nepoužívajte pohyblivé schody. Necúvajte dolu svahom.



VÝSTRAHA

Riziko zacviknutia prstov. Vždy existuje riziko zacviknutia prstov, zachytenia ruky a pod. do pohybujúcich sa dielov chodítka.



VAROVANIE

Je zakázané prekročiť maximálnu povolenú záťaž výrobku.



VÝSTRAHA

Pri vybaľovaní si dajte pozor na riziko poranenia v dôsledku zachytenia prstov medzi špicami a vidlicou.



VAROVANIE

Pri používaní chodítka používajte obe brzdy súčasne, aby ste zabránili tomu, že sa nebrzdené koleso skrúti a spôsobí pád používateľa chodítka.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ÚVOD

PREDSLOV

Ďakujeme vám za dôveru prejavenu značke Kid-Man®. Každý výrobok je skontrolovaný v továrni a odchádza od nás v bezchybnom stave. Prajeme vám veľa úspechov a dúfame, že chodítko UAB Kasko Group | Kid-Man® zlepší váš každodenný život.

ZÁRUKA

Záruku na výrobok poskytujeme na 24 mesiacov od dátumu nákupu. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za poškodenie výrobku, ak sa bez súhlasu výrobcu vykonajú akékoľvek neautorizované zmeny. Vzťahuje sa to aj na prekročenie maximálneho povoleného zaťaženia a nesprávne používanie výrobku. Záruka je platná iba s kompletne vyplneným záručným listom. UAB Kasko Group | Kid-Man® (ďalej len „výrobca“) o tom, či sa na problém vzťahuje záruka, rozhodne do 4 týždňov od prijatia reklamácie výrobku od kupujúceho. Ak sa na problém nevzťahuje záruka a zákazník súhlasí, výrobca môže problém vyriešiť, ak je to možné. Všetky náklady vrátane nákladov spojených s prepravou by mal hradiť zákazník. Záručná oprava nepredlžuje záručnú dobu.

NORMY A PREDPISY

4-kolesové chodítko spĺňa požiadavky:

- a) NARIADENIA (EÚ) 2017/745 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.
- b) (ISO 11199-2:2021) Technické pomôcky na chôdzu ovládané obidvoma rukami. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Rolátory (ISO 11199-2:2021) EN ISO 11199-2:2021.

ŽIVOTNOSŤ

Očakávaná životnosť je 5 (päť) rokov za predpokladu, že sa výrobok každý deň používa v súlade s bezpečnostnými pokynmi, návodom na údržbu a na určené použitie, uvedené v tomto návode na použitie.

Následne je potrebné chodítko recyklovať. Nevyhadzujte svoje chodítko do bežného odpadu (viď časť „LIKVIDÁCIA“).

INFORMÁCIE O VÝROBCOVI

Výrobca: UAB „Kasko Group“ (registrovaná ochranná známka Kid-Man®)

Address A.Vivulskio 12D, Vilnius, Litva,

Telefónne číslo +370 5 265 0000

E-mail info@kid-man.com

Webová stránka www.kid-man.com

INFORMÁCIE O VÝROBKU

Výrobok:

ZAMÝŠĽANÝ ÚČEL A INDIKÁCIE

4-KOLESOVÉ CHODÍTKO GIGAS je chodítko na vnútorné a vonkajšie použitie, ktoré je ideálne na kompenzáciu a zlepšenie obmedzenej schopnosti chôdze.

i Toto 4-kolesové chodítko musí byť prispôsobené vášmu špecifickému zdravotnému stavu.

KONTRAINDIKÁCIE

Pri správnom používaní chodítka nie sú známe žiadne kontraindikácie.

ZAMÝŠĽANÝ POUŽÍVATEĽ

4-KOLESOVÉ CHODÍTKO GIGAS je určené na kompenzáciu a zlepšenie mobility osôb s obmedzenou schopnosťou chôdze s maximálnou hmotnosťou 135 kg.



VAROVANIE

Riziko úrazov. Je zakázané prekročiť maximálnu povolenú záťaž 4-kolesového chodítka.




VÝSTRAHA

4-kolesové chodítko môžu používať aj iné osoby. 4-kolesové chodítko je predtým potrebné starostlivo vyčistiť a dezinfikovať. Následne je potrebné dať skontrolovať všetky diely 4-kolesového chodítka, všeobecný stav a opotrebovanie autorizovanému servisnému predajcovi a v prípade potreby ho opraviť.

OZNAČENIE VÝROBKU

Identifikačný štítok je pripevnený k rámu vášho 4-kolesového chodítka (viď obrázok).

1. Výrobok
2. Model
3. Maximálne zaťaženie
4. Výrobca/kontaktné údaje
5. Dátum výroby
6. Kód UDI / SN
7. Označenie CE
8. Prečítajte si návod na použitie

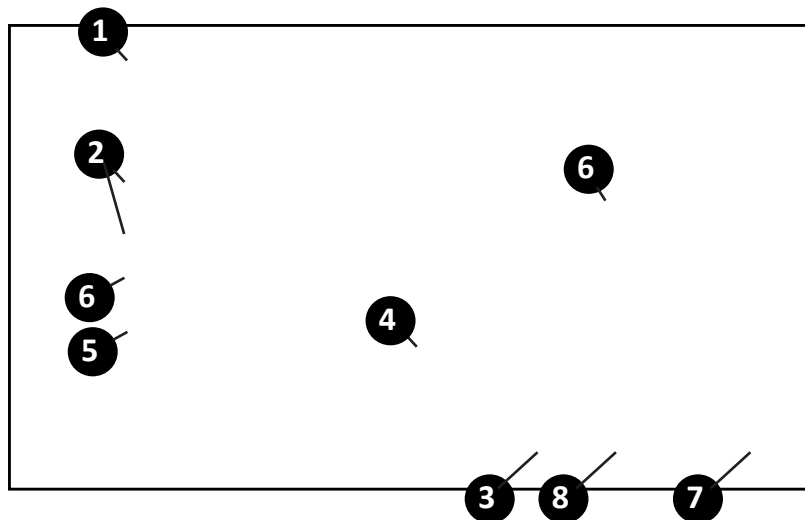

OBSAH BALENIA


4-kolesové chodítka GIGAS sa dodávajú v kartónovom balíku a sú takmer hneď pripravené na použitie. Ak je to možné, nechajte si po rozbalení výrobku kartónový obal. Možno ho budete potrebovať neskôr na uskladnenie alebo vrátenie pomôcky. Po prijatí zásielky skontrolujte, či sa počas prepravy vozík nepoškodil.

Obsah balenia:

1. 1 x zložené chodítko
2. 1 x operadlo
3. 2 x gombík (a ďalšie detaily) pre montáž chodítko
4. 1 x taška
5. Návod na použitie

i Ak uvidíte známky poškodenia, hneď na to upozornite prepravnú spoločnosť.


i Skontrolujte obsah balenia a v prípade, že niektorý z dielov uvedených nižšie chýba, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

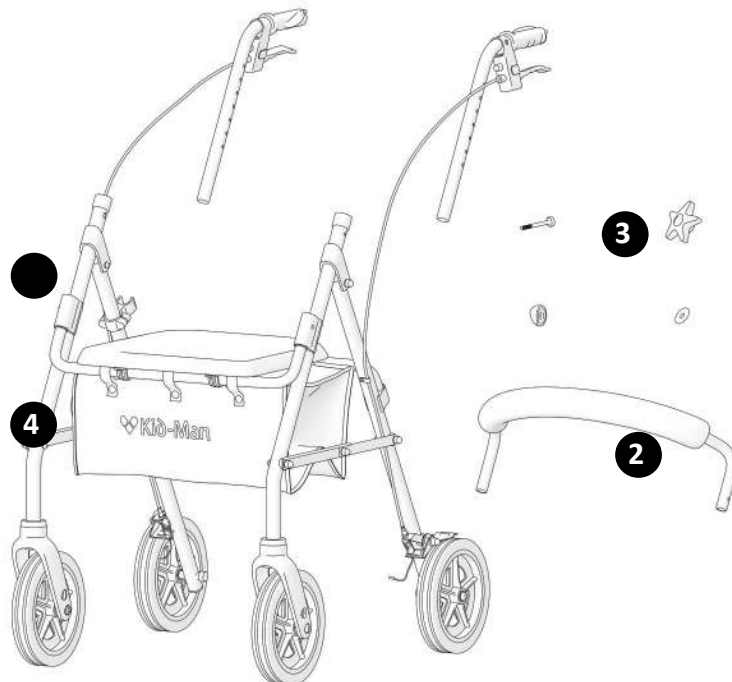

DIELY A FUNKCIE

Prehľad

1. Rukoväť
2. Brzda
3. Výškovo nastaviteľný gombík pre rukoväť
4. Rám
5. Zadné koleso
6. Koliesko
7. Taška
8. Brzdový kábel
9. Sedadlo
10. Operadlo

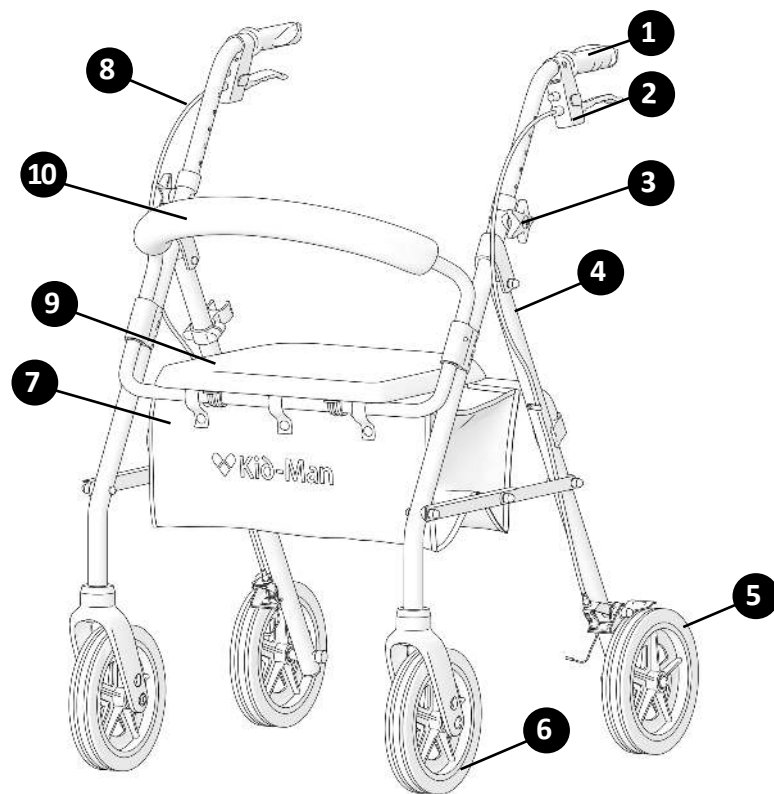

ROZLOŽENIE A ZLOŽENIE CHODÍTKA

- Unfolding a 4-wheel walker (Obrázok č. 1 - 2):
 - 1) Umiestnite 4-kolesové chodítko pred seba;
 - 2) Rukami otvorte sedadlo;
 - 3) Uchopte kovovú páku cez spodnú časť koša a zatlačte ju nadol; uistite sa, že sa chodítko rozloží.
- Zloženie 4-kolesového chodítka (Obrázok č. 3, Obrázok č. 2):
 - 1) Umiestnite 4-kolesové chodítko pred seba;
 - 2) Rukami otvorte sedadlo;
 - 3) Uchopte kovovú páku cez spodnú časť koša a zdvihnite ju, kým sa chodítko nezloží.



VAROVANIE

Pri rozkladaní 4-kolesového chodítka existuje nebezpečenstvo zacviknutia prstov!

SEDENIE NA CHODÍTKU

Predtým, ako si sadnete na sedadlo chodítka, sa uistite, že má chodítko zatiahnutú parkovaciu brzdu. Keď si sadnete, uistite sa, že vaše nohy sú medzi zadnými kolesami (Obrázok č. 4).

ZAVESENIE TAŠKY

Ak chcete na chodítko nasadiť tašku, je potrebné prevesiť popruhy cez rám vpredu a vzadu pod sedadlom (Obrázok č. 6 - 7).

OBSLUHA



VAROVANIE

Neexistujú žiadne polohy určené na prepravu dodatočného zaťaženia.

BRZDENIE

Účinnosť brzd môže byť ovplyvnená opotrebovaním kolies. Brzdy preto pravidelne testujte. Na dosiahnutie požadovanej brzdnnej sily nastavte brzdu buď ručne na skrutke na kryte brzdy, alebo pomocou vhodného nástroja (nie je súčasťou dodávky) na brzdovom kábli (pozri Obrázok č. 8).

OVLÁDANIE BRZD

Brzdy sa aktivujú zdvihnutím brzdových pák nahor a ich podržaním (ako ukazuje šípka).

Brzdy sa uvoľnia uvoľnením pák (Obrázok č. 9).

Parkovacie brzdy 4-koľového chodítka sa aktivujú stlačením brzdových pák, až kým sa nezablokujú a zostanú v polohe dole, ako ukazuje šípka (Obrázok č. 10).



VAROVANIE

Pred usadnutím na sedadlo sa uistite, že sú brzdy zatiahnuté.

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄŤÍ

Uvoľnite gombík na nastavenie výšky na ľavej a pravej strane 4-koľového chodítka otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

CHÔDZA

Pri chôdzi s chodítkom dbajte na to, aby ste chodili vzpriamene, s chodítkom pri tele. Takto dosiahnete správne držanie tela (Obrázok č. 14).



VAROVANIE

Chodítko je určené len pre jedného používateľa.

ÚDRŽBA

Na účely zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti vozíka pravidelne vykonávajte nasledujúce kontroly a údržbu alebo ho nechajte skontrolovať inou osobou. Odporúčaný plán údržby je uvedený nižšie.

	Pred použitím	Každý týždeň		



VAROVANIE

Oprava, čistenie alebo prispôsobovanie chodítka by mal vykonávať autorizovaný údržbár, keď používateľ nesedí na 4-kolesovom chodítku.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Pomôcka by mala byť udržiavaná čistá a bez prachu. To možno zabezpečiť použitím prachovky alebo vlhkej handry a jemného čistiaceho prostriedku.

- i** Piesok a morská voda môžu poškodiť ložiská a v prípade, že je povrch oceľových dielov chodítka poškodený, môžu zhrdzaviť. Ak je 4-kolesové chodítko vystavené piesku a morskej vode len na krátku dobu, po každom výlete na pláž chodítko vyčistite.

SKLADOVANIE

Uchovávajte 4-kolesové chodítko za týchto podmienok:

- Teplotné obmedzenie –20 °C až +40 °C;
- Relatívna vlhkosť 20 % až 75 %;

OPÄTOVNÉ POUŽITIE

4-kolesové chodítko je vhodné na opätovné používanie. Treba predtým vykonať nasledujúce kroky:

Čistenie a dezinfekciu (viď časť „ČISTENIE A DEZINFEKCIA“).

Kontrolu (viď časť „ÚDRŽBA“).

4-kolesové chodítko by malo byť prispôsobené pre nového používateľa v súlade so servisnou dokumentáciou.

LIKVIDÁCIA

Buďte ohľaduplný k životnému prostrediu a zlikvidujte svoje 4-kolesové chodítko správne. Likvidácia podlieha národným a miestnym

NEHODY

V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mal používateľ ohlásiť spoločnosti UAB Kasko Group | Kid-Man® a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má používateľ a/alebo pacient svoje bydlisko.



Kontakt

UAB Kasko Group | Kid-Man® (registrovaná ochranná známka Kid-Man®)

Adresa A.Vivulskio 12D, Vilnius, Litva,

Telefónne číslo +370 5 265 0000

E-mail info@kid-man.com

Webová stránka www.kid-man.com

SL**SIMBOLI**

V teh navodilih za uporabo so opozorila označena s simboli. Opozorilne simbole spremlja naslov, ki opredeljuje

i

OPOZORILO/PREVIDNOST - napis opozarja na potrebno previdnost pri uporabi naprave. Opozarja tudi na to, da je v zadevni situaciji potrebna ozaveščenost ali ukrepanje upravljavca, da bi preprečili neželene posledice.

Pozor! Ta napis se uporablja za zelo pomembne dele, ki zadevajo vašo varnost. Prosimo vas, da si ogledate navodila za uporabo.

VARNOSTNE INFORMACIJE**OPOZORILO**

Rolator je primeren le za eno osebo.

**PREVIDNOST**

Bodite pozorni na nevarnosti v vašem okolju, kot so ozke odprtine vrat, stopnice, gospodinjski aparati, otroške igranje itd. Ne segajte po predmetih, ki se nahajajo na razdalji, ki je večja od iztega rok.

**OPOZORILO**

Ob uporabi rolatorja je prepovedano kaditi ali se nahajati v bližini ognja.



OPOZORILO

Rolator ni namenjen slepim osebam.



PREVIDNOST

Na klancih vozite počasi. Ne prekoračite največjega navedenega naklona. Ne uporabljajte tekočih stopnic. Ne vozite vzvratno po klancu navzdol.



PREVIDNOST

Nevarnost ukleščenja prstov. Vedno obstaja tveganje za ukleščenje npr. prstov na roki ali rok v premikajoče dele rolatorja.



OPOZORILO

Prepovedano je preseči največjo varno obremenitev rolatorja.



PREVIDNOST

Med razpakiranjem rolatorja bodite pozorni na tveganje za nastanek poškodb zaradi ukleščenja prstov med napere in vilice kolesa.



OPOZORILO

Pri uporabi rolatorja aktivirajte obe zavori hkrati, da preprečite, da bi se nezavirano kolo zasukalo in bi uporabnik rolatorja padel.

SPLOŠNO

UVOD

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije v zvezi z rokovanjem z izdelkom. Za zagotovitev varnosti pri uporabi izdelka,

PREDGOVOR

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje v blagovno znamko Kid-Man®. Vsak izdelek je bil tovarniško pregledan in odposlan v brezhibnem stanju. Želimo vam veliko uspeha, obenem pa upamo, da bo rolator Kid-Man® družbe UAB Kasko Group pozitivno vplival na vaše vsakodnevno življenje.

GARANCIJA

Za izdelek izdajamo 24-mesečno garancijo, ki velja od datuma njegovega nakupa. Vse nepooblaščenke spremembe, izvedene brez odobritve proizvajalca, bodo povzročile nično in neveljavno odgovornost proizvajalca. To vključuje prekoračitev največje obremenitve s strani uporabnika in nepravilno uporabo izdelka. Garancija velja le s popolnoma izpolnjenim garancijskim listom. Družba UAB Kasko Group | Kid-Man® (v nadaljnjem besedilu »proizvajalec«) v 4 tednih od prejema zahtevka s strani kupca, odloči, ali ta spada v okvir garancije ali ne. Če garancija ne krije kupčeve težave z izdelkom, lahko proizvajalec, če kupec s tem soglaša, odpravi težavo (če je to mogoče). Vse stroške, vključno s stroški prevoza, krije kupec. Popravilo v času garancije ne pomeni podaljšanja garancije.

STANDARDI IN PREDPISI

Štirikolesni rolator izpolnjuje sledeče zahteve:

- a) UREDBO (EU) 2017/745 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembo Direktive 2001/83/ES, Uredbo (ES) št. 178/2002 in Uredbo (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitev direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS.
- b) Pripomočki za hojo, ki se upravljajo z obema rokama - Zahteve in preskusne metode - 2. del: Rolatorji (ISO 11199-2:2021) EN ISO 11199-2:2021.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Ob predpostavki, da se izdelek uporablja vsak dan in v skladu z varnostnimi navodili, navodili za vzdrževanje in predvideno uporabo, ki je navedena v navodilih za uporabo, pričakovana življenjska doba rolatorja znaša pet (5) let.

Po preteku navedenega obdobja je štirikolesni rolator treba reciklirati. Rolatorja ne odložite med navadne odpadke (glejte poglavje »ODSTRANJEVANJE«).

INFORMACIJE O PROIZVAJALCU

Proizvajalec: UAB "Kasko Group" (registrirana blagovna znamka Kid-Man®)

Naslov A.Vivulskio 12D, Vilna, Litva,

Telefon +370 5 265 0000

E-pošta info@kid-man.com

PODATKI O IZDELKU

Izdelek: **ŠTIRIKOLESNi ROLATOR**

PREDVIDENI NAMEN IN INDIKACIJE

ŠTIRIKOLESNi ROLATOR GIGAS je pripomoček za pomoč pri hoji v zaprtih prostorih in na prostem, namenjen za nadomestitev oziroma izboljšanje omejene sposobnosti hoje.

i Ta štirikolesni rolator mora ustrezati vašemu specifičnemu zdravstvenemu stanju.

KONTRAINDIKACIJE

Pri uporabi štirikolesnega rolatorja v skladu z njegovim predvidenim namenom, ni znanih kontraindikacij.

PREDVIDENI UPORABNIKI

ŠTIRIKOLESNi ROLATOR GIGAS je namenjen za nadomestitev in izboljšanje mobilnosti osebe z omejeno sposobnostjo hoje z največjo dovoljeno telesno težo 135 kg.



OPOZORILO

Nevarnost nesreč. Prepovedano je preseči največjo varno obremenitev štirikolesnega rolatorja.




PREVIDNOST

Štirikolesni rolator je primeren za uporabo s strani drugih oseb. V ta namen je treba štirikolesni rolator predhodno temeljito očistiti in razkužiti. Pooblaščen servisni zastopnik mora nato preveriti splošno stanje in obrabo vseh sestavnih delov štirikolesnega rolatorja ter jih po potrebi popraviti.

OZNAKA IZDELKA

Identifikacijska etiketa je pritrjena na ogrodje štirikolesnega rolatorja (glejte sliko).


1. Izdelek
2. Model
3. Največja obremenitev
4. Proizvajalec/kontaktne podatki
5. Datum izdelave
6. Edinstveni identifikator pripomočka/
Serijska številka
7. Oznaka CE
8. Preberite navodila za uporabo

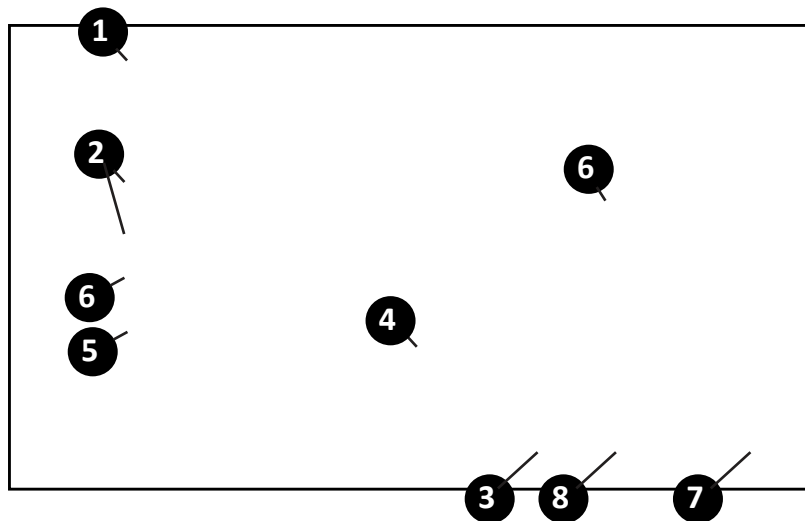

SESTAVNI DELI IN FUNKCIJE

Pregled

1. Ročaj
2. Zavora
3. Gumb za nastavitev višine ročaja
4. Ogrodje
5. Zadnje kolo
6. Kolo
7. Torba
8. Zavorni kabel
9. Sedež
10. Naslon za hrbet

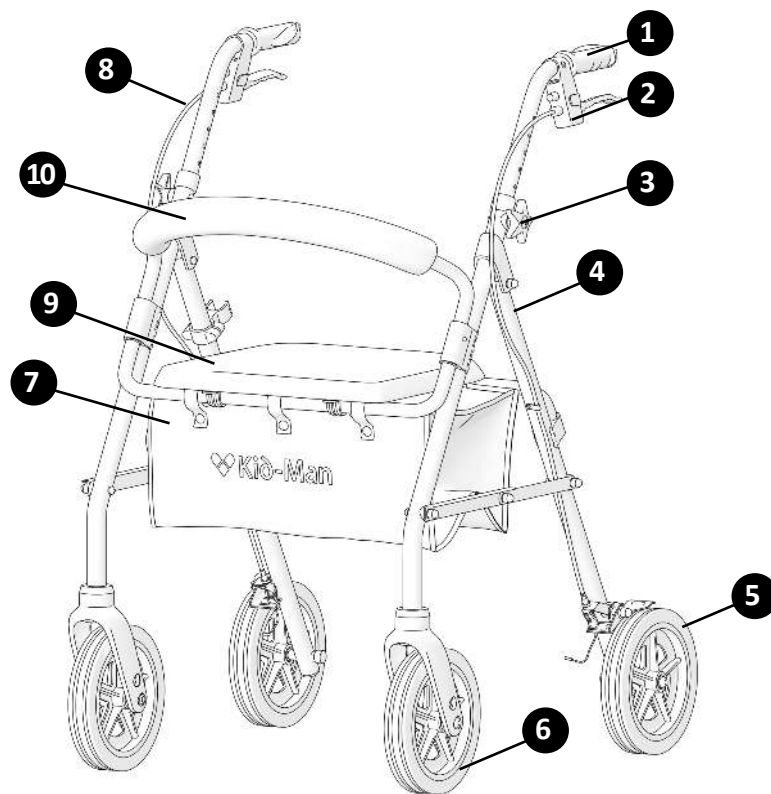

RAZSTAVLJANJE IN ZLAGANJE ROLATORJA

- Razgrnite štirikolesni sprehajalec (Slika 1 - 2):
 - 1) Postavite štirikolesni rolator pred seboj
 - 2) Z roko dvignite sedež;
 - 3) Skozi dno košare primite kovinski vzvod in ga potiskajte navzdol, dokler se rolator ne razstavi.
- Za zložitev štirikolesnega rolatorja (Slika 3, Slika 2):
 - 1) Postavite štirikolesni rolator pred seboj;
 - 2) Z roko dvignite sedež;
 - 3) Skozi dno košare primite kovinski vzvod in ga dvigajte navzgor, dokler se rolator ne zloži.



OPOZORILO

Med razstavljanjem in zlaganjem štirikolesnega rolatorja obstaja tveganje za ukleščenje prstov!

SEDENJE NA ROLATORJU

Preden se usedete na sedež rolatorja, se prepričajte, da ste aktivirali parkirno zavoro. Ko se usedete, poskrbite, da se vaši stopali nahajata med obema zadnjima kolesoma.

NAMEŠČANJE TORBE

Če želite na rolator obesiti košaro, morate trakove namestiti na sprednjo in zadnjo stran ogrodja sedeža (Slika 6 - 7).

UPRAVLJANJE



OPOZORILO

Na rolatorju ni položajev točk, ki bi omogočale prenašanje dodatnih bremen.

ZAVIRANJE

Obraba koles lahko vpliva na učinkovitost zavor. Zato je treba redno preverjati stanje zavor. Za doseg želene zavorne moči, je treba zavoro nastaviti bodisi ročno pri vijaku na ohišju zavor ali z ustreznim orodjem (ni priloženo) na zavornem kablu (glejte sliko 8).

AKTIVIRANJE ZAVOR

Če želite aktivirati zavor, dvignite zavorni ročici in ju zadržite (glejte puščico).
Za sprostitve zavor, spustite zavorni ročici (Slika 9).

Če želite aktivirati parkirne zavor štirikolesnega rolatorja, pritisnite na zavorni ročici dokler se ne zaskočita in ostaneta v spodnjem položaju, kot kaže puščica (Slika 10).



OPOZORILO

Preden se usedete na sedež se prepričajte, da so zavor aktivirane.

PRILAGODITEV VIŠINE ROČAJEV

Sprostite gumb za nastavitev višine tako, da gumba za nastavitev višine, ki se nahajata na levi in desni strani štirikolesnega rolatorja,

HOJA

Pri hoji z rolatorjem pazite, da hodite pokončno, z rolatorjem ob telesu. S tem boste poskrbeli za pravilno držo telesa (Slika 7).



OPOZORILO

Rolator je primeren le za eno osebo.

VZDRŽEVANJE

Za zagotovitev varnega in zanesljivega delovanja redno izvajajte spodnje preglede in vzdrževalne postopke ali za njih zadolžite drugo osebo. V nadaljevanju je naveden načrt priporočenih posegov vzdrževanja.

	Pred uporabo	Enkrat na		



OPOZORILO

Popravilo, čiščenje ali nastavitev štirikolesnega rolatorja mora opraviti pooblaščen servisni tehnik, in sicer medtem, ko oseba ne sedi oziroma ne uporablja štirikolesnega rolatorja.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

Rolator mora biti čist in brez prahu. Očistite ga lahko s krpo za brisanje prahu in blagim čistilnim sredstvom.

- Pesek in morska voda lahko poškodujeta ležaje, jekleni deli rolatorja pa lahko zarjavijo zaradi poškodovane površine. Štirikolesni rolator izpostavljajte pesku in morski vodi le za kratek čas in ga po vsakem obisku plaže očistite.

SHRANJEVANJE

Ohranjajte štirikolesni rolator v sledečih pogojih:

- mejna vrednost temperature od -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$;
- relativna vlažnost od 20 % do 75 %;

PONOVNA UPORABA

Ta rolator je primeren za ponovno uporabo. V ta namen je treba opraviti naslednje:

Čiščenje in razkuževanje (glejte poglavje »ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE«).

Pregled (glejte poglavje »VZDRŽEVANJE«).

Rolator je treba prilagoditi novemu uporabniku v skladu s servisno dokumentacijo.

ODSTRANJEVANJE

Bodite odgovorni do okolja in vaš štirikolesni rolator ustrezno odstranite. Odstranitev izdelka je predmet nacionalnih in lokalnih predpisov. Za ustrezno recikliranje vašega štirikolesnega rolatorja se obrnite na vašo lokalno skupnost, podjetje za odstranjevanje odpadkov ali na naš servisni oddelek.

Kontakti

UAB Kasko Group | Kid-Man® (registrirana blagovna znamka Kid-Man®)

Naslov A.Vivulskio 12D, Vilna, Litva,

Telefon +370 5 265 0000

E-pošta info@kid-man.com

Spletna stran www.kid-man.com



KARTA GWARANCYJNA / ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANCIJSKI LIST

Nazwa produktów Název výrobku Názov výrobku Ime izdelka	Model Typ Model Model	Data zakupu (wstawić) Datum nákupu (uved'te) Dátum nákupu (vložit') Datum nakupa (vnesite)	Okres gwarancji Záruční doba Záručná lehota Garancijska doba
PL Chodzik 4-kołowy CZ			

Published by UAB Kasko Group | Kid-Man®

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 265 0000 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

Date 2019-03-18

Date of last update 2025-06-03