



HR Upute za uporabu
HU Használati útmutató
RO Instrucțiuni de utilizare
BG Инструкция за употреба


HR Upute za uporabu MORAJU se dostaviti korisniku proizvoda. PRIJE upotrebe proizvoda,



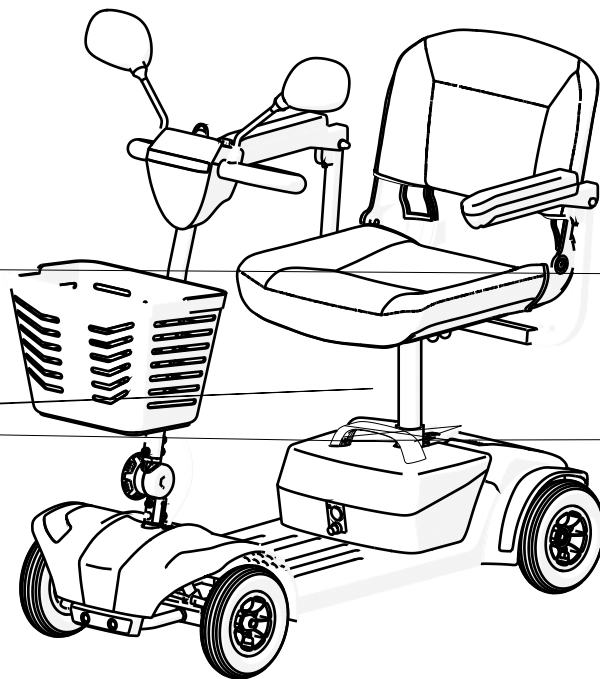

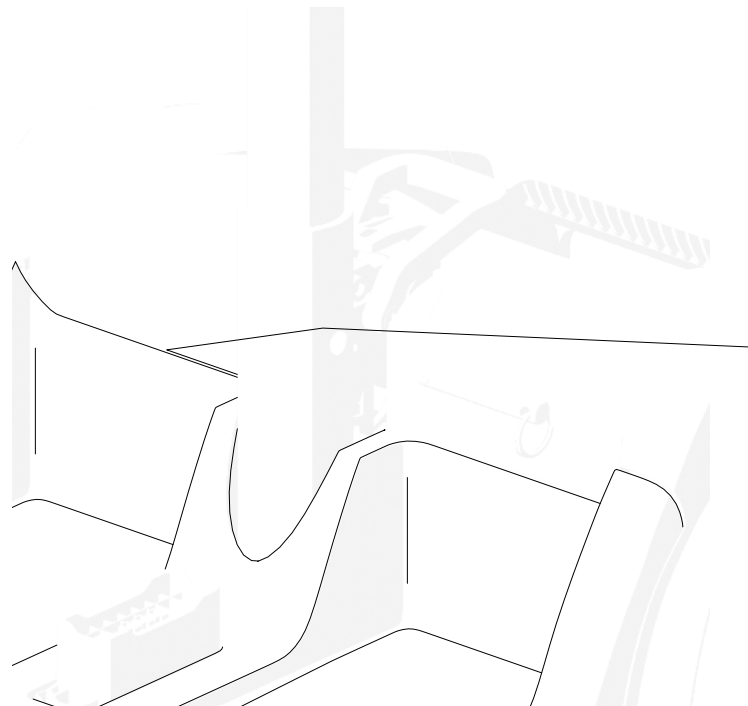


Slika 5 / Ábra 5 / Imaginea 5 / Снимка 5

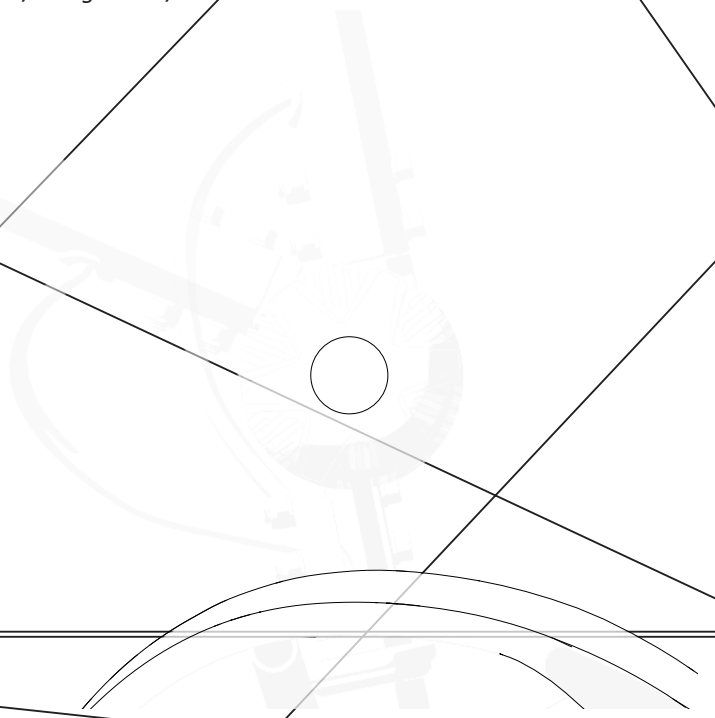


Slika 6 / Álbra 6 / Imaginea 6 / Снимка 6




Slika 7 / Ábra 7 / Imaginea 7 / Снимка 7

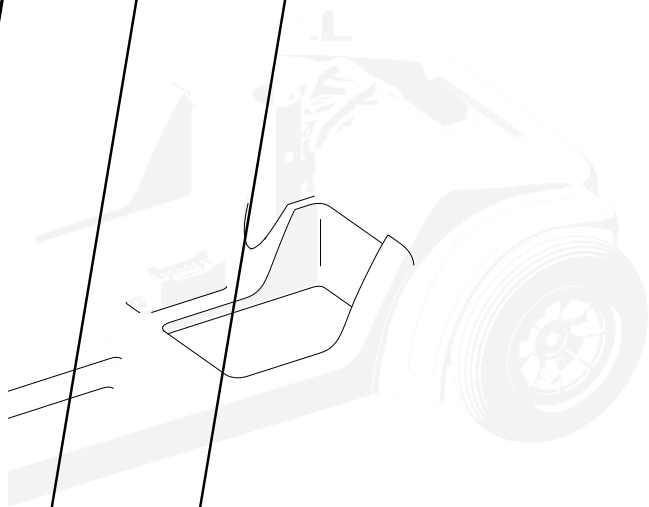

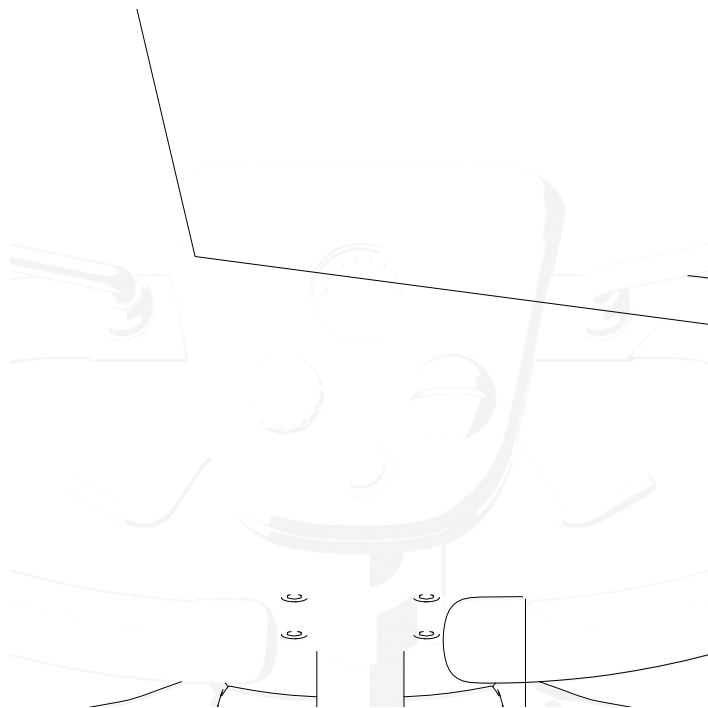



Slika 12 / Ábra 12 / Imaginea 12 / Чумка 12

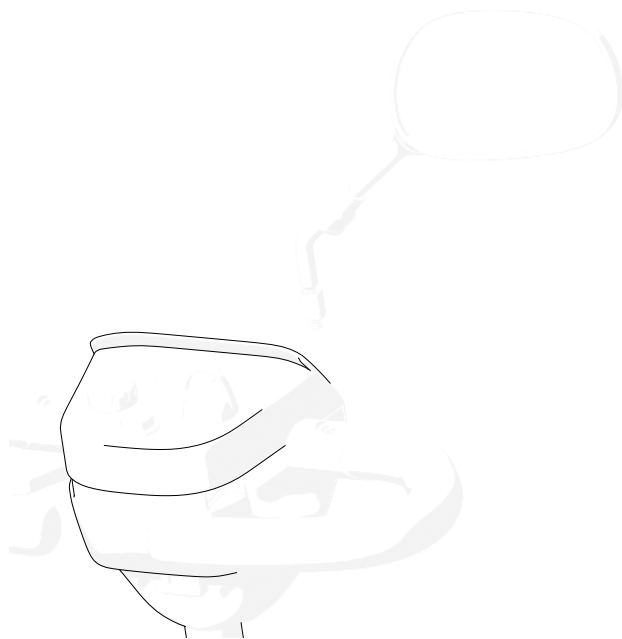





HR**SIMBOLI**

U ovim uputama za uporabu, upozorenja su prikazana simbolima. Simboli upozorenja popraćeni su naslovom koji označava ozbiljnost opasnosti ili osnovne informacije.



Navode se osnovne informacije, preporuke te smjernice za učinkovitu i nesmetanu upotrebu.



UPOZORENJE / OPREZ - označava da je oprez nužan prilikom upotrebe uređaja. Označava kako trenutna situacija zahtijeva pozornost rukovatelja ili rukovatelj treba poduzeti određenu radnju kako bi se izbjegle neželjene posljedice.



UPOZORENJE! Ovaj simbol se koristi za iznimno važne dijelove koji se odnose na vašu sigurnost. Pogledajte upute za upotrebu.

SIGURNOSNE INFORMACIJE**UPOZORENJE**

Bilo kakva druga ili neispravna upotreba može izazvati opasnu situaciju.

UPOZORENJE

Pomagalo je kompaktni skuter za osobe smanjene pokretljivosti dizajniran za unutarnju i vanjsku upotrebu. Budite oprezni

SIGURNOSNE INFORMACIJE



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara. Držite metalne predmete dalje od priključaka baterije. Može doći do strujnog udara.



UPOZORENJE

Ne dopustite djeci da se igraju u blizini skutera niti da njime upravljaju.



UPOZORENJE

Opasnost od nezgoda. Sigurnosni uređaji koji nisu ispravno podešeni ili više ne rade (npr. kočnice, baterija) mogu izazvati nezgode. Prije upotrebe skutera uvijek provjerite rade li sigurnosni uređaji i neka ih ovlašteni zastupnik redovito provjerava.



UPOZORENJE

Opasnost od nezgoda. Pročitajte i pridržavajte se informacija u korisničkom priručniku. Ne koristite ovaj proizvod ili bilo koju dostupnu dodatnu opremu bez da ste prethodno temeljito pročitali i razumjeli ove upute. Ako ne razumijete upozorenja, mjere opreza ili upute, obratite se prodavaču prije nego što pokušate koristiti ovu opremu. U suprotnom, može doći do ozljede ili oštećenja. Nikada ne pokušavajte koristiti svoj skuter za slabije pokretne osobe izvan njegovih ograničenja, kako je opisano u ovom priručniku.



SIGURNOSNE INFORMACIJE**OPREZ**

Površinska temperatura može se povećati kada je izložena vanjskim izvorima topline.

UPOZORENJE

Ne spajajte produžni kabel na punjač baterija.

UPOZORENJE

Zabranjeno je rastavljanje kontrolera, motora ili punjača svima osim ovlaštenog servisera i poništava svako primjenjivo jamstvo.

**UPOZORENJE**

Ne vozite skuter po cestama ili autocestama.

**UPOZORENJE**

Ne koristite skuter ako ste pod utjecajem alkohola, lijekova ili drugih tvari koje mogu utjecati na vaše vozačke sposobnosti.

**UPOZORENJE**

Budite oprezni prilikom vožnje skutera za slabije pokretne osobe u prometnim područjima ili trgovačkim centrima.

**UPOZORENJE**

Ni pod kojim uvjetima se skuter za slabije pokretne osobe ne smije koristiti kao sjedalo u motornom vozilu.

**UPOZORENJE**

Ne pokušavajte podizati svoj skuter za slabije pokretne osobe ni za koji drugi dio osim okvira (na primjer, za sjedalo ili obloge karoserije).

**UPOZORENJE**

Ne dopustite djeci bez nadzora da se igraju u blizini skutera kad se baterije pune.

**UPOZORENJE**

Držite ruke dalje od guma tijekom vožnje. Imajte na umu kako se odjeća širokog kroja može zaplesti u pogonske gume.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE

Pomagalo nije namijenjeno za upotrebu u ili u blizini elektroničkih sigurnosnih sustava kao što su detektori metala ili elektromagnetski protuprovalni sustavi te se radna učinkovitost pomagala može smanjiti u neposrednoj blizini takvih sustava.

UPOZORENJE

Pomagalo nije siguran za upotrebu u okruženjima magnetske rezonancije i ne smije se koristiti u blizini druge napredne medicinske opreme kao što su oprema za elektrokauterizacija, elektrokirurške jedinice i oprema za dijatermiju.

UPOZORENJE

Nemojte ni na koji način mijenjati skuter; time ćete poništiti jamstvo.

UPOZORENJE

Ne sjedite na skuteru za slabije pokretne osobe dok se nalazite u vozilu koje se kreće.

UPOZORENJE

Vozite svoj skuter za slabije pokretne osobe ravno gore ili dolje po kosini, nikada unatrag. Nepravilni pokreti ili obrasci kretanja naprijed-natrag mogu povećati vjerojatnost prevrtanja. Promjene nagiba mogu smanjiti stabilnost. Ni pod kojim uvjetima nemojte voziti po nagibu većem od maksimalnog kuta stabilnosti ovog skutera za slabije pokretne osobe.

UPOZORENJE

Ne koristite ručne primopredajnike poput CB radija (frekvencijski pojas namijenjen građanima) te ne uključujte osobne komunikacijske uređaje, poput mobitela, kad je skuter uključen.

UPOZORENJE

Saznajte položaj obližnjih odašiljača, poput radio ili televizijskih stanica, i izbjegavajte ih u blizini.

OPĆENITO

UVOD

Upute za uporabu sadrže važne informacije kako rukovati proizvodom. Kako bi se osigurala sigurnost prilikom upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte upute za uporabu i pridržavajte se sigurnosnih uputa. Model svog skutera i njegov jedinstveni identifikacijski broj možete pronaći na naljepnici pričvršćenoj na okviru šasije ispod sjedala.

UVOD

Zahvaljujemo na povjerenju koje ste ukazali tvrtki Kid-Man®. Svaki proizvod pregledan je u tvornici i isporučen u besprijekornom stanju.

Želimo vam puno uspjeha i nadamo se da će proizvod UAB Kasko Group | Kid-Man® pozitivno utjecati na vaš svakodnevni život.

JAMSTVO

Izdajemo jamstvo koje traje 24 mjeseca od dana kupnje. Bilo kakva neovlaštena preinaka izvršena bez odobrenja proizvođača poništiti će jamstvo. Ovo uključuje premašivanje maksimalne težine korisnika te neodgovarajuću upotrebu proizvoda. Jamstvo vrijedi samo s ispravno popunjenim jamstvenim listom. Tvrtka UAB „Kasko Group” nakon što je od kupca primila reklamirani artikl u roku od 4 tjedna odlučuje hoće li rješenje problema biti obuhvaćeno jamstvom. Ako problem nije obuhvaćeno jamstvom, a kupac se slaže,

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja proizlazi zbog:

- ne pridržavanja uputa za uporabu;
- neispravne upotrebe;
- uobičajenog trošenja i habanja;
- neispravnog sastavljanja ili podešavanja kupca ili tehničkih izmjena koje je izvršila treća strana
- upotreba neodobrenog pribora treće strane umjesto odobrenog pribora proizvođača
- neovlaštene izmjene i/ili upotreba neprikladnog rezervnog dijela.

STANDARDI I DIREKTIVE

Skuter je u skladu sa zahtjevima:

- a) ISO 7176-4: Zahtjevi za potrošnju energije i teorijski raspon u standardnim uvjetima ispitivanja;
- b) ISO 7176-8: Zahtjevi i metode ispitivanja statičke, udarne i zamorne čvrstoće;
- c) ISO 7176-9: Zahtjevi za klimatska ispitivanja;

VIJEK TRAJANJA

Očekivani vijek trajanja motora skutera za slabije pokretne osobe obično je oko tri godine, što znači da bi uz normalnu upotrebu i redovito održavanje motor trebao raditi otprilike tri godine. Ne odlažite skuter s drugim komunalnim otpadom (pogledajte poglavlje „ZBRINJAVANJE”).

INFORMACIJE O PROIZVODU**Proizvod:** ELEKTRIČNI SKUTER**Model:** SKUTA**REF:** 01-3580**PREDVIĐENA NAMJENA I INDIKACIJE**

Namjena ovog pomagala je omogućiti mobilnost osobama ograničenim na sjedeći položaj koje imaju mogućnost upravljanja skuterom.

PREDVIĐENI KORISNICI

Skuter je dizajniran za lakši prijevoz ljudi. Namijenjen je da ga koristi jedna osoba maksimalne težine od 136 kg, ne za putnike (uključujući djecu). Električni skuter je namijenjen odraslima, ne za prijenos dobara, i nije za osobe mlađe od 16 godina. Električni skuter za slabije pokretne osobe je vrsta prijevoznog pomagala koja pomaže osobama s poteškoćama u kretanju. Ovaj skuter nije prikladan za osobe s hemiplegijom ili paraplegijom i ne smiju ga koristiti osobe s intelektualnim teškoćama.

UPOZORENJE**Opasnost od nezgoda.**

Zabranjeno je premašiti maksimalno sigurno opterećenje skutera.

Namjena pomagala je omogućiti mobilnosti osobama ograničenim na sjedeći položaj.


KONTRAINDIKACIJE

Nema poznatih kontraindikacija kada se skuter koristi u skladu sa svojom namjenom.

OZNAKA PROIZVODA

Identifikacijska oznaka pričvršćena je na proizvod (pogledajte sliku).

1. Product
2. Model
3. Size (seat width)
4. Maximum load
5. Manufacturer / contact details
6. Date of manufacture
7. UDI / SN code
8. CE mark
9. Consult instructions for use

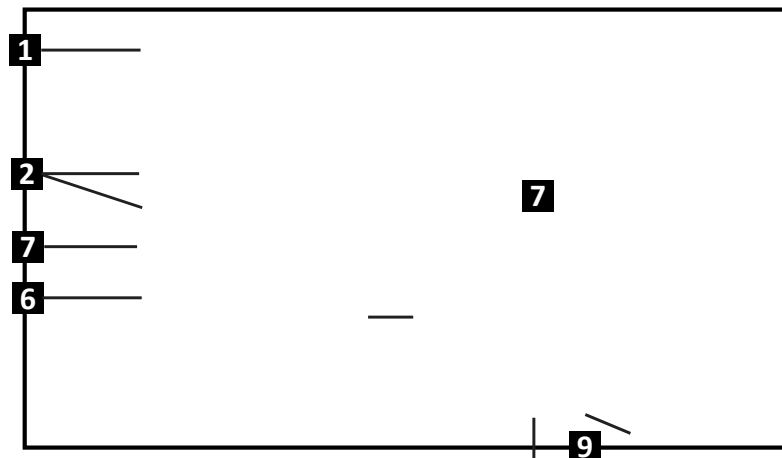

OPREZ

Skuter mogu koristiti druge osobe. Da biste to učinili, skuter prvo morate temeljito očistiti i dezinficirati. Zatim, sve dijelove skutera za slabije pokretne osobe mora provjeriti ovlašteni serviser i to opće stanje, istrošenost te ih po potrebi popraviti.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Skuter za slabije pokretne osobe SKUTA dostavlja se u kartonskom pakiranju i spreman je za upotrebu. Nakon raspakiranja, po mogućnosti sačuvajte kartonsku ambalažu. Možda će vam zatrebati kasnije za skladištenje ili za povrat skutera.

Nakon primitka pošiljke provjerite je li oštećena tijekom transporta.

- i** Ako primijetite znakove oštećenja, molimo da o tome odmah obavijestite prijevozničku tvrtku.
- i** Molimo provjerite sadržaj paketa i ako neki od dolje navedenih dijelova nedostaje, obratite se svom lokalnom prodavaču.

Sadržaj pakiranja:

1. 1 x Električni skuter
2. 1 x Sjedalo s naslonom za ruke
3. 1 x Košara
4. 1 x Modul baterije (instaliran ili odvojen)
5. 2 x Retrovizora
6. 1 x Cijev sjedala sa zapornim zatikom
7. 2 x Alat za podešavanje (ako postoji)
8. 2 x Ključ(evi)
9. 1 x Punjač
10. Upute za uporabu

DIJELOVI I FUNKCIJE

Pregled

Ovo je skuter za slabije pokretne osobe sa sklopivim okvirom i ergonomskim sustavom upravljanja pomoću ručke.

1. Retrovizori
2. Upravljačka konzola
3. Košara
4. Ručka za podešavanje upravljača
5. Prednji kotač
6. Sjedalo s naslonom za ruke
7. Modul baterije
8. Gazište
9. Hvatište ručke
10. Stražnji kotač / pogonski kotač
11. Kotači protiv prevrtanja
12. Ključ
13. Upravljački stup
14. Poluga slobodnog hoda

i Konfiguracija skutera za slabije pokretne osobe može se neznatno razlikovati od skutera opisanog u ovom priručniku zbog stalnog razvoja proizvoda.



PODEŠAVANJE SKUTERA

Rastavljanje skutera:

Vaš mobilni skuter može se rastaviti u pet glavnih dijelova:

1. Sjedalo
2. Stražnji okvir
3. Modul baterije
4. Prednji okvir
5. Košara



UPOZORENJE

Ne podižite težinu veću od one koju stvarno možete podići. Zatražite pomoć ako je potrebno.

PODEŠAVANJE SKUTERA

Sastavljanje skutera za slabije pokretne osobe SKUTA:

1. Umetnite gornju cijev sjedala u donju cijev sjedala (slika 1).
2. Podesite na željenu visinu i poravnajte otvore za podešavanje.
3. Potpuno umetnite zaporni zatik kako biste osigurali cijev (slika 2)
4. Umetnite modul baterije tako da ga postavite na njegovo mjesto (slika 3).
5. Pričvrstite sjedalo spuštanjem na cijev. Okrećite sjedalo dok ne klikne i ne učvrsti se na mjestu (slika 4).
6. Podignite naslon sjedala dok se potpuno ne produži.
7. Podignite upravljač i pričvrstite ga zatezanjem gumba za podešavanje upravljača u smjeru kazaljke na satu (slika 5).
8. Umetnite košaru u držač košare na upravljaču (slika 6).

Sklapanje skutera za slabije pokretne osobe SKUTA:

- 1.



UPOZORENJE

Pazite da ne priključite prste ili odjeću tijekom sastavljanja.

Uvijek provjerite je li upravljač čvrsto blokiran prije upotrebe laganim guranjem/povlačenjem. Po potrebi ponovno zategnite okretni gumb.



UPOZORENJE

Ne podižite ga držeći za sjedalo, bateriju, košaru ili upravljač.

Prvo uklonite sve dijelove (vidi priručnik), a zatim podignite glavni okvir. Težina: ~8 - 10 kg (razlikuje se ovisno o modelu).

RUKOVANJE

Prije upotrebe

Prije korištenja putnog skutera, provjerite je li baterija potpuno napunjena i sigurno instalirana. Sjedalo treba biti pravilno blokirano, a upravljač podešen u udoban položaj. Umetnite ključ u bravu i uključite skuter. Zasljetlit će mjerač baterije i pokazati trenutnu razinu napunjenosti.

Podesite maksimalnu brzinu vožnje pomoću kotačića na instrument ploči - ikona kornjače označava najsporiju postavku, dok zec označava najbržu (slika 8).

Vožnja

Za kretanje naprijed, lagano palcem pritisnite desnu stranu ručice gasa. Za kretanje unatrag, pritisnite lijevu stranu. Otpuštanjem

RUKOVANJE**Sjedenje i dizanje sa skutera**

Stanite pored skutera i okrenite sjedalo prema sebi pomoću poluge za okretanje sjedala (slika 10). Pažljivo sjednite i okrenite sjedalo prema naprijed dok se ne učvrsti na mjestu. Uvijek pazite je li sjedalo blokirano prije vožnje.

Prije sjedenja i dizanja sa skutera, uklonite ključ iz kontakt-brave i spriječite nehotično pomicanje. Pazite da stopala pravilno postavite na platformu za noge i da je skuter na stabilnoj, ravnoj podlozi.

Za sigurno dizanje sa skutera, prvo potpuno zaustavite skuter. Uvijek izvadite ključ iz kontakt-brave prije ustajanja - to sprječava svako nehotično pomicanje.

Okrenite sjedalo u stranu pomoću poluge za okretanje sjedala, pazite da se blokira u tom položaju. Zatim polako ustanite i siđite sa skutera. Koristite naslone za ruke da se podignete (slika 11). Sjedalo možete ostaviti okrenuto bočno kako biste sljedeći put lakše sjeli.

**UPOZORENJE**

Uvijek izvadite ključ prije sjedenja i dizanja sa skutera kako biste spriječili nehotično pomicanje.

Podešavanje retrovizora (ako postoje)

Ako vaš skuter ima retrovizore, možete ih podesiti za bolju vidljivost. Lagano podignite poklopac, otpustite vijak, okrenite retrovizor do željenog kuta i ponovno ga zategnite (slika 12).

UKOVANJE

Sustav za kočenje

Skuter je opremljen elektromagnetskim kočnicama koje se automatski aktiviraju kada otpustite ručicu gasa. Ove kočnice se automatski aktiviraju kada prestanete pritiskati papučicu gasa.

Sustav za kočenje radi samo kada je poluga slobodnog hoda postavljena u položaj za vožnju. Ako je poluga u načinu guranja, kočnice su deaktivirane. Uvijek provjerite je li skuter u načinu rada za vožnju prije upotrebe.

Pogledajte sliku 8.

Ručica za regulaciju gasa

Ručica gasa kontrolira kretanje vašeg skutera naprijed i natrag.

- Stavite desnu ruku na desni rukohvat, a lijevu ruku na lijevi rukohvat.
- Za kretanje naprijed, lagano pritisnite desnu stranu ručice gasa desnim palcem.
- Za kretanje natrag pritisnite lijevu stranu ručice gasa lijevom palcem.
- Za zaustavljanje otpustite ručicu. Automatski će se vratiti u središnji položaj „zaustavljanja” i aktivirat će se elektromagnetske kočnice.

Kontakt-brava

- Umetnite ključ u kontakt-bravu i okrenite ga u položaj UKLJUČENO kako biste uključili skuter.
- Za isključivanje skutera, okrenite ključ u položaj ISKLJUČENO i izvucite ga.

RUKOVANJE**Stepenice**

Ako trebate premjestiti skuter za slabije pokretne osobe preko stepenica, uvijek zatražite pomoć dvije osobe - jedne sprijeda i jedne straga (slika 14). Rastavite skuter na manje dijelove (sjedalo, bateriju, okvir) radi lakšeg rukovanja. Prilikom podizanja potpuno ili djelomično sastavljenog skutera:

1. Osoba koja se nalazi straga treba lagano nagnuti skuter i čvrsto ga držati za stražnji okvir ili ručke.
2. Osoba sprijeda treba uhvatiti donji dio prednjeg okvira, nikada košaru ili upravljač.
3. Pažljivo podignite i prelazite jednu po jednu stepenicu. Ne spuštajte skuter dok osoba ispred vas ne dosegne sljedeću stepenicu.

Kada se spuštate niz stepenice slijedi iste korake samo obrnutim redoslijedom.

**UPOZORENJE**

Nikada ne pokušavajte penjati se ili spuštati skuterom niz stepenice kad ga vozite.

**UPOZORENJE**

Skuter za slabije pokretne osobe nije namijenjen za korištenje kao sjedalo u vozilima. Uvijek se prebacite na odgovarajuće sjedalo u automobilu i zasebno pričvrstite skuter.

**UPOZORENJE**

RJEŠAVANJE OSNOVNIH PROBLEMA

Ako svjetlo **pokazatelja baterije** na zaslonu počne **treperiti**, vaš skuter za slabije pokretne osobe otkrio je kvar sustava. Slijedite korake u nastavku kako biste identificirali i prijavili problem:

1. Otpustite ručicu gasa (poluga za gas), zatim ISKLJUČITE i ponovno UKLJUČITE skuter.
 - Ako se pogreška ispravi, nastavite s normalnom upotrebom.
 - Ako se pogreška ne ispravi, prijedite na 2. korak.
2. ISKLJUČITE skuter i potpuno napunite bateriju.
 - Nakon punjenja, ponovno UKLJUČITE skuter.
 - Ako se pogreška ne ispravi, prijedite na 3. korak.
3. Izbrojite koliko puta svjetlo treperi na simbolu baterije na zaslonu.
 - Svjetlo će treperiti nekoliko puta, a zatim će se prestati.
 - Izbrojite broj treperenja između pauza i prijavite ovu šifru svom prodavaču ili serviseru.

Tablica referentnih šifri za treperenje:

BATERIJE I PUNJENJE**Prije punjenja****UPOZORENJE**

Prije upotrebe pročitajte sve upute za bateriju i punjač. Koristite samo punjač koji je isporučen sa skuterom za slabije pokretne osobe. Ne pokušavajte puniti uređaj s automobilskim ili neodobrenim punjačem.

Mjerač stanja baterije na upravljačkoj konzoli prikazuje razinu napunjenosti pomoću skale u boji:

Zelena: Potpuno napunjeno

Žuta: Djelomično napunjeno (nastavite koristiti s oprezom)

Crvena: Niska razina napunjenosti - odmah napunite

Za najtočnije očitavanje, najtočnije očitavanje dobiva se tijekom vožnje punom brzinom po suhoj, ravnoj površini.

Prvo punjenje

Vaš skuter za slabije pokretne osobe SKUTA opremljen je dvjema baterijama od 12 V potpunog ciklusa (deep-cycle), zatvorene i bez održavanja.

Prije prve upotrebe, potpuno napunite baterije najmanje **8 do 14 sati** pomoću priloženog vanjskog punjača.

Punjenje skutera

Funkcija blokade tijekom punjenja onemogućuje kretanje skutera i prikaz mjerača tijekom punjenja. To je normalni postupak.

Baterije skutera možete napuniti na dva načina:

1. način

BATERIJE I PUNJENJE

Učestalost i navike punjenja

Svakodnevna upotreba: Punite skuter nakon svakodnevnog korištenja 8 - 14 sati. Za najbolju radnu učinkovitost, ostavite punjač priključen još oko 4 sata nakon što punjač pokaže da je baterija puna.

Povremena upotreba: Ako se koristi rjeđe od jednom tjedno, punite baterije jednom tjedno najmanje 24 sata.

Mjesečno održavanje:

Svjetla pokazatelja punjača

Crveno - punjenje u tijeku

Zeleno - punjenje dovršeno (95 %) - aktivno je produženo punjenje



UPOZORENJE

NE:

Koristite produžne kabele. Punite u vlažnim ili neprozračenim prostorima. Ne dopustite djeci da budu u blizini punjača bez nadzora. Punite skuter kada osoba sjedi na njemu. Otvarajte kućište punjača. Koristite oštećene kabele ili priključke. Ne izlažite punjače koji nisu otporni na vremenske uvjete, kiši ili snijegu.



OPREZ

Uvijek - ukopčajte punjač izravno u uzemljenu utičnicu s 3 kontakta. Koristite samo isporučeni punjač. Pustite neka se punjač ohladi prije pohrane, ako je vruć. Provjerite sve komponente punjača prije upotrebe. Kontaktirajte prodavača ako pronađete oštećenja.

	Prije upotrebe	Jednom tjedno	Jednom mjesečno	Jednom godišnje
Provjerite kočnice i testirajte kočenje na ravnoj površini	X			
Provjerite ima li oštećenja na kabelu gasa ili upravljača	X			
Provjerite ima li ravnih (istrošenih) mjesta na čvrstim gumama	X			
Provjerite postoje li oštećenja na naslonima za ruku ili jesu li labavi	X			
Provjerite ožičenje, konektore i izolaciju		X		
Provjerite ima li korozije na konektorima punjača i kontrolera		X		
Provjerite tlak u gumama (ako su pneumatske)		X		
Provjerite istrošenost kotača protiv prevrtanja i odgovarajući razmak			X	
Provjerite postoji li istrošenost guma i zamijenite ih po potrebi			X	

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Za čišćenje okvira, upravljača i ukrasnih elemenata koristite vlažnu krpu i blago, neabrazivno sredstvo za čišćenje. Izbjegavajte grebanje površina. Ne koristite agresivne kemikalije ili grubi pribor za čišćenje. Gume i branici mogu imati koristi od laganog nanošenja sredstva za održavanje gume ili vinila. Očistite kotače vlažnom četkom od sintetičkih vlakana (nikada ne koristite žičanu četku). Za dezinfekciju koristite isprobano, odobreno neagresivno sredstvo za dezinfekciju. Poprskajte ili obrišite prema uputama proizvođača proizvoda. Prije ponovne upotrebe skutera, pustite ne se sva elektronička područja (konzola, priključak za punjenje, stražnja elektronika) temeljito osuše.

Ako je potrebno, očistite proizvod odobrenim sredstvom za dezinfekciju. Prije nanošenja provjerite je li sredstvo za dezinfekciju sigurno za upotrebu na vašem proizvodu.

Skuter za slabije pokretne osobe treba čuvati na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu, zaštićenom od izravne sunčeve svjetlosti i ekstremnih temperatura. Ako ga skladištite dulje vrijeme (više od 3 mjeseca), slijedite ove preporuke:

- Potpuno napunite baterije prije skladištenja.
- Izvadite modul baterije iz skutera.
-

SKLADIŠTENJE

Uvjeti okruženja

Skuter čuvajte u sljedećim uvjetima:

- Raspon temperature -10°C do +50°C;
- Relativna vlažnost 30% do 70%;
- Atmosferski tlak od 86 kPa to 106 kPa.

PONOVNA UPORABA

Skuter za slabije pokretne osobe može se višekratno koristiti. Prije ponovne upotrebe potrebno je obaviti sljedeće radnje:

Potpuno čišćenje i dezinfekcija (vidi poglavlje „ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA”).

Tehnički pregled i sigurnosna provjera (vidi poglavlje „ODRŽAVANJE”). Ako je potrebno, zamijenite baterije i istrošene dijelove.

Skuter se treba prilagoditi potrebama novog korisnika sukladno korisničkom priručniku i servisnoj dokumentaciji.

ZBRINJAVANJE

Budite ekološki odgovorni prilikom zbrinjavanja skutera. Proizvod sadrži komponente koje se mogu reciklirati, poput metala, plastike, elektronike, baterija i pjenastih materijala. Pridržavajte se svih lokalnih i nacionalnih propisa o zbrinjavanju otpada. Za pravilno odlaganje skutera i njegovih dijelova obratite se ovlaštenom dobavljaču, lokalnom odlagalištu otpada ili komunalnoj službi za recikliranje.

TEHNIČKI PODACI

Model	SKUTA
Ukupna duljina (s košarom) (cm)	112
Ukupna širina (cm)	55 - 69
Ukupna visina (cm)	104
Ukupna težina (kg)	46
Dubina sjedišta (cm)	38
Visina sjedišta (cm)	52 - 56
Širina sjedišta (cm)	43.5
Visina naslona za leđa (cm)	37
Udaljenost od naslona za ruke do sjedala (cm)	20
Duljina naslona za ruke (cm)	26.5
Širina naslona za ruke (cm)	4.5
Promjer prednjeg/stražnjeg kotača (cm)	19 / 19
Minimalni polumjer okretanja (cm)	250
Maksimalno sigurno opterećenje (kg)	136
Maksimalna brzina kretanja naprijed (km/h)	8
Visina penjanja preko prepreke (cm)	4.5
Minimalna širina vrata (cm)	90

SZIMBÓLUMOK

Ebben a használati útmutatóban a , figyelmeztetéseket szimbólumok jelzik. A figyelmeztető szimbólumok felcímkézettek, amelyek a veszély mértékét vagy alapvető információkat jelölnek.

i Alapvető információkat, ajánlásokat és útmutatást nyújt a hatékony, problémamentes használathoz.



FIGYELMEZTETÉS / ÓVINTÉZKEDÉS – jelzi, hogy óvatosság szükséges az eszköz használatakor. Jelzi, hogy az aktuális helyzetben a felhasználó fokozott figyelme szükséges vagy valamilyen cselekvés szükséges nem várt következmény elkerüléséhez.



FIGYELEM! Ez a jelzés nagyon fontos biztonsági információkat tartalmaz. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**FIGYELMEZTETÉS**

Bármilyen helytelen, vagy nem megfelelő használat veszélyes helyzetet teremthet.

FIGYELMEZTETÉS

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye. Tartsa távol a fémtárgyakat az akkumulátor érintkezőitől. Elektromos áramütés veszélye áll fenn.



FIGYELMEZTETÉS

Ne engedje, hogy gyermekek a robogó közelében játszanak vagy azt működtessék.

FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély. Biztonsági eszközök, melyek rosszul vannak beállítva vagy nem működnek (fékek, akkumulátor) balesetet okozhatnak. Használat előtt mindig ellenőrizze a biztonsági berendezések megfelelő működését, és azokat rendszeresen ellenőriztesse hivatalos forgalmazóval.

FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély. Olvassa el, és kövesse a használati útmutatóban található utasításokat. A terméket vagy bármely opcionális tartozékot ne használja az útmutató alapos elolvasása és megértése nélkül. Amennyiben a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat nem érti, a berendezés használata előtt forduljon a forgalmazóhoz. Ellenkező esetben személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet. Soha ne használja mozgássegítő robogóját a jelen kézikönyvben meghatározott korlátokon túl.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**ÓVINTÉZKEDÉS**

A felületi hőmérséklet külső hőforrás hatására megnövekedhet.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon hosszabbítókábelt az akkumulátortöltőhöz.

FIGYELMEZTETÉS

A vezérlőegység, a motor, vagy a töltő nem hivatalos szerviz által végzett szétszerelése tilos, és a garancia elvesztésével jár.

FIGYELMEZTETÉS

Ne közlekedjen a járművel közutakon vagy autópályán.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a robogót alkohol, gyógyszerek vagy a vezetési képességeket befolyásoló anyagok hatása alatt.

FIGYELMEZTETÉS

Forgalmas területeken vagy bevásárlóközpontokban közlekedjen fokozott óvatossággal.

FIGYELMEZTETÉS

A mozgássegítő robogó semmilyen körülmények között nem használható ülésként gépjárműben.

FIGYELMEZTETÉS

A robogót kizárólag a vázszerkezetnél fogva emelje, más alkatrészénél (például ülésnél vagy burkolati elemeknél) ne.

FIGYELMEZTETÉS

Ne engedje, hogy felügyelet nélküli gyermekek a közelében tartózkodjanak a robogó közelében játszanak az akkumulátor töltése közben.

FIGYELMEZTETÉS

Vezetés közben tartsa távol a kezét a mozgó kerekektől. Ügyeljen arra, hogy a laza ruházat ne akadjon a hajtókerekbe.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem használható elektronikus biztonsági rendszerek – például fémdetektorok vagy elektromágneses lopásgátló rendszerek – közelében, mivel ezek befolyásolhatják a készülék működését.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék MRI-környezetben nem használható, továbbá nem alkalmazható egyes orvosi berendezések – például elektroauter, elektrosebészeti vagy diatermiás készülékek – közelében.

FIGYELMEZTETÉS

A mobilitási robogót semmilyen módon ne módosítsa; a módosítás a garancia megszűnését eredményezi.

FIGYELMEZTETÉS

Mozgó járműben ne üljön a mobilitási robogóban.

FIGYELMEZTETÉS

Emelkedőn és lejtőn mindig előre felé haladjon, soha ne hátrafelé. A hirtelen vagy előre-hátra irányuló mozgások növelhetik a felborulás kockázatát. A lejtés változása csökkentheti a stabilitást. Semmilyen körülmények között ne közlekedjen a robogó maximális stabilitási szögénél meredekebb lejtőn.

FIGYELMEZTETÉS

A robogó bekapcsolt állapotában ne használjon kézi rádióadó-vevő készülékeket (pl. CB-rádiót), és ne kapcsoljon be a személyes kommunikációs eszközöket, például mobiltelefont.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen a közelben működő adóberendezésekre, például rádió- vagy televízióállomásokra, és kerülje azok közvetlen

ÁLTALÁNOS

BEVEZETŐ

Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék kezelésével kapcsolatban. Az eszköz biztonságos használata érdekében figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és kövesse a biztonsági előírásokat. A robogó típusa és egyedi azonosító száma az ülés alatt, a vázra rögzített adattáblán található.

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a Kid-Man-ot választotta. Minden terméket ellenőrzünk a gyárban, és hibátlanul értékesítjük. Sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy a UAB Kasko Group | Kid-Man® terméke pozitívan befolyásolja majd mindennapjait.

GARANCIALEVÉL

A vásárlástól számított 24 hónapos garanciát biztosítunk termékeinkre. Bármilyen jogtalan módosítás, melyet a gyártó nem hagyott jóvá a garancia vagy a gyártó bármilyen egyéb kötelezettségének megszűnéséhez vezet. Beleértve a maximális terhelhetőség túllépését és a termék nem megfelelő használatát. Garancia csak a teljeskörűen kitöltött garancialevél függvényében igényelhető. Az UAB „Kasko Group” a vásárlótól megkapott reklamációs elemről 4 héten belül eldönti, hogy garanciális igényről van-e szó.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Gyártó nem vállal felelősséget meghibásodásért, melyet:

- a használati útmutató be nem tartása;
- nem megfelelő használat okozott;
- természetes elhasználódás és eltépedés eredményezett;
- a vásárló általi helytelen összeállítás vagy beállítás okozott, vagy egy harmadik személy technikai változtatása eredményezett;
- nem a Gyártó kiegészítőinek használata okozott;
- jogtalan módosítások és/vagy nem megfelelő kiegészítő eszköz használata miatt történt

NORMÁK ÉS ELŐÍRÁSOK

A robogó megfelel az alábbi követelményeknek:

- a) ISO 7176-4: Energiafogyasztásra és elméleti hatótávolságra vonatkozó követelmények szabványos vizsgálati feltételek mellett;
- b) ISO 7176-8: Statikus, ütési és kimerülési szilárdságra vonatkozó követelmények és vizsgálati módszerek;
- c) ISO 7176-9: Klimatikus vizsgálati követelmények;

HASZNÁLATI IDŐ

A mozgássegítő robogó motorjának várható élettartama általában körülbelül három év, ami azt jelenti, hogy normál használat és

INFORMÁCIÓ A TERMÉKRŐL

Termék: ELEKTROMOS ROBOGÓ

Modell: SKUTA

REFERENCIA SZÁM: 01-3580

KÍVÁNT CÉL ÉS JAVASLATOK

A készülék rendeltetése, hogy mobilitást biztosítson olyan személyek számára, akik ülő helyzetben közlekednek, és képesek a robogó kezelésére.

CÉLKÖZÖNSÉG

A robogó a személyszállítás megkönnyítésére készült. Egy személy használatára készült, legfeljebb 136 kg testsúlyig; utasok (beleértve gyermekek is) szállítása nem megengedett. Az elektromos robogó felnőttek számára készült, nem áruszállításra, és 16 év alatti személyek nem használhatják. Az elektromos mozgássegítő robogó olyan közlekedési eszköz, amely a mozgáskorlátozott személyek mobilitását segíti. A robogó nem alkalmas hemiplégiában vagy paraplégiában szenvedő személyek számára, és értelmi fogyatékkal élő személyek sem használhatják.


Az eszköz mobilitást hivatott biztosítani kizárólag egy jelenlévő segítő által ülő helyzetre korlátozott személyeknek.

ELLENJAVASLATOK

TERMÉK CÍMKE

A termékazonosító címke a terméken található (lásd ábra).

1. Product
2. Model
3. Size (seat width)
4. Maximum load
5. Manufacturer / contact details
6. Date of manufacture
7. UDI / SN code
8. CE mark
9. Consult instructions for use

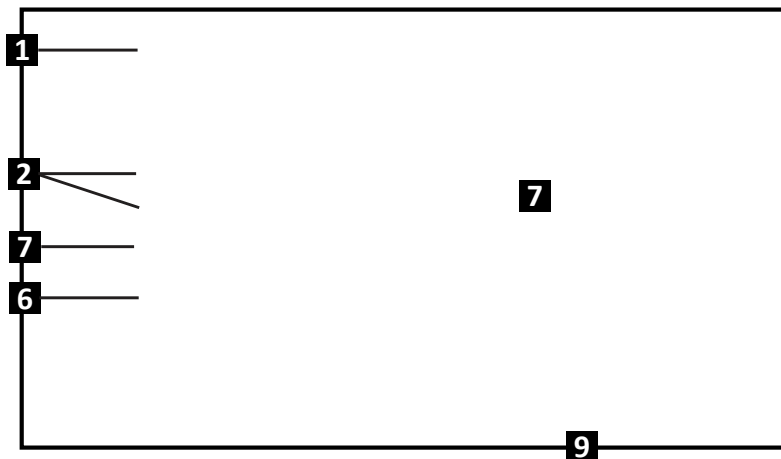

ÓVINTÉZKEDÉS

A robogó más felhasználó számára is átadható. Ehhez a robogót először alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni. Ezt követően a mozgássegítő robogó valamennyi alkatrészét hivatalos szervizpartnerrel ellenőriztetni kell általános állapot, kopás szempontjából, és szükség esetén javítani kell.

A CSOMAG TARTALMA

A SKUTA mozgássegítő robogó kartondobozos csomagolásban kerül kiszállításra, használatra kész állapotban. Kicsomagolás után kérjük, amennyiben lehetséges, őrizze meg a kartondobozt. A csomagolást őrizze meg későbbi tároláshoz vagy a robogó visszaküldéséhez.

A csomag átvételekor kérjük, ellenőrizze, hogy az nem sérült-e meg a szállítás közben.

- i** Amennyiben sérülés nyomát látja, kérjük jelezze a szállító cégnek azonnal.
- i** Kérjük ellenőrizze a csomag tartalmát, és amennyiben bármelyik az alábbi részek közül hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.

A csomag tartalma:

1. 1 × elektromos robogó
2. 1 × ülés kartámaszokkal
3. 1 × kosár
4. 1 × akkumulátoregység (beépítve vagy külön csomagolva)
5. 2 × oldalsó tükrök
6. 1 × ülés cső rögzítőcsappal
7. 2 × igazító szerszám (ha alkalmazható)
8. 2 × kulcs(ok)
9. 1 × töltő
10. Használati útmutató

RÉSZEK ÉS FUNKCIÓK


Áttekintés

Ez egy összecusukható vázzal és ergonomikus kormányoszlop-vezérléssel rendelkező mozgássegítő robogó.

1. Oldalsó tükrök
2. Kezelőpanel
3. Kosár
4. Kormányoszlop-állító gomb
5. Első kerék
6. Ülés kartámaszokkal
7. Akkumulátorcsomag
8. Lábtámasz
9. Fogantyú
10. Hátsó kerék / hajtókerék
11. Borulásgátló kerekek
12. Kulcs
13. Kormányoszlop
14. Szabadonfutó kar

i

A mozgássegítő robogó kialakítása a folyamatos termékfejlesztések miatt kis mértékben eltérhet a jelen kézikönyvben bemutatott modelltől.

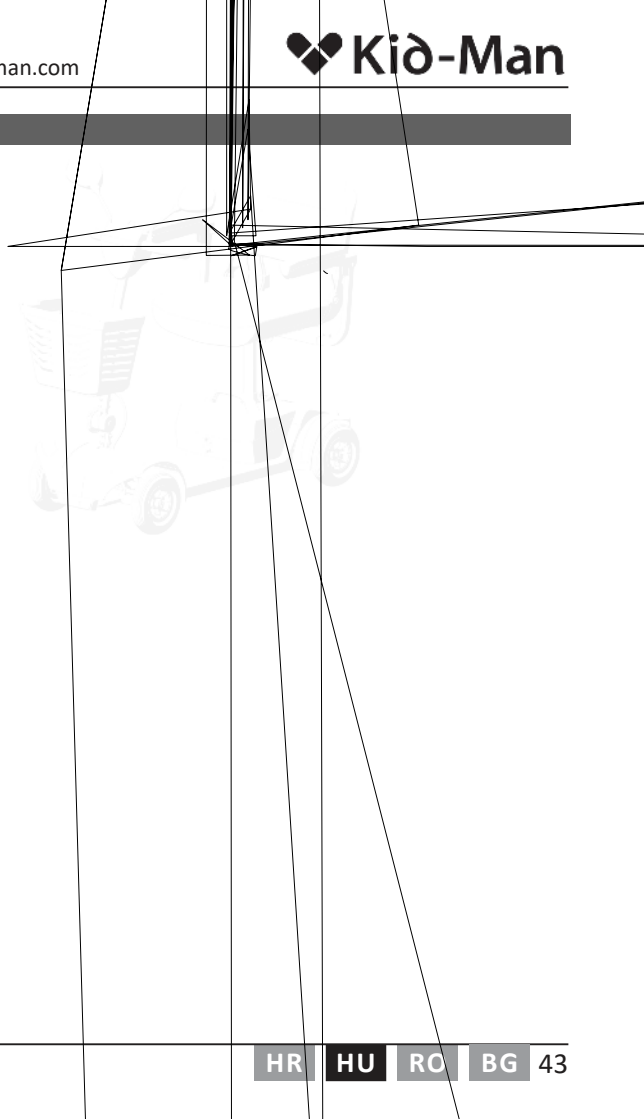

A ROBOGÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

A robogó **szétszerelése**:

A robogó öt fő egységre szerelhető szét:

1. Ülészék
2. Hátsó váz
3. Akkumulátoregység
4. Első váz
5. Kosár



FIGYELMEZTETÉS

Ne emeljen a fizikai teherbírását meghaladó terhet. Szükség esetén kérjen segítséget.

A ROBOGÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

A SKUTA mozgássegítő robogó **összeszerelése**:

1. Helyezze a felső ülésrögzítőt az alsó ülésrögzítőbe (1. ábra).
2. Állítsa be a kívánt magasságot, majd igazítsa egymáshoz a rögzítő furatokat.
3. A rögzítéshez teljesen helyezze be a rögzítőcsapot (2. ábra).
4. Szerelje be az akkumulátorcsomagot úgy, hogy azt a helyére illeszti (3. ábra).
5. Helyezze fel az ülést az ülésrögzítőre. Forgassa az ülést addig, amíg kattánással a helyére nem rögzül (4. ábra).
6. Emelje fel az ülés háttámláját teljesen függőleges helyzetbe.
7. Emelje fel a kormányoszlopot, majd az állítógombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse (5. ábra).
8. Helyezze a kosarat a kormányoszlopon található kosártartóba (6. ábra).



FIGYELMEZTETÉS

Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy ujjai vagy ruházata ne szoruljon be. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a kormányoszlop stabilan rögzített-e, finoman tolva és húzva azt. Szükség esetén húzza meg ismét az állítógombot.



FIGYELMEZTETÉS

Ne emelje a robogót az ülésnél, akkumulátornál, kosárnál vagy kormányoszlopnál fogva. Először távolítsa el az összes alkatrészt (lásd a kézikönyvet), majd a fő váznál fogva emelje meg. Súly: kb. 8-10 kg (a súly modellenként eltérő).

MŰKÖDÉS

Használat előtt

A robogó használata előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve és megfelelően van rögzítve. Az ülésnek biztonságosan rögzített helyzetben kell lennie, és a kormányoszlopot kényelmes pozícióba kell állítani. Helyezze be a kulcsot a kapcsolóba a robogó bekapcsolásához. Az akkumulátor kijelző világítani kezd, és megjeleníti az aktuális töltöttségi szintet. Állítsa be a maximális haladási sebességet a műszerfalon található szabályzóval – a teknős ikon a legalacsonyabb, a nyúl ikon a legnagyobb sebességet jelöli (8. ábra).

MŰKÖDÉS

Fel- és leszállás

Álljon a robogó mellé, majd az ülésforgató kar segítségével fordítsa az ülést maga felé (10. ábra). Óvatosan üljön le, majd forgassa vissza az ülést előre, amíg az a helyére rögzül. Vezetés előtt mindig ellenőrizze, hogy az ülés rögzített helyzetben van-e.

Fel- vagy leszállás előtt vegye ki a kulcsot a kapcsolóból a véletlen elindulás megelőzése érdekében. Győződjön meg arról, hogy lábai biztonságosan a lábtartón helyezkednek el, és a robogó stabil, vízszintes felületen áll.

A biztonságos leszálláshoz először állítsa meg teljesen a robogót. Felállás előtt mindig vegye ki a kulcsot a kulcsos kapcsolóból – ezzel megelőzhető a véletlen elmozdulás.

Az ülésforgató kar segítségével fordítsa oldalra az ülést, és győződjön meg annak rögzüléséről. Ezután lassan álljon fel, és lépjen le a robogóról. Felálláskor használja a kartámaszokat (11. ábra). Az ülést oldalra fordított helyzetben is hagyhatja a következő leülés megkönnyítéséhez.



FIGYELMEZTETÉS

Fel- és leszállás előtt mindig vegye ki a kulcsot a véletlen elmozdulás elkerülése érdekében.

Tükrök beállítása (ha rendelkezésre állnak)

MŰKÖDÉS

Fékrendszer

A robogó elektromágneses fékrendszerrel van felszerelve. A fékek automatikusan működésbe lépnek, amikor elengedi a menetkart. A fékrendszer csak akkor működik, ha a szabadonfutó kar „vezetési” (zárt) állásban van. Toló üzemmódban a fékek ki vannak oldva. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a robogó menetüzem módban van.

Lásd a 8. ábrát.

Menetvezérlő kar

A menetkar szabályozza a robogó előre- és hátramenetét.

- Helyezze jobb kezét a jobb oldali markolatra, bal kezét pedig a bal oldali markolatra.
- Előrehaladáshoz jobb hüvelykujjával finoman nyomja meg a menetkar jobb oldalát.
- Hátramenethez bal hüvelykujjával nyomja meg a menetkar bal oldalát.
- Megálláshoz engedje el a kart. A kar automatikusan visszatér középhelyzetbe („stop” állás), majd az elektromágneses fékek működésbe lépnek.

Kulcsos kapcsoló

- Helyezze be a kulcsot a kapcsolóba, majd fordítsa ON (Be) állásba a robogó bekapcsolásához.
- A robogó kikapcsolásához fordítsa a kulcsot OFF (Ki) állásba, majd vegye ki azt.

Bár a kulcs kikapcsolt állapotban a kapcsolóban maradhat, használaton kívül javasolt eltávolítani az illetéktelen használat megelőzése érdekében.

MŰKÖDÉS

Lépcsők

Amennyiben a mozgássegítő robogót lépcsőn kell mozgatni, mindig kérjen segítséget két személytől – egy elöl, egy hátul (14. ábra). A könnyebb kezelhetőség érdekében szerelje szét a robogót kisebb egységekre (ülés, akkumulátoregység, vázrészek). A teljesen vagy részben összeszerelt robogó emelésekor:

1. A hátul álló személy enyhén billentse meg a robogót, és stabilan fogja meg a hátsó vázat vagy a fogantyúkat.
2. Az elöl álló személy az első váz alsó részét fogja meg, soha ne emelje a kosárnál vagy a kormányoszlopnál.
3. Óvatosan emeljék meg, és lépcsőfokként haladjanak. Ne engedjék le a robogót addig, amíg az elöl álló személy a következő lépcsőfokra nem lép.

Lefelé haladáskor ugyanezeket a lépéseket fordított sorrendben végezzék el.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne próbáljon a robogón ülve lépcsőn fel- vagy lefelé közlekedni.



FIGYELMEZTETÉS

A mozgássegítő robogó nem használható ülésenként járműben. Mindig üljön át megfelelő autóülésbe, és a robogót külön rögzítse.



ALAPVETŐ HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a kijelzőn az **akkumulátor visszajelző villogni** kezd, a mozgássegítő robogó rendszerhibát észlelt. A hiba azonosításához és jelentéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Engedje el a menetkart (menetkar), majd kapcsolja ki és be a robogót.
 - Ha a hiba megszűnik, folytassa a normál használatot.
 - Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a 2. lépéssel.
2. Kapcsolja ki a robogót, majd töltsé fel teljesen az akkumulátort.
 - Töltés után kapcsolja vissza a robogót.
 - Ha a hiba továbbra is megjelenik, folytassa a 3. lépéssel.
3. Számolja meg, hányszor villog az akkumulátor szimbólum.
 - A jelzőfény meghatározott számú villanás után szünetet tart.
 - Számolja meg a szünetek közötti villanásokat, majd közölje ezt a hibakódot a forgalmazóval vagy a szerviztechnikussal.

Villogási kódok táblázata:

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTÉS

Töltés előtt



FIGYELMEZTETÉS

Használat előtt olvassa el az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó összes utasítást. Kizárólag a mozgássegítő robogóhoz mellékelt töltőt használja. Ne próbálja autós vagy nem engedélyezett töltővel tölteni az akkumulátort.

A kormányoszlop kezelőpaneljén található akkumulátorjelző színekódolt skálán mutatja a töltöttségi szintet:

Zöld: Teljesen feltöltve

Sárga: Közepes töltöttség (körültekintő használat javasolt)

Piros: Alacsony töltöttség – azonnali töltés szükséges

A legpontosabb érték leolvasása érdekében a töltöttségi szintet száraz, sík felületen, maximális sebességgel haladva ellenőrizze.

Első töltés

Az Ön SKUTA mozgássegítő robogója két darab 12 V-os, mélykisütésű, zárt, karbantartásmentes akkumulátorral van felszerelve. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátorokat legalább **8 - 14 órán** keresztül a mellékelt külső töltővel.

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTÉS

Töltési gyakoriság és ajánlások

Napi használat: Minden használati nap után töltsse a robogót 8-14 órán keresztül. Az optimális teljesítmény érdekében a teljes

Töltő visszajelző lámpák

Piros – Töltés folyamatban

Zöld – Töltés befejezve (95%) – folyamatos kisáramú töltés aktív



FIGYELMEZTETÉS

TILOS:

Hosszabbítókábelt használni. Nedves vagy nem szellőző helyen tölteni. Felügyelet nélkül gyermekeket a töltő közelébe engedni. A robogót használat közben tölteni. A töltő burkolatát kinyitni. Sérült kábeleket vagy csatlakozókat használni. A nem időjárásálló töltőt esőnek vagy hónak kitenni.



ÓVINTÉZKEDÉS

Mindig közvetlenül földelt, hárompólusú hálózati aljzathoz csatlakoztassa a töltőt. Kizárólag a mellékelt töltőt használja. Ha a töltő felmelegedett, tárolás előtt hagyja lehűlni. Használat előtt ellenőrizze a töltő valamennyi alkatrészét. Sérülés észlelése esetén forduljon a forgalmazóhoz.

	Használat előtt	Egyszer egy héten	Egyszer egy hónapban	Egyszer egy évben
Ellenőrizze a fékeket, és sík felületen végezzen fékpróbát.	X			
Ellenőrizze a menetkart és a kormányoszlop kábelét sérülések szempontjából	X			
Vizsgálja meg a tömör gumiabroncsokat lapos kopási felületek szempontjából	X			
Ellenőrizze a kartámaszok rögzítését és állapotát	X			
Ellenőrizze a látható kábeleket és csatlakozókat		X		
Vizsgálja meg a töltő csatlakozóit korrózió szempontjából		X		
Ellenőrizze a keréknyomását (pneumatikus abroncsok esetén)		X		

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

A váz, a kormányoszlop és a burkolati elemek tisztításához nedves ruhát és enyhe, kímélő tisztítószeret használjon. Kerülje a felületek megkarcolását. Ne használjon erős vegyszereket vagy durva tisztítóeszközöket. A gumiabroncsok és ütközőelemek állapotát javíthatja enyhe gumi- vagy vinilápoló szer alkalmazásával.

A kerekeket nedves, szintetikus szálú kefével tisztítsa (fémkefe használata tilos). Fertőtlenítéshez bevizsgált, engedélyezett, nem agresszív fertőtlenítőszeret használjon. A termék gyártójának utasításai szerint permetezze vagy törölje át a felületet. A robogó újbóli használata előtt hagyja az összes elektronikus egységet (kezelőpanel, töltőcsatlakozó, hátsó elektronika) teljesen megszáradni.

Szükség esetén a terméket engedélyezett fertőtlenítőszerrel tisztítsa. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fertőtlenítőszer biztonságosan alkalmazható a terméken.

A mozgássegítő robogót száraz, tiszta, jól szellőző helyen kell tárolni, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérséklettől védve. Hosszabb idejű (3 hónapot meghaladó) tárolás esetén kövesse az alábbi ajánlásokat:

-

TÁROLÁS

Környezeti kondíciók

A robotot az alábbi feltételek mellett tartsa:

-

ÚJRA-HASZNÁLAT

A mozgássegítő robotot ismételt használatra alkalmas. Újbóli használat előtt az alábbi műveleteket kell elvégezni:

Teljes tisztítás és fertőtlenítés (lásd „TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS” fejezet).

Műszaki ellenőrzés és biztonsági felülvizsgálat (lásd „KARBANTARTÁS” fejezet). Szükség esetén cserélje ki az akkumulátorokat és az elhasználódott alkatrészeket. A robotot az új felhasználó igényeihez kell beállítani a használati útmutató és a szervizdokumentáció szerint.

ELTÁVOLÍTÁS

A robotot ártalmatlanítása során járjon el környezettudatos módon. A termék újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaz, például fémeket, műanyagot, elektronikai elemeket, akkumulátorokat és habanyagokat. Tartsa be a helyi és országos hulladékkezelési előírásokat. A robotot és alkatrészeit megfelelő ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot hivatalos forgalmazójával, a helyi hulladékkezelő létesítménnyel vagy az önkormányzati újrahasznosítási szolgáltatóval.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell	SKUTA
Teljes hosszúság (kosárral) (cm)	112
Teljes szélesség (cm)	55 - 69
Teljes magasság (cm)	104
Teljes tömeg (kg)	46
Ülésmélység (cm)	38
Ülésmagasság (cm)	52 - 56
Ülésszélesség (cm)	43.5
Háttámla magasság (cm)	37
Kartámasz és ülés közötti távolság (cm)	20
Karfa hossza (cm)	26.5
Karfa szélessége (cm)	4.5
Első/hátsó kerék átmérője (cm)	19 / 19
Minimális fordulási sugár (cm)	250
Maximális biztonsági terhelés (kg)	136
Maximális előremeneti sebesség (km/h)	8
Akadályleküzdési magasság (cm)	4.5
Szükséges minimális ajtószélesség (cm)	

RO**SIMBOLURI**

În aceste instrucțiuni de utilizare, avertismentele sunt indicate prin simboluri. Simbolurile de avertizare sunt însoțite de un titlu care indică gravitatea pericolului sau informații de bază.

i Oferă informații de bază, recomandări și îndrumări pentru o utilizare eficientă și fără probleme.



AVERTISMENT / ATENȚIE - pentru a indica faptul că este necesară prudență atunci când utilizați dispozitivul. Pentru a indica faptul că situația actuală necesită conștientizarea sau acțiunea operatorului pentru a evita consecințele nedorite.



ATENȚIE! Acest semn este utilizat pentru părți foarte importante privind siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA**AVERTISMENT**

Orice altă utilizare sau o utilizare incorectă ar putea duce la o situație periculoasă.

AVERTISMENT

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

 **AVERTISMENT**
Risc de șoc. Țineți obiectele metalice departe de bornele bateriei. Se poate produce un șoc electric.

 **AVERTISMENT**
Nu permiteți copiilor să se joace în apropierea sau să utilizeze scuterul.

 **AVERTISMENT**
Risc de accidente. Sistemele de siguranță sau componentele (de exemplu frânele sau bateria) care sunt reglate incorect sau nu funcționează pot provoca accidente. Verificați întotdeauna dacă dispozitivele de siguranță funcționează înainte de a utiliza scuterul și verificați-le periodic la un dealer autorizat.

 **AVERTISMENT**
Risc de accidente. Citiți și respectați informațiile din manualul de utilizare. Nu utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil fără să citiți și să înțelegeți în detaliu aceste instrucțiuni. Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați dealerul înainte de a încerca să utilizați acest echipament. În caz contrar, pot apărea leziuni sau deteriorări. Nu utilizați niciodată scuterul de mobilitate dincolo de limitele sale, așa cum sunt descrise în acest manual.

 **AVERTISMENT**



INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA**ATENȚIE**

Temperaturile de suprafață pot crește atunci când sunt expuse la surse externe de căldură.

AVERTISMENT

Nu conectați un cablu prelungitor la încărcătorul de baterii.

AVERTISMENT

Dezasamblarea controlerului, motorului sau încărcătorului de către oricine altcineva decât un agent de service autorizat este interzisă și anulează orice garanție aplicabilă.

**AVERTISMENT**

Nu luați scuterul de mobilitate pe drumuri sau autostrăzi.

**AVERTISMENT**

Nu utilizați scuterul de mobilitate dacă sunteți sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe care vă pot influența abilitățile de conducere.

**AVERTISMENT**

Fiți prudent atunci când vă conduceți scuterul de mobilitate în zone aglomerate sau în centre comerciale.

AVERTISMENT

Scuterul de mobilitate nu trebuie utilizat sub nicio formă ca scaun într-un autovehicul.

AVERTISMENT

Nu încercați să ridicați scuterul dvs. de mobilitate prin alte părți decât cadrul (de exemplu, scaunul sau protecțiile caroseriei)

AVERTISMENT

Nu permiteți copiilor nesupravegheați să se joace în apropierea scuterului în timp ce bateriile sunt încărcate.

AVERTISMENT

Țineți mâinile departe de roți în timpul utilizării. Țineți cont de faptul că hainele largi pot fi prinse în anvelopele de tracțiune.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT

Dispozitivul nu trebuie utilizat în apropierea sistemelor electronice de securitate, cum ar fi detectoarele de metale sau sistemele electromagnetice antifurt, și că performanța dispozitivului poate fi degradată în imediata apropiere a unor astfel de sisteme.

AVERTISMENT

Dispozitivul nu este sigur pentru reutilizarea în medii RMN și nu trebuie utilizat în apropierea altor echipamente medicale avansate, cum ar fi electrocauterul, unitățile electrochirurgicale și echipamentele de diatermie.

AVERTISMENT

Nu modificați scuterul dvs. de mobilitate în niciun fel; acest lucru va anula garanția.

AVERTISMENT

Nu utilizați scuterul de mobilitate ca scaun într-un vehicul aflat în mișcare.

AVERTISMENT

Conduceți scuterul de mobilitate drept în sus sau în jos pe o pantă, niciodată cu spatele. Mișcările neregulate sau modelele înainte și înapoi pot crește șansele de răsturnare. Modificările înclinațiilor pot reduce stabilitatea. În niciun caz, nu călătoriți pe o pantă mai mare decât unghiul maxim de stabilitate pentru acest scuter de mobilitate.

AVERTISMENT

Nu folosiți transmițătoare portabile, cum ar fi radiourile CB (bandă cetățenească), și nu porniți dispozitive personale de comunicare, cum ar fi telefoanele celulare, în timp ce scuterul este pornit.

AVERTISMENT

Fiți atenți la emițătoarele din apropiere, cum ar fi stațiile de radio sau de televiziune, și păstrați distanța față de acestea.

GENERAL

INTRODUCERE

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații importante despre manipularea produsului. Pentru a asigura siguranța la utilizarea produsului, citiți cu atenție instrucțiunea de utilizare și urmați instrucțiunile de siguranță. Puteți identifica modelul scuterului dvs. și numărul său unic de identificare pe eticheta fixată pe cadrul șasiului, sub scaun.

PREFAȚĂ

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor Kid-Man®. Fiecare produs este verificat în fabrică și ne-a părăsit în stare impecabilă.

Vă dorim mult succes și sperăm că produsul UAB Kasko Group | Kid-Man® va avea un impact pozitiv asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi.

GARANȚIE

Oferim o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Orice modificări neautorizate efectuate fără aprobarea producătorului vor atrage nulitatea răspunderii. Aceasta include depășirea sarcinii maxime admise și utilizarea necorespunzătoare a produsului. Garanția este valabilă numai cu cardul de garanție complet completat. UAB Kasko Group, după ce primește produsul revendicat de la cumpărător

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele care rezultă din:

- Nerespectarea Instrucțiunilor de utilizare;
- Utilizarea incorectă;
- Uzura naturală;
- Asamblarea sau configurarea incorectă de către cumpărător sau modificări tehnice de către terți;
- Utilizarea de accesorii terțe neaprobate în loc de accesorii aprobate de producător;
- Modificări neautorizate și/sau utilizarea unei piese de schimb necorespunzătoare.

STANDARDE ȘI REGLEMENTĂRI

Scuterul este conform cu cerințele:

- a) ISO 7176-4: Cerințe privind consumul de energie și autonomia teoretică în condiții de testare standard;
- b) ISO 7176-8: Cerințe și metode de încercare pentru rezistența statică, la impact și la oboseală;
- c) ISO 7176-9: Cerințe de testare climatică;

DURATA DE VIAȚA

Durata de viață preconizată a motorului unui scuter de mobilitate este de obicei de aproximativ trei ani, ceea ce înseamnă că, în condiții de utilizare normală și întreținere regulată, motorul ar trebui să funcționeze timp de aproximativ trei ani. Nu aruncați scuterul la gunoierul menajer (consultați capitolul „ELIMINARE”).

INFORMAȚII DESPRE PRODUS**Produs:** SCUTER DE MOBILITATE**Model:** SKUTA**REF:** 01-3580**UTILIZAREA PREVĂZUTĂ ȘI INDICAȚIILE**

Dispozitivul este destinat să ofere mobilitate persoanelor care stau în poziție șezând și pot utiliza un scuter.

UTILIZATORII VIZAȚI

Scuterul este proiectat pentru deplasarea ușoară a persoanelor. Este proiectat pentru utilizarea de către o persoană cu greutatea maximă de 136 kg, fără pasageri (inclusiv copii). Scuterul electric este proiectat pentru adulți, nu pentru bunuri și nu pentru persoane sub 16 ani. Scuterul electric de mobilitate este un tip de dispozitiv de transport, care compensează persoanele cu dificultăți de mobilitate. Acest scuter nu este potrivit pentru persoanele cu hemiplegie sau paraplegie și acest scuter nu este destinat persoanelor cu dizabilități intelectuale

AVERTISMENT

Dispozitivul este recomandat pentru persoanele cu mobilitate limitată la poziția șezut, care pot fi utilizate doar în prezența unui însoțitor.


CONTRAINDICAȚII

Nu există contraindicații cunoscute, atunci când utilizați scuterul conform destinației.

ETICHETA PRODUSULUI

Eticheta de identificare este atașată la produsul (a se vedea imaginea).

1. Product
2. Model
3. Size (seat width)
4. Maximum load
5. Manufacturer / contact details
6. Date of manufacture
7. UDI / SN code
8. CE mark
9. Consult instructions for use

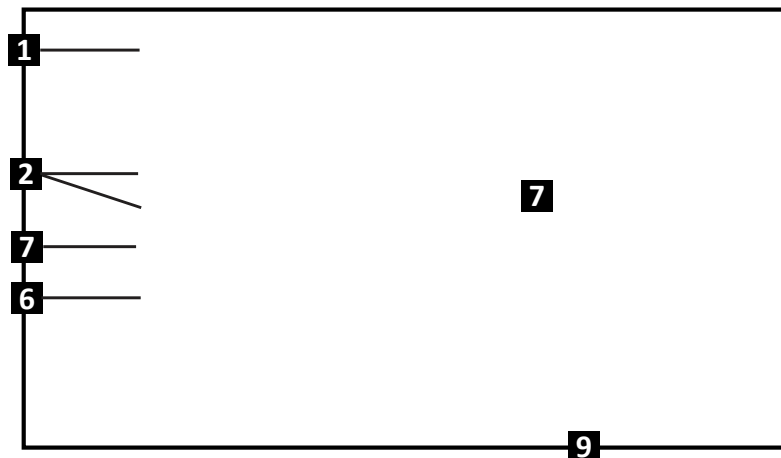

ATENȚIE

Scuterul este adecvat pentru utilizarea de către alte persoane. Pentru a face acest lucru, scuterul trebuie mai întâi curățat temeinic și dezinfectat. Apoi, toate componentele scuterului de mobilitate trebuie verificate de un dealer de service autorizat pentru starea generală, uzură și, dacă este necesar, trebuie reparate.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Scuterul de mobilitate SKUTA este livrat în ambalaj din carton și este gata de utilizare. După despachetare, vă rugăm să păstrați ambalajul de carton, dacă este posibil. Este posibil să aveți nevoie de acesta mai târziu pentru depozitare sau pentru returnarea scuterului.

După primirea coletului, vă rugăm să verificați dacă acesta nu este deteriorat în timpul transportului.

- i** Dacă observați semne de deteriorare, vă rugăm să anunțați compania de transport în același timp.
- i** Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și, în cazul în care lipsește oricare dintre piesele de mai jos, luați legătura cu distribuitorul local.

Conținutul pachetului:

1. 1 x Scuter de mobilitate
2. 1 x Scaun cu cotiere
3. 1 x Coș
4. 1 x Pachet de baterii (instalat sau separat)
5. 2 x Oglinzi laterale
6. 1 x Tijă de scaun cu pin de blocare
7. 2 x Instrument de reglare (dacă este cazul)
8. 2 x Cheie(i)
9. 1 x Încărcător
10. Instrucțiuni de utilizare


COMPONENTE ȘI FUNCȚII

Prezentare generală

Acesta este un scuter de mobilitate cu un cadru pliabil și un sistem de direcție ergonomic.

1. Oglinzi laterale
2. Panou de control
3. Coș
4. Buton de reglare a ghidonului
5. Roata din față
6. Scaun cu suporturi pentru brațe
7. Pachet de baterii
8. Platformă pentru picioare
9. Mâner de prindere
10. Roată spate / roată motoare
11. Roți anti-înclinare
12. Cheie
13. Ghidon
14. Manetă pentru modul de rulare liberă

i Configurația scuterului dumneavoastră de mobilitate poate varia ușor de scuterul prezentat în acest manual din cauza îmbunătățirilor continue ale produsului.

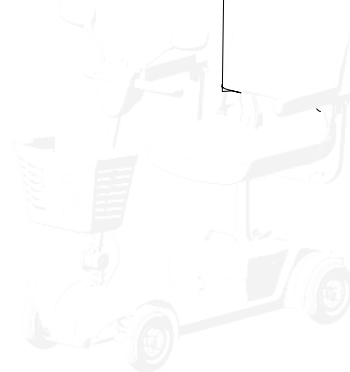

CONFIGURAREA SCUTERULUI**Pentru a dezasambla** scuterul:

Scuterul dvs. de mobilitate poate fi împărțit în cinci părți principale:

1. Scaun
2. Cadru spate
3. Pachet de baterii
4. Cadru frontal
5. Coș

**AVERTISMENT**

Nu ridicați mai mult decât puteți suporta. Cereți ajutor dacă este necesar.

CONFIGURAREA SCUTERULUI**Pentru a asambla** scuterul de mobilitate SKUTA:

1. Introduceți tija superioară a scaunului în tija inferioară a scaunului (imaginea 1).
2. Reglați la înălțimea dorită și aliniați orificiile de reglare.
3. Introduceți complet știftul de fixare pentru a fixa coloana (Imaginea 2).
4. Instalați pachetul de baterii plasându-l în jos în poziție (imaginea 3).
5. Atașați scaunul coborându-l pe stâlp. Rotiți scaunul până când se aude un clic și se blochează în poziție (Imaginea 4).
6. Ridicați scaunul înapoi până când este complet extins.
7. Ridicați ghidonul și fixați-l strângând butonul de reglare în sensul acelor de ceasornic (Imaginea 5).
8. Introduceți coșul în suportul coșului de pe ghidon (Poza 6).

Pentru a plia scuterul de mobilitate SKUTA:

1. Opriți scuterul și scoateți cheia.
2. aun

**AVERTISMENT**

Aveți grijă să nu prindeți degetele sau hainele în timpul asamblării.

Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă ghidonul este bine blocat, împingându-l/ trăgându-l ușor. Strângeți din nou butonul dacă este necesar.

**AVERTISMENT**

Nu ridicați de scaun, baterie, coș sau ghidon.

Îndepărtați mai întâi toate piesele (consultați manualul), apoi ridicați cadrul principal. Greutatea: ~8 - 10 kg (variază în funcție de model).

FUNCȚIONARE**Înainte de utilizare**

Înainte de a utiliza scuterul de călătorie, asigurați-vă că bateria este complet încărcată și bine instalată. Scaunul trebuie să fie bine fixat în poziție, iar ghidonul trebuie reglat la o poziție confortabilă. Introduceți cheia în comutator pentru a porni scuterul. Contorul bateriei se va aprinde și va afișa nivelul curent de încărcare.

Setați viteza maximă de rulare cu ajutorul cadranelor de pe planșa de bord - pictograma țestoasă indică cea mai lentă setare, în timp ce iepurele indică cea mai rapidă (imaginea 8).

Conducere

Pentru a merge înainte, apăsați ușor cu degetul mare pe partea dreaptă a manetei de accelerație. Pentru inversare, apăsați pe partea

FUNȚIONARE**Urcarea și coborârea**

Stați lângă scuter și rotiți scaunul spre dvs. folosind maneta de rotire a scaunului (imaginea 10). Așezați-vă cu atenție și rotiți scaunul înainte până când se blochează în poziție. Asigurați-vă întotdeauna că scaunul este blocat înainte de a conduce.

Înainte de a urca sau a coborî, scoateți cheia din comutator pentru a preveni mișcarea accidentală. Asigurați-vă că picioarele sunt așezate în siguranță pe platforma pentru picioare și că scuterul se află pe un teren stabil și plat.

Pentru a coborî în siguranță, aduceți mai întâi scuterul la o oprire completă. Scoateți întotdeauna cheia din contact înainte de a vă ridica în picioare - acest lucru previne orice mișcare accidentală.

Întoarceți scaunul într-o parte folosind maneta de rotire a scaunului, asigurându-vă că se blochează în această poziție. Apoi ridicați-vă încet și coborâți de pe scuter. Folosiți cotierele pentru a vă ridica (imaginea 11). Puteți lăsa scaunul întors lateral pentru a facilita așezarea data viitoare.

**AVERTISMENT**

Scoateți întotdeauna cheia înainte de a vă urca sau coborî pentru a preveni mișcarea accidentală.

Reglarea oglinzilor retrovizoare (dacă sunt echipate)

e)

FUNCȚIONARE

Sistem de frânare

Scuterul este echipat cu frâne electromagnetice. Aceste frâne se activează automat atunci când nu mai apăsați accelerația. Sistemul de frânare funcționează numai atunci când maneta roții libere este în modul de rulare. Dacă maneta este în modul de împingere, frânele sunt dezactivate. Asigurați-vă întotdeauna că scuterul este în modul de rulare înainte de utilizare.

Consultați imaginea 8

Maneta de control a accelerației

Maneta accelerației controlează mișcarea înainte și înapoi a scuterului.

- Puneți mâna dreaptă pe mânerul drept și mâna stângă pe mânerul stâng.
- Pentru a merge înainte, apăsați ușor partea dreaptă a manetei de accelerație cu degetul mare al mâinii drepte.
- Pentru a deplasa în marșarier, apăsați partea stângă a manetei de accelerație cu degetul mare al mâinii stângi.
- Pentru a opri, eliberați maneta. Acesta va reveni automat la poziția centrală „stop”, iar frânele electromagnetice se vor activa.

Comutator cu cheie

- Introduceți cheia în comutatorul cu cheie și rotiți-o în poziția ON pentru a porni scuterul.
- Pentru a opri scuterul, rotiți cheia în poziția OFF și scoateți-o.

Chiar dacă cheia poate rămâne în comutator atunci când acesta este oprit, este recomandat să scoateți cheia atunci când nu este utilizată pentru a preveni funcționarea neautorizată.

FUNCȚIONARE**Scări**

Dacă trebuie să mutați scuterul de mobilitate pe scări, solicitați întotdeauna ajutorul a două persoane - una în față și una în spate (imaginea 14). Dezasamblați scuterul în părți mai mici (scaun, set de baterii, cadre) pentru o manipulare mai ușoară. Atunci când ridicați scuterul complet sau parțial asamblat:

1. Persoana din spate trebuie să încline ușor scuterul și să țină ferm cadrul sau mânerul din spate.
2. Persoana din față trebuie să apuce partea inferioară a cadrului din față, niciodată coșul sau bara.
3. Ridicați și urcați cu atenție câte o treaptă pe rând. Nu coborâți scuterul până când persoana din față nu ajunge la următoarea treaptă.

Coborârea pe scări urmează aceiași pași în sens invers.

**AVERTISMENT**

Nu încercați niciodată să urcați sau să coborâți scările scuterului în timp ce îl conduceți.

**AVERTISMENT**

Scuterul de mobilitate nu este destinat a fi utilizat ca scaun în vehicule. Transferați întotdeauna pe un scaun auto adecvat și fixați scuterul separat.

**AVERTISMENT**

BATERIILE ȘI ÎNCĂRCAREA

Înainte de încărcare



AVERTISMENT

Citiți toate instrucțiunile privind bateria și încărcătorul înainte de utilizare. Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu scuterul dvs. de mobilitate. Nu încercați să încărcați utilizând un încărcător auto sau neaprobat.

Instrumentul de măsurare a stării bateriei de pe consola ghidonului indică nivelul de încărcare a bateriei utilizând o scală cu coduri de culori:

Verde: Complet încărcat

Galben: Încărcare moderată (continuați utilizarea cu prudență)

Roșu: Încărcare scăzută - Reîncărcați imediat

Pentru o citire cât mai precisă, verificați contorul bateriei în timp ce conduceți pe o suprafață uscată, plană, la viteză maximă.

Prima încărcare

Scuterul dvs. de mobilitate SKUTA este echipat cu două baterii de 12 V cu ciclu adânc, sigilate, fără întreținere.

Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateriile timp de cel puțin **8 până la 14 ore** utilizând încărcătorul extern furnizat.

Încărcarea scuterului

BATERIILE ȘI ÎNCĂRCAREA

Frecvența și obiceiurile de încărcare

Utilizare zilnică: Încărcați scuterul după fiecare zi de utilizare timp de 8 - 14 ore. Pentru cele mai bune performanțe, lăsați-l pornit încă 4 ore după ce încărcătorul indică plin.

Utilizare ocazională:

Indicatoare luminoase ale încărcătorului

Roșu - Încărcare în curs

Verde - Încărcare completă (95%) - Încărcare de întreținere activă



AVERTISMENT

NU:

Utilizați cabluri prelungitoare. Nu încărcați în zone umede sau neventilate. Nu permiteți copiilor nesupravegheați să se apropie de încărcător. Nu încărcați scuterul în timp ce este utilizat. Nu deschideți carcasa încărcătorului. Utilizați cabluri sau conectori deteriorați. Nu expuneți încărcătoarele care nu sunt rezistente la intemperii la ploaie sau zăpadă.



ATENȚIE

Întotdeauna - conectați încărcătorul direct la o priză împământată, cu 3 pini. Utilizați numai încărcătorul furnizat. Lăsați încărcătorul să se răcească înainte de a-l depozita dacă este fierbinte. Inspectați toate componentele încărcătorului înainte de utilizare. Contactați dealerul în cazul în care se constată deteriorări.

	Înainte de utilizare	O dată pe săptămână	O dată pe lună	O dată pe an
Verificați frânele și testați frânarea pe o suprafață plană	X			
Verificați dacă cablul de accelerație și cablul de ghidare sunt deteriorate	X			
Verificați dacă anvelopele solide prezintă zone aplatizate	X			
Verificați dacă cotierele sunt slăbite sau deteriorate	X			
Verificați cablajul, conectorii și izolația		X		
Verificați dacă încărcătorul și conectorii controlerului prezintă coroziune		X		
Verificați presiunea anvelopelor (dacă sunt pneumatice)		X		
Inspectați roțile anti-înclinare pentru uzură și spațiu liber adecvat			X	
Inspectați uzura anvelopelor și înlocuiți-le după caz			X	

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

Utilizați o cârpă umedă și un detergent blând, neabraziv, pentru a curăța cadrul, elementele decorative și de protecție. Evitați zgărierea suprafețelor. Nu utilizați substanțe chimice agresive sau unelte de curățare aspre. Anvelopele și elementele de protecție pot beneficia de o aplicare ușoară de balsam pentru cauciuc sau vinil.

Curățați roțile cu o perie umedă din fibre sintetice (nu utilizați niciodată o perie de sârmă). Pentru dezinfectare, utilizați un dezinfectant neagresiv testat și aprobat. Pulverizați sau ștergeți conform instrucțiunilor producătorului produsului. Lăsați toate zonele electronice (consola, portul încărcătorului, sistemul electronic din spate) să se usuce bine înainte de a utiliza din nou scuterul.

Dacă este necesar, curățați produsul cu un dezinfectant aprobat. Înainte de aplicare, asigurați-vă că dezinfectantul este sigur pentru utilizarea pe produsul dumneavoastră.

Scuterul de mobilitate trebuie depozitat într-un mediu uscat, curat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme. Dacă depozitați pentru o perioadă îndelungată (mai mult de 3 luni), urmați aceste recomandări:

- Încărcați complet bateriile înainte de depozitare.
- Scoateți bateria din scuter.
-

DEPOZITARE

Condiții de mediu

Păstrați scuterul în aceste condiții:

- Limitare de temperatură -10°C până la +50°C;
- Umiditate relativă 30% până la 70%;
- Presiune atmosferică 86 kPa până la 106 kPa.

REUTILIZARE

Scuterul de mobilitate este potrivit pentru reutilizare. Înainte de reutilizare, trebuie efectuate următoarele acțiuni:

Efectuați curățarea și dezinfectia (a se vedea capitolul „CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE”);

Inspekția tehnică și verificarea siguranței (a se vedea capitolul „ÎNTREȚINERE”). Dacă este necesar, înlocuiți bateriile și piesele uzate.

Scuterul trebuie reglat pentru a se potrivi noului utilizator în conformitate cu manualul de utilizare și documentația de service.

ELIMINARE

Fiți responsabil față de mediu atunci când aruncați scuterul. Produsul include componente reciclabile precum metal, plastic, electronice, baterii și materiale din spumă. Respectați toate reglementările locale și naționale privind eliminarea. Pentru eliminarea corectă a scuterului și a pieselor sale, contactați furnizorul autorizat, unitatea locală de gestionare a deșeurilor sau serviciul municipal de reciclare.

SPECIFICAȚII

Model	SKUTA
Lungime totală (cu coș) (cm)	112
Lățime totală (cm)	55 - 69
Înălțime totală (cm)	104
Greutate totală (kg)	46
Adâncimea scaunului (cm)	38
Înălțimea scaunului (cm)	52 - 56
Lățimea scaunului (cm)	43.5
Înălțimea spătarului (cm)	37
Distanța de la cotieră la scaun (cm)	20
Lungimea cotierei (cm)	26.5
Lățimea cotierei (cm)	4.5
Diametrul roților față/spate (cm)	19 / 19
Raza minimă de întoarcere (cm)	250
Sarcina maximă de siguranță (kg)	136
Viteza maximă înainte (km/h)	8
Înălțimea de escaladare a obstacolului (cm)	4.5
Lățimea minimă a ușii (cm)	90
Cadru	

СИМВОЛИ

В тази инструкция за употреба предупрежденията са обозначени със символи. Предупредителните символи са придружени от заглавие, което показва сериозността на опасността или основна информация.

i Дава основна информация, препоръки и насоки за ефективна и безпроблемна употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ – за да се покаже, че е необходимо внимание при работа с устройството. Да се посочи, че текущата ситуация изисква информираност на оператора или действие на оператора, за да се избегнат нежелани последици.



ВНИМАНИЕ! Този знак се използва за много важни части, свързани с вашата безопасност. Погледнете инструкциите за експлоатация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всяка друга употреба или неправилна такава може да доведат до опасна ситуация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството е компактен скутер за хора с ограничена подвижност, предназначен както за употреба на закрито, така

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от електрически удар Дръжте металните предмети далеч от клемите на батерията. Може да възникне ток удар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте на деца да играят близо до скутера или да го управляват.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от злополуки. Предпазни устройства, които са неправилно настроени или вече не работят (спирачки, акумулатор), може да причинят злополуки. Винаги проверявайте дали устройствата за безопасност работят, преди да използвате скутера, и ги проверявайте редовно при оторизиран представител.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от злополуки. Прочетете и следвайте информацията в ръководството на потребителя. Не използвайте този продукт или каквото и да е допълнително оборудване, без първо да прочетете и разберете внимателно тези инструкции. Ако не разбирате предупрежденията, предпазните мерки или инструкциите, свържете се с вашия търговски представител, преди да се опитате да използвате оборудването. В противен случай може да възникнат нараняване или увреждане. Никога не се опитвайте да използвате скутера за хора с ограничена подвижност извън ограниченията му, както е описано в настоящото ръководство.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**ВНИМАНИЕ**

Температурите на повърхностите може да се повишат, когато са изложени на външни източници на топлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не свързвайте удължителен кабел със зарядното устройство за батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разглобяването на контролера, мотора или зарядното устройство от лице, различно от оторизиран сервизен служител, е забранено и анулира всяка приложима гаранция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте скутера по пътища или магистрали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте скутера, ако сте под въздействието на алкохол, лекарства или други вещества, които може да повлияят на способността ви за шофиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бъдете внимателни, когато управлявате скутера за хора с ограничена подвижност в оживени райони или търговски центрове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При никакви обстоятелства скутера за хора с ограничена подвижност не трябва да се използва като седалка в моторно превозно средство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да повдигате скутера за хора с ограничена подвижност за други части освен за рамката (например, седалката или корпуса).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте на деца без надзор да играят близо до скутера, докато батериите се зареждат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дръжте ръцете си далеч от гумите, когато шофирате. Имайте предвид, че широките дрехи може да се закачат в задвижващите колела.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството не е предназначено за употреба в или в близост до електронни системи за сигурност, като например металотърсачи или електромагнитни системи против кражба, и ефективността на устройството може да се влоши в непосредствена близост до такива системи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството не е безопасно за употреба в ЯМР среди и не трябва да се използва в близост до друго съвременно медицинско оборудване, като например електрокаутер, електрохирургични апарати и оборудване за диатермия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не модифицирайте скутера за хора с ограничена подвижност по никакъв начин. Това ще анулира гаранцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте скутера като седалка в движещо се превозно средство. електрокаутер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Карайте скутера нагоре или надолу по наклон, никога назад. Нестабилните движения или движението напред-назад може да увеличат вероятността от преобръщане. Промените в наклоните може да намалят стабилността. При никакви обстоятелства не се движете по наклон, по-голям от максималния ъгъл на стабилност за този скутер за хора с ограничена подвижност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте преносими радиостанции, като например СВ (граждански обхват) радиостанции, и не включвайте лични комуникационни устройства, като например мобилни телефони, докато скутерът е включен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте за наличието на близки предаватели, като радио или телевизионни станции, и избягвайте да се приближавате до тях.

ОБЩА ЧАСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази инструкция за употреба съдържа важна информация за боравенето с продукта. За да осигурите безопасност при използване на продукта, прочетете внимателно инструкцията за употреба и следвайте инструкциите за безопасност. Можете да идентифицирате модела на вашия скутер и неговия уникален идентификационен номер на етикета, залепен на рамката на шасито под седалката.

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Благодарим ви за доверието, оказано на Kid-Man®. Всеки продукт е фабрично проверен и ни остави в безупречно състояние. Пожелаваме ви много успех и се надяваме продукта на UAB Kasko Group | Kid-Man® да има положително въздействие върху ежедневието ви.

ГАРАНЦИЯ

Издаваме гаранция от 24 месеца от датата на закупуване. Всички неразрешени модификации, извършени без одобрението на производителя, ще направят отговорността невалидна. Това включва превишаване на максималното допустимо натоварване и неправилна употреба на продукта по неправилен начин. Гаранцията е валидна само при напълно попълнена гаранционен документ. Компанията UAB Kasko Group | Kid-Man® (наричана по-нататък „Производител“) след получаване

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Производителят не поема отговорност за щети, произтичащи от:

- неспазване на инструкцията за употреба;
- неправилно използване;
- естествено износване;
- сглобяване или настройка от купувача или технически модификации на трета страна;
- използването на неодобри аксесоари на трета страна вместо одобрени аксесоари на производителя;;
- неоторизирани модификации и/или използване на неподходяща резервна част.

СТАНДАРТИ И РЕГЛАМЕНТИ

Скутерът отговаря на изискванията на:

- а) ISO 7176-4: изисквания за консумация на енергия и теоретичен обхват при стандартни условия на изпитване;
- б) ISO 7176-8: изисквания и методи за изпитване на статична, ударна и съпротивлението на умора;
- в) ISO 7176-9: изисквания за климатични изпитвания;

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК

Очакваният срок на експлоатация на двигателя на скутер за хора с ограничена подвижност обикновено е около три години, което означава, че при нормална употреба и редовна поддръжка, двигателят би трябвало да работи приблизително три години. Не изхвърляйте скутера заедно с обикновените отпадъци (вижте глава „ИЗХВЪРЛЯНЕ“).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Продукт: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР

Модел: SKUTA

РЕФ: 01-3580

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ

Предназначението на това устройство е да осигури мобилност на лица, ограничени до седнало положение, които имат способността да управляват скутер.

ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Скутерът е предназначен за лесно транспортиране на хора. Предназначен е за ползване от един човек с максимално тегло 136 kg, не за пътници (включително деца). Електрическият скутер е предназначен за възрастни, не е за стоки, и не е за лица под 16 години. Електрическият скутер е вид транспортно средство, което компенсира трудностите при движение на хора. Скутерът не е подходящ за хора с хемиплегия или параплегия и не трябва да се използва от хора с умствени увреждания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от злополуки.

Забранено е превишаването на максимално безопасното натоварване на скутера.

Устройството е предназначено да осигурява мобилност на лица, ограничени до седнало положение, и при необходимост с придружител.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не са известни противопоказания при използване на скутера по предназначение.

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТА

Идентификационният етикет е прикрепен към продукта (вижте снимката).

1. Product
2. Model
3. Size (seat width)
4. Maximum load
5. Manufacturer / contact details
6. Date of manufacture
7. UDI / SN code
8. CE mark
9. Consult instructions for use

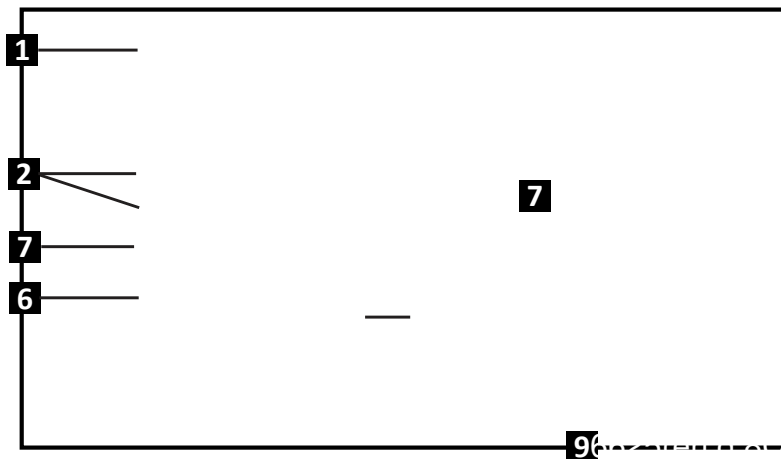

ВНИМАНИЕ

Скутерът е подходящ за използване от други лица. За тази цел скутерът трябва първо да бъде добре почистен и дезинфекциран. След това всички компоненти на скутера трябва да бъдат проверени от оторизиран сервизен представител за общо състояние, износване и да бъдат ремонтирани, ако е необходимо.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Скутерът за хора с ограничена подвижност SKUTA се доставя в картонена опаковка и е готов за употреба. След разопаковането запазете картонената опаковка, ако е възможно. Може да ви потрябва по-късно за съхранение или за връщане на скутера.

След получаване на пратката, проверете дали не е повредена по време на транспортирането.

- i** Ако видите признаци на повреда, уведомете незабавно транспортната компания.
- i** Проверете съдържанието на пакета и ако някоя от частите по-долу липсва, свържете се с местния търговец.

Съдържание на опаковката:

1. 1 х електрически скутер
2. 1 х седалка с подлакътници
3. 1 х кошница
4. 1 х батерия (инсталирана или отделна)
5. 2 х странични огледала
6. 1 х стойка за седалка с фиксиращ щифт
7. 2 х инструмент за регулиране (ако е приложимо)
8. 2 х ключ(а)
9. 1 х зарядно
10. Инструкция за употреба

КОМПОНЕНТИ И ФУНКЦИИ

Общ преглед

Това е скутер за хора с ограничена подвижност със съгваема рамка и ергономична система за управление с лост.

1. Странични огледала
2. Контролен панел
3. Кошница
4. Копче за регулиране на лоста
5. Предно колело
6. Седалка с подлакътници
7. Батерия
8. Поставка за крака
9. Дръжка
10. Задно колело/задвижващо колело
11. Колела против преобръщане
12. Ключ
13. Лост
14. Лост за свободно движение

i Конфигурацията на вашия скутер може леко да се различава от показаната в това ръководство, поради непрекъснатите подобрения на продукта.



НАСТРОЙВАНЕ НА СКУТЕРА

За да разглобите скутера:

Вашият скутер за пътуване може да бъде разглобен на пет основни части:

1. Седалка
2. Задна рамка
3. Батерия
4. Предна рамка
5. Кошница



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вдигайте повече, отколкото можете да носите. Поискайте помощ, ако е необходимо.

НАСТРОЙВАНЕ НА СКУТЕРА

За да сглобите скутера за хора с ограничена подвижност SKUTA:

1. Поставете горната стойка на седалката в долната стойка на седалката (снимка 1).
2. Регулирайте до желаната височина и подравнете отворите за регулиране.
3. Поставете напълно фиксиращия щифт, за да закрепите стойката (снимка 2).
4. Инсталирайте батерията, като я поставите на мястото ѝ (снимка 3).
5. Прикрепете седалката, като я спуснете върху стойката. Завъртете седалката, докато щракне и се заключи на мястото си (снимка 4).
6. Повдигнете облегалката на седалката изправена, докато се разгъне напълно.
7. Повдигнете лоста и го закрепете, като затегнете копчето за регулиране на лоста по посока на часовниковата стрелка (снимка 5).
8. Поставете кошницата в държача за кошница на лоста (снимка 6).

За да сгънете



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте да не защитете пръстите или дрехите си при сглобяването. Винаги проверявайте дали лостът е здраво заключен преди употреба, като го натиснете/издърпате внимателно. Затегнете отново копчето, ако е необходимо.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не повдигайте за седалката, батерията, кошницата или лоста за управление. Първо отстранете всички части (вижте ръководството), след което повдигнете за основната рамка. Тегло: ~8 – 10 kg (варира в зависимост от модела).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди употреба

Преди да използвате скутера, уверете се, че батерията е напълно заредена и здраво закрепена. Седалката трябва да е правилно заключена на мястото си, а лостът за управление да е регулиран в удобна позиция. Поставете ключа в ключалката, за да включите скутера. Индикаторът за батерията ще светне и ще покаже текущото ниво на зареждане. Задайте максималната скорост на шофиране, като използвате циферблата на арматурното табло – иконата на костенурка показва най-бавната настройка, докато заекът показва най-бързата (снимка 8).

Управление

За да се придвижите напред, леко натиснете дясната страна на лоста за управление с палец. За движение назад, натиснете

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Качване и слизване

Застанете до скутера и завъртете седалката към себе си, като използвате лоста за завъртане на седалката (снимка 10). Седнете внимателно и завъртете седалката напред, докато се фиксира на мястото си. Винаги се уверявайте, че седалката е заключена, преди да шофирате.

Преди да се качите или слезете, извадете ключа от контактния ключ, за да предотвратите случайно движение. Уверете се, че краката ви са поставени безопасно върху платформата за крака и че скутерът е на стабилна, равна повърхност.

За да слезете по безопасен начин, първо спрете напълно скутера. Винаги изваждайте ключа от запалването, преди да се изправите – това предотвратява всяко случайно движение.

Завъртете седалката настрани, като използвате лоста за завъртане на седалката, като се уверите, че е заключена в това положение. След това бавно се изправете и слезте от скутера. Използвайте подлакътниците, за да се повдигнете (снимка 11). Можете да оставите седалката обърната настрани, за да ви е по-лесно да седнете следващия път.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги изваждайте ключа, преди да се качите или слезете от скутера, за да предотвратите случайно движение.

Регулиране на огледалата (ако има такива)

Ако вашият скутер има огледала, можете да ги регулирате за по-добра видимост. Внимателно повдигнете капачката,

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Спирачна система

Скутерът е оборудван с електромагнитни спирачки. Тези спирачки се задействат автоматично, когато спрете да натискате лоста. Спирачната система работи само когато лостът за свободен ход е в положение за шофиране. Ако лостът е в режим на бутане, спирачките са освободени. Винаги се уверявайте, че скутерът е в режим на движение, преди да го използвате.

Вижте снимка 8

Лост за контролиране на газта

Лостът за газта контролира движението на вашия скутер напред и назад.

- Поставете дясната си ръка върху дясната ръкохватка, а лявата си ръка върху лявата ръкохватка.
- За да се придвижите напред, леко натиснете дясната страна на лоста за управление с десния си палец.
- За да се придвижите назад, натиснете лявата страна на лоста за газта с левия си палец.
- За да спрете, освободете лоста. Той ще се върне автоматично в средно положение „Спиране“ и електромагнитните спирачки ще се задействат.

Превключвател за ключа

- Поставете ключа в превключвателя и го завъртете в положение „Включено“, за да включите скутера.
- За да изключите скутера, завъртете ключа в положение „Изключено“ и го извадете.

Въпреки че ключът може да остане в превключвателя, когато захранването е изключено, препоръчително е да го извадите, когато не се използва, за да предотвратите неразрешена експлоатация.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Стълби

Ако трябва да преместите скутера за хора с ограничена подвижност по стълби, винаги търсете помощ от двама души – един отпред и един отзад (снимка 14). Разглобете скутера на по-малки части (седалка, батерия, рамка) за по-лесно боравене. При повдигане на напълно или частично сглобен скутер:

1. Човекът отзад трябва леко да повдигне скутера и здраво да държи задната рамка или дръжките.
2. Човекът отпред трябва здраво да хване долната част на предната рамка, в никакъв случай кошницата или лоста за управление.
3. Внимателно повдигайте и качвайте само по едно стъпало. Не спускайте скутера, докато човекът отпред не стигне до следващото стъпало.

Слизането надолу следва същите стъпки в обратен ред.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не се опитвайте да качвате или слизате по стълби със скутера, докато го карате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Скутерът за хора с ограничена подвижност не е предназначен за употреба като седалка в превозни средства. Винаги се премествайте на подходяща седалка за кола и обезопасявайте скутера отделно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

Ако **индикаторът за батерията** на дисплея започне да **мига**, вашият скутер за хора с ограничена подвижност е открил системна повреда. Следвайте стъпките по-долу, за да идентифицирате и съобщите за проблема:

1. Освободете лоста за газта, след което изключете и включете отново скутера.
 - Ако грешката изчезне, продължете с редовната употреба.
 - Ако грешката продължава, преминете към стъпка 2.
2. Изключете скутера и заредете напълно батерията.
 - След зареждане, включете отново скутера.
 - Ако грешката продължава да се появява, продължете към стъпка 3.
3. Пребройте броя на миганията на символа на батерията.
 - Светлината ще мига определен брой пъти, след което ще направи пауза.
 - Пребройте броя на миганията между паузите и съобщете този код на вашия търговски представител или сервизен техник.

Таблица с референтни кодове на мигането:

БАТЕРИИ И ЗАРЕЖДАНЕ

Преди зареждане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете всички инструкции за батериите и зарядното устройство преди употреба. Използвайте само зарядното устройство, предоставено с вашия скутер за хора с ограничена подвижност. Не се опитвайте да зареждате с автомобилно или неодобрено зарядно устройство.

Индикаторът за състоянието на батерията на конзолата на лоста показва нивото на зареждане на батерията с помощта на скала с цветни кодове:

Зелен: Пълен заряд

Жълт: Умерен заряд (продължете да използвате с повишено внимание)

Червен: Нисък заряд – заредете незабавно

За най-точно отчитане, проверете индикатора за батерията, докато карате по суха, равна повърхност с пълна скорост.

Първо зареждане

Вашият скутер за хора с ограничена подвижност SKUTA е оборудван с две батерии 12 V с дълбокоциклични батерии, запечатани и неизискващи поддръжка.

Преди първа употреба, заредете напълно батериите за поне **8 до 14 часа**, като използвате предоставеното външно зарядно устройство.

Зареждане на вашия скутер

Функцията за блокиране на зарядното устройство деактивира движението на скутера и поке

е

БАТЕРИИ И ЗАРЕЖДАНЕ

Честота на зареждане и навици

Ежедневна употреба: Зареждайте скутера след всеки ден употреба в продължение на 8 – 14 часа. За най-добра

Индикаторни светлини на зарядното устройство

Червено – зареждането е в ход

Зелено – зареждането е завършено (95%) – активно е поддържащо зареждане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

Не използвайте удължителни кабели. Не зареждайте във влажни или непроветриви помещения. Не допускайте деца без надзор близо до зарядното устройство. Не зареждайте скутера, докато се използва. Не отваряйте корпуса на зарядното устройство. Не използвайте повредени кабели или конектори. Не излагайте неустойчивите на атмосферни влияния зарядни устройства на дъжд или сняг.



ВНИМАНИЕ

Винаги – включвайте зарядното устройство директно в заземен контакт с 3 щифта. Използвайте само предоставеното зарядно устройство. Оставете зарядното устройство да се охлади, преди да го приберете, ако е горещо. Проверете всички компоненти на зарядното устройство преди употреба. Свържете се с вашия търговски представител, ако откриете повреда.

	Преди употреба	Веднъж седмично	Веднъж месечно	Веднъж годишно
Проверявайте спирачките и тествайте спирането на равна повърхност	X			
Проверявайте лоста за газ и лоста за управление за повреди	X			
Проверявайте за спукани места върху плътните гуми	X			
Проверявайте подлакътниците за хлабавост или повреда	X			
Проверявайте кабелите, конекторите и изолацията		X		
Проверявайте конекторите на зарядното устройство и контролера за корозия		X		
Проверявайте налягането в гумите (ако са пневматични)		X		
Проверявайте колелата против преобръщане за износване и подходяща хлабина			X	
Проверявайте износването на гумите и ги сменете, ако е необходимо			X	

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Използвайте влажна кърпа и неагресивен, неабразивен препарат за почистване на рамката, лоста и облицовката. Избягвайте надраскване на повърхностите. Не използвайте агресивни химикали или груби инструменти за почистване. Гумите и броните може да се поддържат с леко нанасяне на препарат за гума или винил. Почиствайте колелата с мокра четка от синтетични влакна (никога не използвайте метална четка). За дезинфекция използвайте изпитан, одобрен неагресивен дезинфектант. Напръскайте или избършете според указанията на производителя на продукта. Оставете всички електронни части (конзола, порт за зареждане, задна електроника) да изсъхнат добре, преди да използвате скутера отново.

Ако е необходимо, почистете продукта си с одобрен дезинфектант. Уверете се, че дезинфектантът е безопасен за употреба върху вашия продукт, преди да го приложите.

Скутерът за хора с ограничена подвижност трябва да се съхранява на сухо, чисто и добре проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина и екстремни температури. Ако съхранявате за продължителен период (повече от 3 месеца), следвайте тези препоръки:

- Заредете напълно батериите преди съхранение.
- Извадете батерията от скутера.
-

СЪХРАНЕНИЕ

Условия на околната среда

Съхранявайте скутера при следните условия:

- Ограничение на температурата -10°C до +50°C;
- Относителна влажност 30% до 70%;
- Атмосферно налягане 86 kPa до 106 kPa.

ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Скутерът за хора с ограничена подвижност е подходящ за повторна употреба. Преди повторна употреба е необходимо да се извършат следните действия:

Почистване и дезинфекция (вижте глава „ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ“).

Техническа инспекция и проверка за безопасност (вижте глава „ПОДДРЪЖКА“). Ако е необходимо, сменете батериите и износените части. Скутерът трябва да бъде настроен така, че да е подходящ за новия потребител, в съответствие с ръководството на потребителя и сервизната документация.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Бъдете отговорни към околната среда, когато изхвърляте скутера. Продуктът съдържа рециклируеми компоненти като метал, пластмаса, електроника, батерии и пяна. Спазвайте всички местни и национални разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За правилно изхвърляне на скутера и неговите части, свържете се с вашия оторизиран доставчик, местен пункт за отпадъци или общинска служба за рециклиране.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	SKUTA
Обща дължина (с кошницата) (cm)	112
Обща широчина (cm)	55 - 69
Обща височина (cm)	104
Обща тегло (kg)	46
Дълбочина на седалката (cm)	38
Височина на седалката (cm)	52 - 56
Ширина на седалката (cm)	43.5
Височина на облегалката (cm)	37
Разстояние от подлакътника до седалката (cm)	20
Дължина на подлакътника (cm)	26.5
Ширина на подлакътника (cm)	4.5
Диаметър на предното/задното колело (cm)	19 / 19
Минимален радиус на завиване (cm)	250
Максимално безопасно натоварване (kg)	136
Максимална скорост напред (km/h)	8
Височина на катерене на препятствия (cm)	4.5
Минимална ширина на вратата (cm)	90

JAMSTVENI LIST / GARANCIALEVÉL / CARD DE GARANȚIE / ГАРАНЦІОННА КАРТА

Naziv proizvoda Termék neve Denumirea produsului Име на продукт	Model, REF Model, REF Model, REF		

Published by UAB Kasko Group | Kid-Man®

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lithuania

Tel. +370 5 265 0000 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

Datum 2026-02-18 | Dátum 2026-02-18 | Data 2026-02-18 | Дата 2026-02-18

Datum zadnjeg ažuriranja 18. 2. 2026

Utolsó ellenőrzés napja 2026.02.18

Data ultimei actualizări 18.02.2026

Дата на последна актуализация 18.02.2026 г.