

Kid-Man® Apžiūros pirštinės

Naudojimo rekomendacijos:



Naudojimo instrukcija



Šią naudojimo instrukciją privaloma pateikti gaminio naudotojui. Prieš naudojant šį gaminį, privaloma perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ir išsaugoti ją, kad galėtumėte ja naudotis ateityje.



Kasdienės
procedūroms



Valymui



Maistui

ĮVADAS

- ▶ Toliau pateikta instrukcija turėtų būti naudojama kartu su išsamia informacija ant pakuotės.
- ▶ Vienkartinės apžiūros ir apsauginės pirštinės iš pagamintos nitrilo; be pudros; nesterilus. Atsargiai: Galima naudoti sąlyčiui su maistu (ne daugiau kaip 30 minučių sąlyčio laikas ir 40 laipsnių kontakto temperatūra). Be latekso, be miltelių ir be DEHP/DOP. Atitinka MD reglamentą (ES) 2017/745 (1 klasė), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, AAP reglamentą (ES) 2016/425 (CAT III), EN ISO2 EN21 ISO4 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Prieš naudodami patikrinkite, ar nepažeista. Nenaudokite pažeistų pirštinių.
- ▶ Tinkamai mūvėti ir nusimauti pirštines yra įgūdis, kurį turi praktikuoti sveikatos priežiūros darbuotojai ir kiti, naudojantys pirštines. Dėvėti reikia teisinga tvarka, kad būtų išvengta infekcijų perdavimo. Prieš mūvėdami pirštines, rankas laikykite švarias. Nusivilkite pirštines, kad išorinis pirštinių paviršius nesiliestų su oda, nes paviršius gali būti užterštas krauju ir kitais kūno skysčiais. Venkite spragtelėti, nes teršalai gali patekti į akis, burną arba ant odos ar kitų netoliese esančių žmonių.

KOMPONENTAI / PAVOJINGI KOMPONENTAI

Pirštinių gamyboje naudojami komponentai kai kuriems žmonėms gali sukelti alergines reakcijas. Kai kuriose pirštinėse gali būti komponentų, kurie gali sukelti alergiją joms alergiškiems asmenims, kurie gali sukelti kontaktinį sudirginimą ir (arba) alerginę reakciją. Alerginės reakcijos atveju kreipkitės pas gydytoją.

ŽENKLINIMAS

Pirštinės yra III kategorijos, asmeninės apsaugos priemonės pagal Reglamento 2016/425 I priedą ir atitinka standartus: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.

- ▶ Kiekviename viename rodama ši informacija: produkto nuoroda, partijos numeris ir galiojimo data.
- ▶ Simboliai, naudojami pagal standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami su medicinos prietaisų etiketėmis, ženklinimu ir pateikiama informacija.

CE 2777

Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už sertifikavimą ir nuolatinę atitiktį: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown verslo parkas, Clonee, Dublinas, D15 YN2P, Airija



EN ISO 374-5:2016
Apsauga nuo virusų

Atsparumas bakterijoms ir grybeliams- praeina. Atsparumas virusui - praeina.*Įsiskverbimas. Atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir yra susijęs tik su ištirtu mėginiu.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- ▶ Plonos nitrilo pirštinės be pudros, abipusės ir su susuktu kraštu, kad rankogaliai būtų tvirtesni
- ▶ Geros virusinės barjerinės savybės, apsaugo nuo įvairių cheminių medžiagų
- ▶ Puikus lytėjimo jautrumas, pagerintas sukibimas su šlapia ir sausa danga su mikrotekstūriniais pirštų galiukais
- ▶ Puikiai priglunda, lengva užsidėti ir nuimti
- ▶ Be latekso, miltelių ir baltymų, gera alternatyva kenčiantiems nuo I tipo alergijų
- ▶ Pirštinės tinka bet kokiam sąlyčiui su maistu

MEDICININĖS	2017/745	I KLASĖ	EN 455	AQL 1.5
AAP	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5


- ▶ 100 vnt. dėžutėje
- ▶ 10 Pakuočių transportinėje pakuotėje
- ▶ 600 Dėžės vienoje paletėje

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Dydis	Delno plotis	Bendras ilgis	Storis		
			Delnas	Riešas	Pirštas
XS 5-6	75 ± 5 mm	240 mm	Min 0.08 mm	Min 0.07 mm	Min 0.10 mm
S 6-7	85 ± 5 mm				
M 7-8	95 ± 5 mm				
L 8-9	110 ± 5 mm				
XL 9-10	120 ± 5 mm				
XXL 10-11	130 ± 5 mm				

KAIP UŽDĖTI VIENKARTINES PIRŠTINES

1

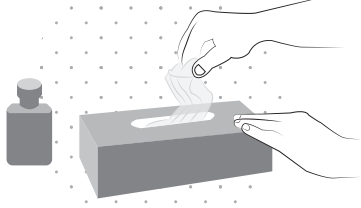


2



3



4

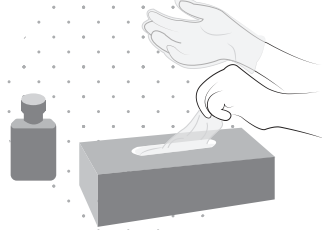


5




6


KAIP TINKAMAI NUSIMTI VIENKARTINES PIRŠTINES


1

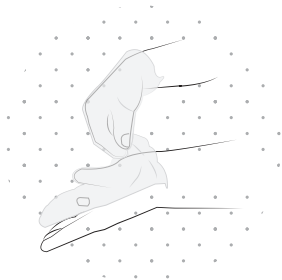

2

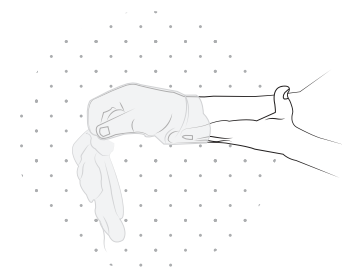

3

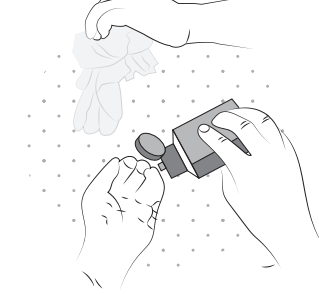
LAIKYMO INSTRUKCIJOS

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, ozono šaltinių ar ugnies. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, 5 - 38 °C temperatūroje. Nelaikyti šalia tirpiklių, alyvų, degalų ir tepalų.

UTILIZAVIMAS


Išmeskite pagal galiojančius reglamentus.

ANT PAKUOTĖS NAUDOJAMI SIMBOLIAI


Gamintojas



Pagaminimo data



Temperatūros apribojimas



Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis



Siuntos / partijos numeris



Tinkamumo pabaigos data



Skirtos naudoti tik vieną kartą



Pakuočių perdirbimas



Gaminio numeris



Laikykite sausoje vietoje



Nesterilios



Šia puse į viršų



Medicinos priemonė



Laikykite atokiau nuo saulės spindulių



Galima naudoti sąlyčiui su maistu



Elkitės atsargiai



Serijos numeris



Laikykite atokiau nuo saulės spindulių



Galima naudoti sąlyčiui su maistu



Elkitės atsargiai



UAB Kasko Group | Kid-Man®
A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

Pagaminta Kinijoje
Sukūrė Kid-Man®

Išleido UAB „Kasko Group“ | Kid-Man®
Paskutinio atnaujinimo data 2026-01-05

