

BEGO

01-3560GR; 01-3560TR; 01-3560RD; 01-3560BK

HODALICA (ROLATOR) NA 4 KOTAČA
4 KEREKES ROLLÁTOR
CADRU DE MERS CU 4 ROȚI
РОЛАТОР С 4 КОЛЕЛА

HR

HU

RO

BG



- HR** Upute za uporabu
- HU** Használati útmutató
- RO** Instrucțiuni de utilizare
- BG** Инструкция за употреба




- HR** Upute za uporabu **MORAJU** se dostaviti korisniku proizvoda. **PRIJE** upotrebe proizvoda, **MORATE** pročitati ove upute za upotrebu i pohraniti ih za buduću upotrebu.
- HU** Ezt a használati útmutatót át **KELL** adni a termék használójának. Használat **ELŐTT** el **KELL** olvasni az útmutatót és meg kell őrizni azt későbbi használatra.
- RO** Aceste instrucțiuni de utilizare **TREBUIE** să fie furnizate utilizatorului produsului. **ÎNAINTE** de a utiliza acest produs, această Instrucțiune de utilizare **TREBUIE** să fie citită și salvată pentru referință viitoare.
- BG** Тази инструкция за употреба **ТРЯБВА** да бъде представена на потребителя на продукта. **ПРЕДИ** да използвате този продукт, **ТРЯБВА** да прочетете и запазите за бъдещи справки тази инструкция за употреба


Slika 1 / Ábra 1 / Imaginea 1 / Снимка 1

Slika 2 / Ábra 2 / Imaginea 2 / Снимка 2



Slika 3 / Ábra 3 / Imaginea 3 / Снимка 3

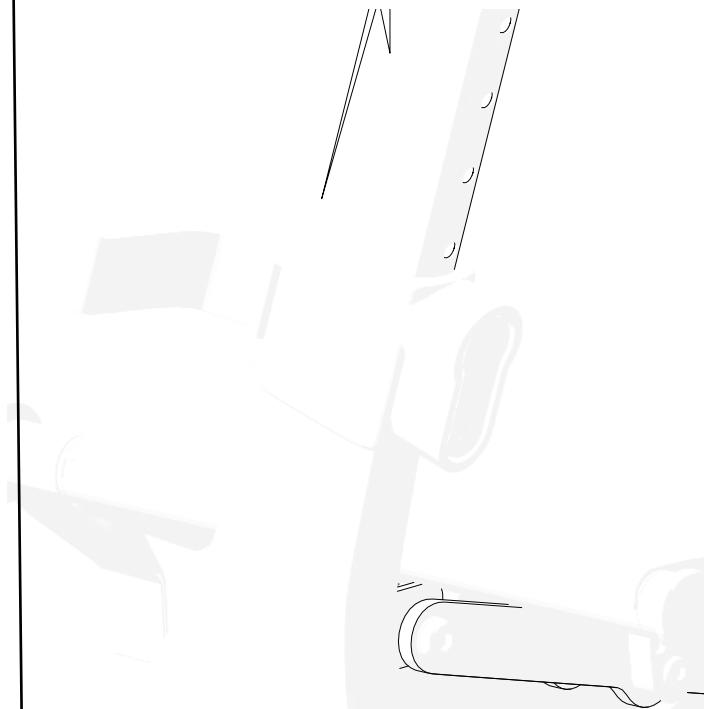

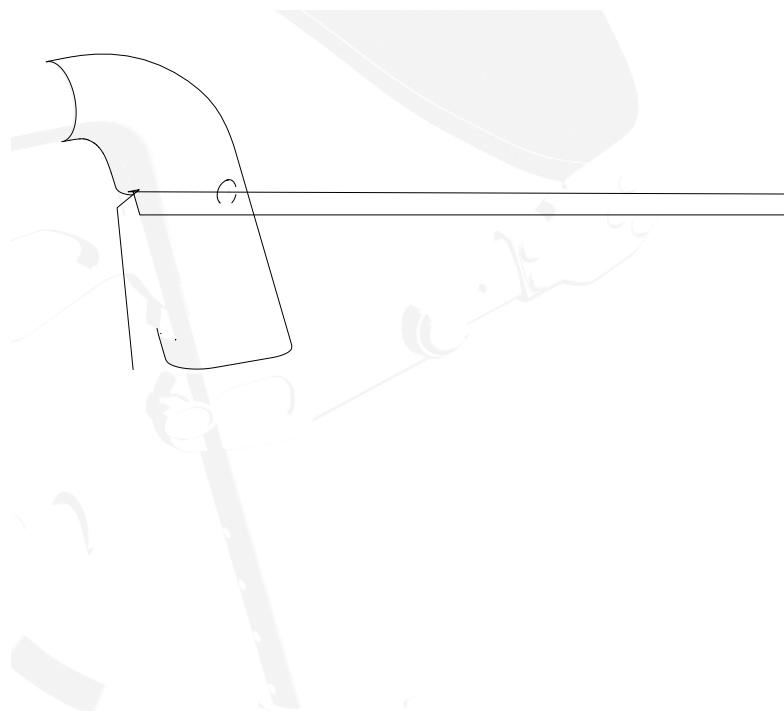


Slika 8 / Ábra 8 / Imaginea 8 / Снимка 8





Slika 9 / Ábra 9 / Imaginea 9 / Снимка 9

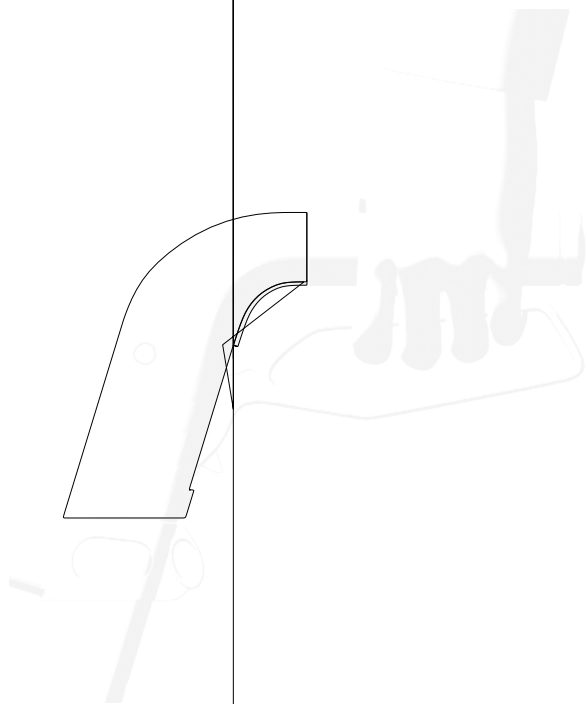

HR**SIMBOLI**

U ovim uputama za uporabu, upozorenja su prikazana simbolima. Simboli upozorenja popraćeni su naslovom koji

UPOZORENJE / OPREZ - označava da je oprez nužan prilikom upotrebe uređaja. Označava kako trenutna situacija zahtijeva pozornost rukovatelja ili rukovatelj treba poduzeti određenu radnju kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

UPOZORENJE! Ovaj simbol se koristi za iznimno važne dijelove koji se odnose na vašu sigurnost. Pogledajte upute za upotrebu.

SIGURNOSNE INFORMACIJE**UPOZORENJE**

Hodalica (rolator) prikladna je samo za jednu osobu.

UPOZORENJE

Budite svjesni opasnosti u svom okruženju, kao što su uska vrata, stepenice, kućanski aparati, dječje igračke, itd. Nemojte posezati za predmetima koji se nalaze izvan dosega vaše ruke.

UPOZORENJE

Ne pokušavate voziti preko ruba pločnika ili prepreka. To može izazvati prevrtanje hodalice (rolatora) što vam može izazvati tjelesne ozljeda ili oštećenje hodalice (rolatora).

UPOZORENJE

Zabranjeno je pušiti ili biti u blizini plamena kada koristite hodalicu (rolator).

UPOZORENJE

Hodalica (rolator) nije namijenjena da je koriste slijepe osobe.

UPOZORENJE

Opasnost od opekline. Hodalica (rolator) ne smije se trajno izlagati temperaturama većim od +40°C. U protivnom se okviri te nasloni za ruke mogu zagrijati što može izazvati opekline.

OPREZ

Opasnost od prignječenja prstiju. Uvijek postoji opasnost od prignječenja, npr. prstiju ili ruku, u pokretnim dijelovima hodalice (rolatora).

UPOZORENJE

Opasnost od nezgoda. Sigurnosni uređaji koji nisu ispravno podešeni ili više ne rade (npr. kočnice) mogu izazvati nezgode. Prije upotrebe hodalice (rolatora) na 4 kotača uvijek provjerite rade li sigurnosni uređaji i neka ih ovlašteni trgovac redovito provjerava.

UPOZORENJE

Opasnost od nezgoda. Za ispravnu i sigurnu upotrebu preporučujemo vam pridržavanje sigurnosnih uputa prilikom upotrebe hodalice (rolatora). BEGO je dizajniran tako da osigurava stabilnost dok hodate. Svaki pomak hodalice (rolatora) utječe na težište, koje može izazvati prevrtanje hodalice (rolatora).

UPOZORENJE

Na nagibu koristite sporije brzine. Ne premašujte maksimalni nagib. Ne koristite pomične stepenice. Ne vozite unatrag na kosini.

UPOZORENJE

Zabranjeno je premašiti maksimalno sigurno opterećenje hodalice (rolatora).

UPOZORENJE

OPĆENITO

UVOD

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije kako rukovati proizvodom. Kako bi se osigurala sigurnost prilikom upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i pridržavajte se sigurnosnih uputa.

PREDGOVOR

Zahvaljujemo se na povjerenju koje ste ukazali tvrtki Kid-Man. Svaki proizvod pregledan je u tvornici i preuzet je u besprijeckornom stanju.

Želimo vam puno uspjeha i nadamo se da će proizvod UAB Kasko Group | Kid-Man® pozitivno utjecati na vaš svakodnevni život.

JAMSTVO

Izdajemo jamstvo koje traje 24 mjeseca od dana kupnje. Bilo kakva neovlaštena preinaka izvršena bez odobrenja proizvođača poništiti će jamstvo. Ovo uključuje premašivanje maksimalne težine korisnika te neodgovarajuću upotrebu proizvoda. Jamstvo vrijedi samo s ispravno popunjenim jamstvenim listom. UAB Kasko Group | Kid-Man® (u daljnjem tekstu proizvođač) nakon što je od kupca primila reklamirani proizvod u roku od 4 tjedna odlučuje hoće li rješenje problema biti obuhvaćeno jamstvom. Ako nije obuhvaćeno jamstvom, a kupac se slaže, tada će proizvođač riješiti problem ako je to moguće. Sve troškove, uključujući troškove transporta, snosit će kupac. Popravak pod jamstvom ne produžuje jamstvo.

STANDARDI I DIREKTIVE

Hodalica (rolator) na 4 kotača u skladu je sa zahtjevima:

- a) UREDBOM (EU) 2017/745 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, izmjenom Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/385/EEC i 93/42/EEC.
- b) EN ISO 11199-2:2021 Pomoćni proizvodi za hodaње kojima se upravlja objema rukama — Zahtjevi i metode ispitivanja — 2. dio: hodalice (rolatori).

VIJEK TRAJANJA

Očekivani vijek trajanja je 5 (pet) godina, uz pretpostavku svakodnevne uporabe proizvoda te u skladu sa sigurnosnim uputama, uputama za održavanje i ako se koristi za predviđenu namjenu kako je navedeno u ovim uputama za uporabu.

Nakon toga hodalicu (rolator) potrebno je reciklirati. Ne odlažite proizvod s drugim komunalnim otpadom (pogledajte poglavlje „ZBRINJAVANJE“).

INFORMACIJE O PROIZVOĐAČU

Proizvođač: UAB „Kasko Group“ (registrirani zaštitni znak (žig) Kid-Man®)

Adresa:

PREDVIĐENA NAMJENA I INDIKACIJE

Hodalica (rolator) na 4 kotača BEGO je naprava za hodaње koja se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom prostoru te je savršena za kompenzaciju i poboljšanje ograničene sposobnosti hodaња.



Ova hodalica (rolator) na 4 kotača treba odgovarati vašem specifičnom zdravstvenom stanju.

KONTRAINDIKACIJE

Nema poznatih kontraindikacija kada se hodalica (rolator) na 4 kotača BEGO koristi u skladu sa svojom namjenom.

PREDVIĐENI KORISNICI

Hodalica (rolator) na 4 kotača BEGO namijenjena je za kompenzaciju i poboljšanje mobilnosti osobe s ograničenom sposobnosti hodaња s maksimalnim kapacitetom težine od 135 kg.



UPOZORENJE

Opasnost od nezgoda. Zabranjeno je premašiti maksimalno sigurno opterećenje hodalice (rolatora) na 4 kotača.




OPREZ

Druge osobe mogu koristiti hodalicu (rolator) na 4 kotača. Da biste to učinili, hodalicu (rolator) prvo morate temeljito očistiti i dezinficirati. Zatim, sve dijelove hodalice (rolatora) mora provjeriti ovlašteni serviser i to opće stanje, istrošenost te ih po potrebi popraviti.

OZNAKA PROIZVODA

Identifikacijska oznaka pričvršćena je na okvir vašeg proizvoda (pogledajte sliku).

1. Proizvod
2. Model
3. Veličina (širina sjedala)
4. Maksimalno opterećenje
5. Proizvođač / kontakt podaci
6. Datum proizvodnje
7. UDI (Jedinstvena identifikacija proizvoda) šifra / šifra serijskog broja (SN)
8. CE oznaka
9. Pogledajte upute za upotrebu

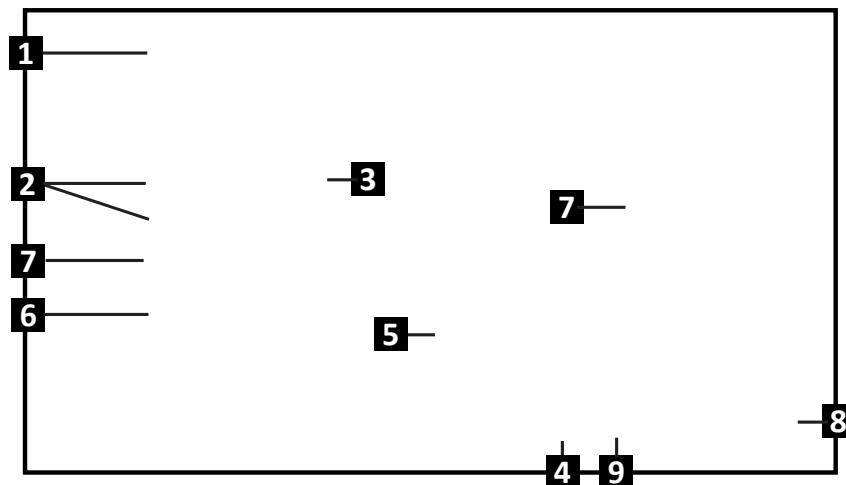

SADRŽAJ PAKIRANJA

Hodalica (rolator) na 4 kotača BEGO dostavlja se u kartonskom pakiranju i spremna je za upotrebu. Nakon raspakiranja, po mogućnosti sačuvajte kartonsku ambalažu. Možda će vam zatrebati kasnije za skladištenje ili za povrat pomagala. Nakon primitka pošiljke provjerite je li oštećena tijekom transporta.

- i** Ako primijetite znakove oštećenja, molimo da o tome odmah obavijestite prijevozniku tvrtku.
- i** Provjerite sadržaj pakiranja i ako nedostaje bilo koji od dolje navedenih dijelova, obratite se lokalnom prodavaču.



DIJELOVI I FUNKCIJE



PODEŠAVANJE HODALICE (ROLATORA)

Rasklapanje hodalice (rolatora):

1. Pripazite je li hodalica (rolator) na ravnom tlu (podu);
2. Ispruženim dlanovima pritisnite okvir sjedala prema doje, dok se površina sjedala ne izravna, a sjedalo postavi između okvira (slika 1 - 2);
3. Platnenu torbu objesite na dva držača za torbe na prednjoj strani hodalice (rolatora) (slika 6).

Sklapanje hodalice (rolatora):

1. Locirajte traku za sklapanje na sjedalu (slika 3);
2. Podignite sjedalo pomoću trake za podizanje i podignite hodalicu (rolator) prema gore. Dok podižete hodalicu (rolator) ona će se automatski sklopiti (slika 1);
3. Osigurajte sklopljeni položaj ako je potrebno i spremite hodalicu (rolator).



UPOZORENJE

Opasnost od prignječenja prsta!

UKOVANJE

Kočnica



UPOZORENJE

Prije nego što se smjestite na sjedalo, provjerite jesu li kočnice aktivirane!

UKOVANJE

Podešavanje visine i duljine naslona za leđa

Za podešavanje naslona za leđa u produženi položaj, pritisnite i držite gumb za podešavanje jednom rukom. Istovremeno, drugom rukom povucite naslon za leđa prema naprijed (slika 7 (a.)). Ponovite isti postupak s obje strane - lijevo i desno i tako osigurajte simetrično podešavanje.

Visina naslona za leđa se također može podesiti. Da biste to učinili, otpustite gumb za blokiranje i podignite ili spustite naslon za leđa u željeni položaj (slika 7 (b)). Podesite jednako na obje strane kako biste osigurali pravilno poravnanje.

Podešavanje visine ručki

Visina se podešava u dva koraka. Prvo, otpustite ručku s okvira. Drugo, dok jednom rukom pritišćete crveni gumb, drugom rukom podižite ili spuštajte ručku na željenu visinu (slika 4). Ponovite isto za obje ručke na lijevoj i desnoj strani. Visina mora biti ista s obje strane.

Visina se može podesiti u 6 različitih položaja. Položaji su označeni na unutarnjoj strani ručki (slika 5).

Hodanje

Kada hodate pomoću hodalice (rolatora) pripazite i hodajte uspravno, tako da hodalica (rolator) bude pored vašeg tijela. Tako ćete imati ispravan položaj tijela (slika 8).

Sjedanje na hodalici (rolator)

Prije nego što sjednete na sjedalo, provjerite je li hodalica (rolator) osiguran parkirnim kočnicama.

Kada sjedite, uvijek postavite stopala između stražnjih kotača (slika 9).

ODRŽAVANJE

Kako biste osigurali siguran i pouzdan rad, redovito provodite sljedeće provjere i održavanje ili ih prepustite drugoj osobi. U nastavku ćete pronaći preporučeni raspored održavanja

	Prije upotrebe	Jednom tjedno	Jednom mjesečno	Jednom godišnje
Neka hodalicu (rolator) na 4 kotača pregleda		X		
Vizualna provjera		X		
Provjerite sklopivi mehanizam			X	
Provjerite kočnice	X			
Provjerite kotače			X	
Neka hodalicu (rolator) na 4 kotača pregleda ovlašteni zastupnik/trgovac				X

UPOZORENJE

Popravak, čišćenje ili podešavanje proizvoda/hodalice (rolatora) treba obaviti ovlašteni serviser kad se proizvod ne koristi.

SKLADIŠTENJE

Proizvod treba čuvati na suhom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla. Uvijek je treba održavati čistom i bez prašine.



UPOZORENJE

Proizvod ne smije biti trajno izložen temperaturama višim od +40°C. U suprotnom, okvir i materijali mogu se pregrijati, što može izazvati opekline ili materijalnu štetu.



UPOZORENJE

Nikada ne stavljajte i ne odlažite druge predmete na vrh proizvoda.

Nakon dugotrajnog skladištenja (više od 3 mjeseca) proizvod je potrebno pregledati prije upotrebe (vidi poglavlje „ODRŽAVANJE”).

UVJETI OKRUŽENJA

Proizvod čuvajte u sljedećim uvjetima:

Raspon temperature -20°C do + 40°C;

Relativna vlažnost 20% do 75%;

Atmosferski tlak 800 hPa do 1060 hPa.

PONOVNA UPOTREBA

Proizvod se može višekratno koristiti. Treba obaviti sljedeće radnje:

Čišćenje i dezinfekcija (pogledajte poglavlje „ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA”), Provjera (pogledajte poglavlje „ODRŽAVANJE”).

Proizvod se treba prilagoditi novom korisniku sukladno servisnoj dokumentaciji.

ZBRINJAVANJE

TEHNIČKI PODACI

Model	BEGO			
REF	01-3560GR	01-3560TR	01-3560RD	01-3560BK
Boja	Zelena	Tirkizna	Crvena	Grafitno crna
Maksimalno sigurno opterećenje (kg)	135			
Težina (kg)	6.9			
Ukupna dužina (cm)	66			
Ukupna širina (cm)	55			
Ukupna visina (cm)	81.5 - 94			
Visina sjedala (cm)	59			
Dužina košare (cm)	17			
Širina košare (cm)	34			
Dubina košare (cm)	25			
Širina između naslona za ruke (cm)	45			
Veličina prednjeg kotača (cm)	23 x 3			
Veličina stražnjeg kotača (cm)				

FIGYELMEZTETÉS / ÓVINTÉZKEDÉS – jelzi, hogy óvatosság szükséges az eszköz használatakor. Jelzi, hogy az aktuális helyzetben a használó figyelme szükséges vagy valamilyen cselekvés szükséges nem várt következmény elkerüléséhez.

FIGYELEM! Ez a jelzés nagyon fontos biztonsági információkat tartalmaz. Kérjük ellenőrizze a használati útmutatót.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**FIGYELMEZTETÉS**

A rollátort csak egy személy használhatja.

FIGYELMEZTETÉS

Figyeljen a környezete veszélyeire, mint vékony ajtónyílás, lépcső, háztartási eszközök, gyerekjátékok stb.
Ne nyújtózkodjon ki a rollátorból.

FIGYELMEZTETÉS

Tárgyakon vagy bukkanókon keresztül ne próbáljon meg áthaladni, mert az a rollátor felborulásához vezethet. Így sérülést okozhat a rollátora magának vagy a rollátor hibásodik meg.

FIGYELMEZTETÉS

Rollátor használata közben tilos a dohányzás, vagy nyílt láng közelsége.

FIGYELMEZTETÉS

A rollátort vak személyek nem használhatják.

FIGYELMEZTETÉS

Égés veszély. A rollátor nem tehető ki folyamatosan +40°C hőmérsékletnek. Különben a keret és a kartámasz is felmelegedhet, amely égési sérüléseket is okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉS

Megvághatja ujjait. Mindig fennáll a veszélye annak, hogy például az ujjai vagy a karjai bekerülnek a rollátor mozgó részeibe.

FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély. Biztonsági eszközök, melyek rosszul vannak beállítva vagy nem működnek (például fékek) balesetet okozhatnak. A 4 kerekes járókeret használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági berendezések megfelelően működnek-e, és azokat rendszeresen ellenőriztesse felhatalmazott forgalmazóval.

FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély. A megfelelő és biztonságos használat érdekében javasoljuk, hogy a járókeret használata során tartsa be a biztonsági előírásokat. A 4 kerekes BEGO járókeretet a járás közbeni stabilitás biztosítására tervezték. A járókereten végzett minden mozgás befolyásolja a súlypontot, ami a segédeszköz felborulását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS

ÁLTALÁNOS

BEVEZETŐ

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a Kid-Man®-ot választotta. Minden terméket ellenőrzünk a gyárban, és hibátlanul értékesítjük. Sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy a UAB Kasko Group | Kid-Man® terméke pozitívan befolyásolja majd mindennapjait.

GARANCIALEVÉL

A vásárlástól számított 24 hónapos garanciát biztosítunk termékeinkre. Bármilyen jogtalan módosítás, melyet a gyártó nem hagyott jóvá a garancia vagy a gyártó bármilyen egyéb kötelezettségének megszűnéséhez vezet. Beleértve a maximális terhelhetőség túllépését és a termék nem megfelelő használatát. Garancia csak a teljeskörűen kitöltött garancialevél függvényében igényelhető. UAB Kasko Group | Kid-Man® (ezután Gyártó) a kereskedőn keresztül visszaküldött terméket bevizsgálja és 4 héten belül dönt, hogy az eset garanciális-e. Amennyiben az eset nem garanciális, és a vásárló jóváhagyja a Gyártó, amennyiben lehetséges javítja a problémát. Minden költség, beleértve a szállítást is a vásárlót terheli. A garanciális javítás nem hosszabbítja meg a garancia időszakát.

NORMÁK ÉS ELŐÍRÁSOK

A 4-kerekes rollátor megfelel az alábbi előírásoknak:

a) (EU) 2017/745 SZÁMÚ 2017. április 5-ei EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS SZABÁLYOZÁSA egészségügyi eszközökről, módosítva a 2001/83/EC direktívát, az (EC) No 178/2002 és (EC) No 1223/2009 számú előírásokat, valamint hatályon kívül helyezve a Tanács 90/385/EEC és 93/42/EEC számú direktíváit.

b) EN ISO 11199-2:2021 Kézzel működtethető járást segítő eszközök – Elvárások és tesztelési módok – Második rész: Rollátorok

HASZNÁLATI IDŐ

Az eszköz várható élettartama öt (5) év, amennyiben napi szinten a használati útmutatónak megfelelően, a biztonsági és karbantartási előírásokat betartva van használatban.

Ezt követően az eszközt megfelelő módon újra kell hasznosítani. Ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé (lásd az „ÁRTALMATLANÍTÁS” fejezetet).

INFORMÁCIÓ A GYÁRTÓRÓL

Gyártó: UAB „Kasko Group” (hivatalos márkanev Kid-Man®)

Cím:

KÍVÁNT CÉL ÉS JAVASLATOK

A 4 kerekes BEGO járókeret egy beltéri és kültéri használatra alkalmas eszköz, amely a csökkent járási képesség kompenzálására és javítására szolgál.

ELLENJAVASLATOK

Nincs ismert ellenjavaslat a rollátor BEGO előírt használatával szemben.

CÉLKÖZÖNSÉG

A 4-kerekes járókeret BEGO egy járási képességeiben korlátozott maximum 135 kg-os ember mobilitását hivatott kompenzálni, illetve javítani.



FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély. Tilos meghaladni a 4 kerekes rollátor maximális biztonsági terhelhetőségét.




ÓVINTÉZKEDÉS

A 4-kerekes rollátor másoknak is átadható. Újrahasználat előtt a járókeretet alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni. Ezt követően a járókeret valamennyi alkatrészét felhatalmazott szervizszolgáltatónak kell ellenőriznie az általános állapot és az elhasználódás szempontjából, és szükség esetén javítani kell.

TERMÉK CÍMKE

A termékazonosító címke a járókeret vázán található (lásd az ábrát).

1. Termék
2. Modell
3. Méret (ülés szélesség)
4. Maximális terhelhetőség
5. Gyártó / kapcsolat
6. Gyártási dátum
7. UDI (Egyedi eszközazonosító)/SN (Sorozatszám) kód
8. CE jelzés
9. Használati útmutató és tanácsok

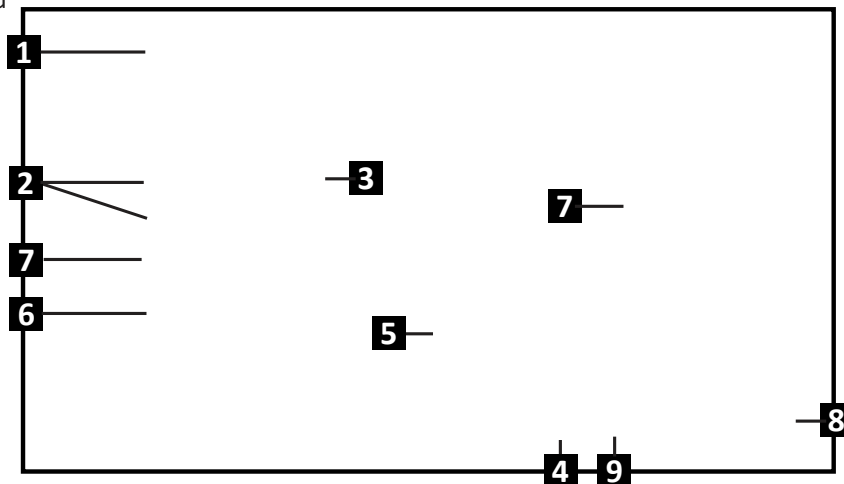

A CSOMAG TARTALMA

A 4-kerekes rollátor BEGO használatra készen egy kartondobozban kerül kiszállításra. Kicsomagolás után kérjük, amennyiben lehetséges, őrizze meg a kartondobozt. Szüksége lehet rá később tárolásra vagy az eszköz visszaszolgáltatásakor. A csomag átvételekor kérjük, ellenőrizze, hogy az nem sérült-e meg a szállítás közben.

- i** Amennyiben sérülés nyomát észleli, kérjük, azonnal jelezze a fuvarozónak.
- i** Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát, és amennyiben az alább felsorolt alkatrészek közül bármelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.



RÉSZEK ÉS FUNKCIÓK



A ROLLÁTOR FELÁLLÍTÁSA

A 4-kerekes rollátor **kihajtogatása**:

1. Győződjön meg róla, hogy rollátora biztos és kiegyenlített talajon áll.
2. Lapos tenyereivel nyomja le az ülőkeretet, így az ülőfelület lapossá válik, és a fémek között teljesen kisimul a szék rész (1-2. ábra).
3. Akassza fel a textiltáskát a járókeret elején található két táskatartóra (6. ábra).

A 4-kerekes rollátor **összehajtásához**:

1. Keresse meg az ülésen található összecsukó hevedert (3. ábra).
2. Emelje fel az ülőrészt az emelőszalag segítségével, amely a 4 kerekű járókeret megemelésére szolgál. Emelés közben a járókeret automatikusan összecsukódik (1. ábra).
3. Biztosítsa az összehajtott állapotot, ha szükséges, majd tárolja a rollátort.



FIGYELMEZTETÉS

Becsíródhat az ujjja!



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt leül a rollátor szék részére bizonyosodjon meg róla, hogy a fékek rögzített pozícióban vannak!

MŰKÖDÉS

A háttámla magasságának és hosszának beállítása

A háttámla előretolt helyzetbe állításához egyik kezével nyomja meg és tartsa lenyomva az állítógombot. Ezzel egyidejűleg a másik kezével húzza előre a háttámlát (7(a). ábra). A szimmetrikus beállítás érdekében ismételje meg ugyanazt a műveletet mindkét oldalon – bal és jobb oldalon egyaránt.

A háttámla magassága szintén állítható. Ehhez lazítsa meg a rögzítógombot, majd emelje meg vagy engedje le a háttámlát a kívánt pozícióba (7(b). ábra). A megfelelő beállítás érdekében a műveletet mindkét oldalon azonos módon végezze el.

A karok magasságának beállítása

A magasság beállítása két lépésben történik. Először oldja ki a fogantyút a váz rögzítéséből. Másodszor, egyik kezével nyomja meg a piros gombot, miközben a másik kezével emelje vagy engedje le a fogantyút a kívánt magasságra (4. ábra). Ismételje meg ugyanezt a bal és jobb oldali fogantyúnál is. A magasságnak mindkét oldalon azonosnak kell lennie.

A magasság 6 különböző pozícióba állítható. A pozíciók a fogantyúk belső oldalán vannak jelölve (5. ábra).

Séta

Amikor rollátorával sétál győződjön meg róla, hogy egyenes háttal az eszközhöz közel állva sétál. A helyes testtartást biztosítja Önnek (8. ábra).

Rollátoron ülés

Az ülés használata előtt győződjön meg arról, hogy a 4 kerekű járókeret a rögzítőfékekkel biztosítva van.

KARBANTARTÁS

	Használat előtt	Egyszer egy héten	Egyszer egy hónapban	Egyszer egy évben
Ellenőrizze, hogy a kerekek megfelelően vannak-e rögzítve		X		
Vizuális ellenőrzés		X		
Ellenőrizze az összehajtási műveletet			X	
Ellenőrizze a fékeket	X			
Tisztítsa le a kerekeket			X	
Ellenőriztesse a 4-kerekes rollátorát egy hivatalos kereskedővel				X

FIGYELMEZTETÉS

A termék javítását, tisztítását vagy beállítását kizárólag felhatalmazott szervizszemély végezheti, amikor a termék nincs használatban.

TÁROLÁS

A terméket száraz helyen kell tárolni távol közvetlen napsütéstől. A járókeretet mindig tisztán és pormentesen kell tartani.



FIGYELMEZTETÉS

A terméket nem szabad tartósan +40°C feletti hőmérsékletnek kitenni, mivel a váz és az anyagok túlmelegedhetnek, ami égési sérülést vagy anyagkárosodást okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezzen vagy tároljon más tárgyakat a termék tetején.

Hosszabb idejű, három hónapot meghaladó tárolást követően a terméket használat előtt ellenőrizni kell (lásd a „KARBANTARTÁS” fejezetet).

KÖRNYEZETI KONDÍCIÓK

A terméket az alábbi körülmények között tárolja:

Hőmérséklet: -20°C és +40°C közt;

Relatív páratartalom: 20% - 75%;

Atmoszférikus nyomás 800 hPa - 1060 hPa.

ÚJRA-HASZNÁLAT

A termék alkalmas újrahasználatra. Az alábbi műveleteket kell elvégezni:

SPECIALIZÁCIÓ

Modell	BEGO			
REFERENCIA SZÁM	01-3560GR	01-3560TR	01-3560RD	01-3560BK
Szín	Zöld	Türkiz	Piros	Grafitfekete
Maximális biztonsági terhelés (kg)	135			
Súly (kg)	6.9			
Teljes hosszúság (cm)	66			
Teljes szélesség (cm)	55			
Teljes magasság (cm)	81.5 - 94			
Ülés magasság (cm)	59			
Kosár hossza (cm)	17			
Kosár szélessége (cm)	34			
Kosár mélysége (cm)	25			
A kartámaszok közti távolság (cm)	45			
Első kerék mérete (cm)				

RO

SIMBOLURI

AVERTISMENT / ATENȚIE - pentru a indica faptul că este necesară prudență atunci când utilizați dispozitivul. Pentru a indica faptul că situația actuală necesită conștientizarea sau acțiunea operatorului pentru a evita consecințele nedorite.

ATENȚIE! Acest semn este utilizat pentru părți foarte importante privind siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT

Cadrul de mers este potrivit doar pentru o singură persoană.

AVERTISMENT

Fiți conștienți de pericolele din mediul înconjurător, cum ar fi ușile înguste, treptele, electrocasnicele, jucăriile pentru copii etc. Nu vă întindeți după obiecte mai departe decât vă permite brațul.

AVERTISMENT

Nu încercați să treceți peste borduri sau obstacole. Acest lucru poate duce la răsturnarea cadrului de mers ceea ce poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea acestuia.

AVERTISMENT

Este interzis fumatul sau apropierea de flăcări atunci când utilizați cadrul de mers.

AVERTISMENT

Cadrul de mers nu este destinat utilizării de către nevăzători.

AVERTISMENT

Risc de arsură. Cadrul de mers nu trebuie expus permanent la temperaturi mai mari de +40 °C. În caz contrar, cadrul și mânerul se pot încălzi, ceea ce poate provoca arsuri.

ATENȚIE

Risc de a vă prinde degetele. Există întotdeauna riscul de a vă prinde, de exemplu, degetele sau brațele în părțile mobile ale cadrului.

AVERTISMENT

Risc de accidente. Dispozitivele de siguranță reglate incorect sau care nu mai funcționează (de exemplu, frânele) pot provoca accidente. Verificați întotdeauna dacă dispozitivele de siguranță funcționează înainte de a utiliza cadrul de mers cu patru roți și solicitați verificarea lor periodică de către distribuitorul autorizat.

AVERTISMENT

Risc de accidente. Pentru o utilizare corectă și sigură, vă recomandăm să urmați instrucțiunile de siguranță în timpul folosirii cadrului de mers. BEGO a fost conceput pentru a asigura stabilitatea în timpul mersului. Fiecare mișcare a cadrului de mers afectează centrul de greutate, ceea ce poate provoca răsturnarea dispozitivului.

AVERTISMENT

Folosiți viteze mici pe pante. Nu depășiți panta maximă indicată. Nu folosiți scările rulante. Nu coborâți în sens invers pe o pantă.

AVERTISMENT

GENERAL**INTRODUCERE****PREFAȚĂ**

Vă mulțumim pentru încrederea arătată în Kid-Man®. Fiecare produs este verificat în fabrică și ne-a părăsit în stare impecabilă. Vă dorim mult succes și sperăm că produsul UAB Kasko Group | Kid-Man® va avea un impact pozitiv asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi.

GARANȚIE

Oferim o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Orice modificări neautorizate efectuate fără aprobarea producătorului vor atrage nulitatea răspunderii. Aceasta include depășirea sarcinilor maxime ale utilizatorului și utilizarea produsului în mod necorespunzător. Garanția este valabilă numai cu cardul de garanție complet completat. UAB Kasko Group | Kid-Man® (denumit în continuare producător), după ce primește articolul reclamat de la cumpărător în termen de 4 săptămâni, decide dacă problema este tratată în cadrul garanției. Dacă problema nu este acoperită de garanție și clientul este de acord, producătorul, dacă este posibil, rezolvă problema. Toate costurile, inclusiv costurile de transport, ar trebui să fie acoperite de client. Repararea în garanție nu prelungește garanția.

STANDARDE ȘI REGLEMENTĂRI

Cadrul de mers cu 4 roți îndeplinește cerințele:

- a) REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului.
- b) (ISO 11199-2:2021) Produse de asistență pentru mersul manipulat de ambele brațe. Cerințe și metode de încercare. Partea 2: Rollatoare (ISO 11199-2:2021) EN ISO 11199-2:2021.

DURATA DE VIAȚA

Durata de viață estimată este de 5 (cinci) ani, presupunând că produsul este utilizat zilnic și în conformitate cu instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de întreținere și utilizarea prevăzută, menționate în acest manual de utilizare.

După aceea, dispozitivul trebuie reciclat. Nu aruncați produsul în gunoiul menajer (consultați capitolul „ELIMINARE”).

INFORMAȚII DESPRE PRODUCĂTOR

Producător: UAB „Kasko Group” (marcă înregistrată Kid-Man®)

Adresa:

SCOPUL PRECONIZAT ȘI INDICAȚII

Cadrul de mers cu 4 roți BEGO este un dispozitiv de mers pentru uz interior și exterior, perfect pentru compensarea și respectiv îmbunătățirea capacității limitate de mers.

CONTRAINDICAȚII

Nu există contraindicații cunoscute atunci când cadrul de mers cu 4 roți BEGO este utilizat conform destinației sale.

UTILIZATORII VIZAȚI

Cadrul de mers cu 4 roți BEGO este destinat compensării și îmbunătățirii mobilității unei persoane cu capacitate limitată de mers, cu o capacitate de greutate maximă de 135 kg



AVERTISMENT

Risc de accidente. Este interzisă depășirea sarcinii maxime de siguranță a cadrului de mers cu 4 roți.




ATENȚIE

Cadrul de mers cu 4 roți este potrivit pentru a fi utilizat de alte persoane. Pentru a face acest lucru, cadrul de mers trebuie mai întâi curățat și dezinfectat complet. Apoi, toate componentele cadrului de mers trebuie să fie verificate de un service autorizat în ceea ce privește starea generală, uzura și repararea, dacă este necesar.

ETICHETA PRODUSULUI

Eticheta de identificare este atașată la rama produsului dumneavoastră (a se vedea imaginea).

1. Produs
2. Model
3. Dimensiune (lățimea scaunului)
4. Sarcina maximă
5. Producător / date de contact
6. Data de fabricație
7. Cod UDI (Identificatori unici ai dispozitivelor) / SN
8. Marcaj CE
9. Consultați instrucțiunile de utilizare

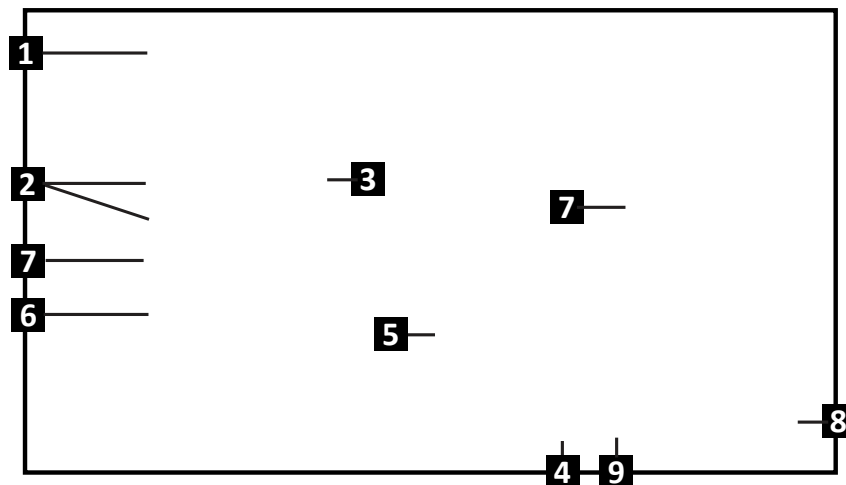

CONȚINUTUL PACHETULUI

Cadrul de mers cu 4 roți BEGO este livrat într-un ambalaj de carton și este gata de utilizare. După despachetare, vă rugăm să păstrați ambalajul de carton, dacă este posibil. Este posibil să aveți nevoie de acesta ulterior pentru depozitare sau pentru returnarea produsului.

După primirea coletului, vă rugăm să verificați dacă acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului.

i Dacă observați semne de deteriorare, vă rugăm să le semnați imediat companiei de transport.

i Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și, dacă lipsește oricare dintre piesele enumerate mai jos, contactați distribuitorul local.



COMPONENTE ȘI FUNCȚII



CONFIGURAREA CADRULUI DE MERS

Pentru a desfășura cadrul de mers:

1. Asigurați-vă că cadrul de mers se află pe un teren solid și uniform;
2. Cu mâinile pliate, apăsați cadrul scaunului în jos până când suprafața scaunului se aplatizează și este complet fixată în cadru. (Imagini 1 - 2);
3. Agățați geanta textilă de cele două suporturi pentru geantă din partea din față a cadrului de mers (Imaginea 6).

Pentru a plia cadrul de mers:

1. Localizați cureaua pliabilă de pe scaun (Imaginea 3);
2. Ridicați scaunul folosind cureaua de ridicare pentru a aduce cadrul de mers în sus. Pe măsură ce ridicați, cadrul de mers se va plia automat (Imaginea 1);
3. Asigurați poziția pliată, dacă este necesar, și depozitați cadrul de mers.

**AVERTISMENT**

Pericol de prindere a degetelor!

Frânare**AVERTISMENT**

Înainte de a vă așeza pe scaun, asigurați-vă că frânele sunt angajate!

FUNCȚIONARE

Reglarea înălțimii și lungimii spătarului

Pentru a regla spătarul într-o poziție extinsă, apăsați și țineți apăsat butonul de reglare cu o mână. În același timp, trageți spătarul în același timp, cu cealaltă mână [imaginea 7 (a.)]. Repetați aceeași procedură pe ambele părți - stânga și dreapta, pentru a asigura ajustarea simetrică.

Înălțimea spătarului poate fi, de asemenea, reglată. Pentru a face acest lucru, slăbiți butonul de blocare și ridicați sau coborâți spătarul la poziția dorită (imaginea 7 (b.)). Efectuați ajustarea în mod egal pe ambele părți pentru a asigura alinierea corectă.

Reglarea înălțimii mânerelor

Înălțimea este reglată în două trepte. Mai întâi, eliberați mânerul din cadru. În al doilea rând, în timp ce apăsați butonul roșu cu o mână, utilizați cealaltă mână pentru a ridica sau a coborî mânerul la înălțimea dorită (Imagini 4). Repetați același lucru pentru ambele mâner de pe partea stângă și dreaptă. Înălțimea trebuie să fie aceeași pe ambele părți.

Înălțimea poate fi reglată în 6 poziții diferite. Pozițiile sunt marcate pe partea interioară a mânerelor (imaginea 5).

Mersul

Când mergeți cu cadrul de mers , asigurați-vă că mergeți în poziție verticală, cu cadrul de mers lângă corp. Aceasta vă va oferi o poziție corectă a corpului (imaginea 8).

Așezarea pe cadrul de mers

Asigurați-vă că cadrul de mers este fixat cu frânele de parcare înainte de a vă așeza pe scaun.

Când sunteți așezat, așezați-vă întotdeauna picioarele între roțile din spate (imaginea 9).

ÎNȚREȚINERE

Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă, efectuați în mod regulat următoarele verificări și lucrări de întreținere sau încredințați-le unei alte persoane. Mai jos veți găsi programul de întreținere recomandat

	Înainte de utilizare	O dată pe săptămână	O dată pe lună	O dată pe an
Verificați dacă roțile sunt așezate corect		X		
Verificare vizuală		X		
Verificați mecanismul de pliere			X	
Verificați frânele	X			
Curățați roțile			X	
Verificați cadrul de mers cu 4 roți la un distribuitor autorizat				X

AVERTISMENT

Repararea, curățarea sau ajustarea produsului trebuie efectuate de o persoană autorizată în timp ce produsul nu este utilizat.

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat într-un mediu uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Ar trebui să fie întotdeauna păstrat curat și fără praf.



AVERTISMENT

Produsul nu trebuie expus permanent la temperaturi mai mari de +40°C. În caz contrar, cadrul și materialele se pot supraîncălzi, ceea ce poate provoca arsuri sau daune materiale.



AVERTISMENT

Nu depozitați niciodată alte obiecte deasupra produsului.

După depozitarea pe termen lung (mai mult de 3 luni), produsul trebuie inspectat înainte de utilizare (a se vedea capitolul „ÎNTREȚINERE”).

CONDIȚII DE MEDIU

Păstrați produsul în aceste condiții:

Limitarea temperaturii - 20° C până la + 40° C;

Umiditate relativă 20% până la 75%;

Presiunea atmosferică 800 hPa până la 1060 hPa.

REUTILIZARE

Produsul este potrivit pentru reutilizare. Trebuie efectuate următoarele acțiuni:

Curățare și dezinfectare (vezi capitolul „CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE”); Inspecție (vezi capitolul „ÎNTREȚINERE”);

SPECIFICAȚIE

Model	BEGO			
REF	01-3560GR	01-3560TR	01-3560RD	01-3560BK
Culoare	Verde	Albastru turcesc	Roșu	Negru grafit
Sarcina maximă de siguranță (kg)	135			
Greutate (kg)	6.9			
Lungimea totală (cm)	66			
Lățimea totală (cm)	55			
Înălțime totală (cm)	81.5 - 94			
Înălțimea șezutului (cm)	59			
Lungimea coșului (cm)	17			
Lățimea coșului (cm)	34			
Adâncimea coșului (cm)	25			
Lățime între cotiere (cm)	45			
Dimensiunea roților frontale (cm)				

INCIDENTE

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat grupului UAB Kasko Group | Kid-Man® și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

CONTACTE:

Producător: UAB „Kasko Group” (marcă înregistrată Kid-Man®)

Adresa: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lituania

Telefon: +370 5 265 0000

E-mail: info@kid-man.com

Site web: www.kid-man.com



СИМВОЛИ

В тази инструкция за употреба предупрежденията са обозначени със символи. Предупредителните символи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ – за да се покаже, че е необходимо внимание при работа с устройството. Показва, че текущата ситуация изисква повишено внимание или действие от страна на потребителя, за да се избегнат нежелани последствия.

ВНИМАНИЕ! Този знак се използва за много важни части, свързани с вашата безопасност. Погледнете инструкциите за експлоатация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ролаторът е подходящ само за един човек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бъдете наясно с опасностите във вашата среда, като тесни врати, стъпала, домакински уреди, детски играчки и др. Не посягайте към предмети извън обсега на ръката ви.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да преминавате през бордюри или препятствия. Това може да доведе до преобръщане на ролатора и да причини нараняване на вас или повреда на устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Забранява се пушенето и близостта до пламъци, докато се използва ролатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ролаторът не е предназначен за използване от незрящи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от изгаряне. Ролаторът с 4 колела не трябва да бъде постоянно излаган на температури по-високи от +40°C. В противен случай рамката, както и подлакътниците може да се нагреят, което може да причини изгаряния.

ВНИМАНИЕ

Риск от захващане на пръстите. Винаги съществува риск от захващане, напр. на пръсти или ръце, в движещите се части на ролатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от злополуки. Предпазни устройства, които са неправилно настроени или вече не работят (напр. спирачки) може да причинят злополуки. Винаги проверявайте дали устройствата за безопасност работят, преди да използвате ролатора с 4 колела, и ги проверявайте редовно при оторизиран представител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от злополуки. За правилна и безопасна употреба ви препоръчваме да следвате инструкциите за безопасност, докато използвате ролатора. BEGO е проектиран така, че да осигури стабилност при ходене. Всяко движение на ролатора влияе върху центъра на тежестта, което може да доведе до преобръщане на изделието.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте бавни скорости по наклони. Не превишавайте посочения максимален градиент. Не използвайте ескалатори. Не се движете на заден под надолу по наклон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОБЩА ЧАСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази инструкция за употреба съдържа важна информация за боравенето с продукта. За да осигурите безопасност при

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Благодарим ви за доверието, оказано на Kid-Man®. Всеки продукт е фабрично проверен и ни е доставен в безупречно състояние.

Пожелаваме ви много успех и се надяваме продукта на UAB Kasko Group | Kid-Man® да има положително въздействие върху ежедневието ви.

ГАРАНЦИЯ

Предоставяме гаранция от 24 месеца от датата на закупуване. Всички неразрешени модификации, извършени без одобрението на производителя, ще направят отговорността невалидна. Това включва превишаване на максимално допустимото натоварване и неправилна употреба на продукта. Гаранцията е валидна само при напълно попълнена гаранционна карта. Компанията UAB Kasko Group | Kid-Man® (наричана по-нататък „Производител“) след получаване на заявен артикул от купувача в рамките на период от 4 седмици решава дали проблемът се третира в рамките на гаранцията. Ако проблемът не е покрит от гаранцията и клиентът се съгласи, производителят, ако е възможно, коригира проблема. Всички разходи, включително разходите за транспорт, са за сметка на клиента. Гаранционният ремонт не удължава гаранцията.

СТАНДАРТИ И РЕГЛАМЕНТИ

Ролаторът с 4 колела отговаря на следните изисквания:

а) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/745 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2017 година за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета.

б) Помощни продукти за ходене, управлявани с двете ръце – Изисквания и методи за изпитване – Част 2: Ролатори (ISO 11199-2:2021) EN ISO 11199-2:2021.

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СРОК

Очакваният експлоатационен живот е 5 (пет) години, при условие че продуктът се използва ежедневно и в съответствие с инструкциите за безопасност, инструкциите за поддръжка и предназначението, посочено в тази инструкция за употреба.

След това изделието трябва да бъде рециклирано. Не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци (вижте глава „ИЗХВЪРЛЯНЕ“).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производител: UAB „Kasko Group“ (регистрирана търговска марка Kid-Man®)

Адрес:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ

Ролаторът с 4 колела BEGO е уред за ходене за вътрешна и външна употреба, идеален за компенсиране и подобряване на ограничената способност за ходене.

i Този ролатор с 4 колела трябва да бъде съобразен с вашето специфично здравословно състояние.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не са известни противопоказания при използване на ролатора с 4 колела BEGO по предназначение.

ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Ролаторът с 4 колела BEGO е предназначен да компенсира и подобри мобилността на лице с ограничена способност за ходене с максимално тегло до 135 kg.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от злополуки. Забранено е превишаването на максимално допустимото натоварване на ролатора с 4 колела.




ВНИМАНИЕ

Ролаторът с 4 колела може да бъде използван и от други лица. За тази цел ролаторът трябва първо да бъде добре почистен и дезинфекциран. След това всички компоненти на ролатора трябва да бъдат проверени от оторизиран сервизен представител за общо състояние, износване и да бъдат ремонтирани, ако е необходимо.

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТА

Идентификационният етикет е прикрепен към рамката на вашия продукт (вижте снимката).

1. Продукт
2. Модел
3. Размер (ширина на седалката)
4. Максимално натоварване
5. Производител/информация за контакт
6. Дата на производство
7. UDI/SN код
8. Маркировка CE
9. Консултирайте се с инструкциите за употреба

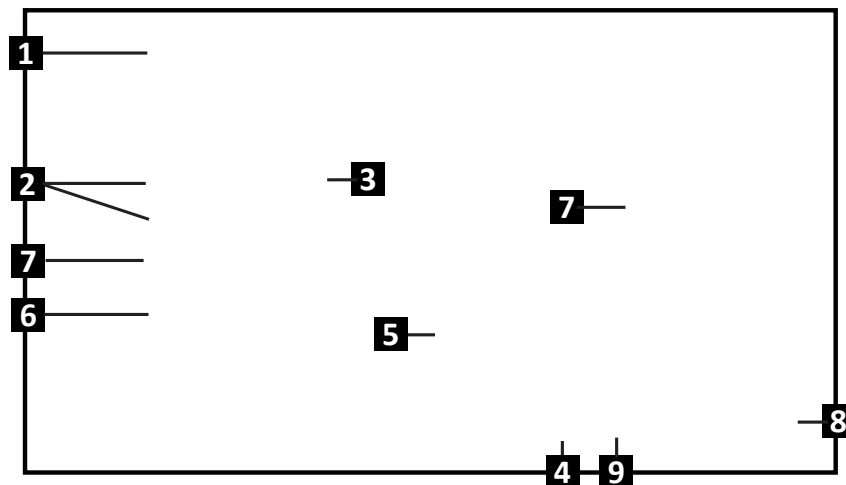


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


Ролаторът с 4 колела BEGO се доставя в картонена опаковка и е готов за употреба. След разопаковането запазете картонената опаковка, ако е възможно. Може да ви потрябва по-късно за съхранение или за връщане на уреда. След получаване на пратката, проверете дали не е повредена по време на транспортирането.

i Ако видите признаци на повреда, уведомете незабавно транспортната компания.

i Проверете съдържанието на опаковката и ако липсва някоя от изброените по-долу части, свържете се с местния представител.

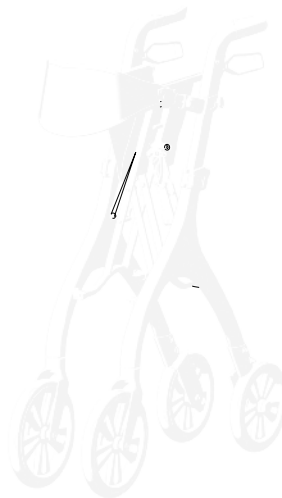

КОМПОНЕНТИ И ФУНКЦИИ

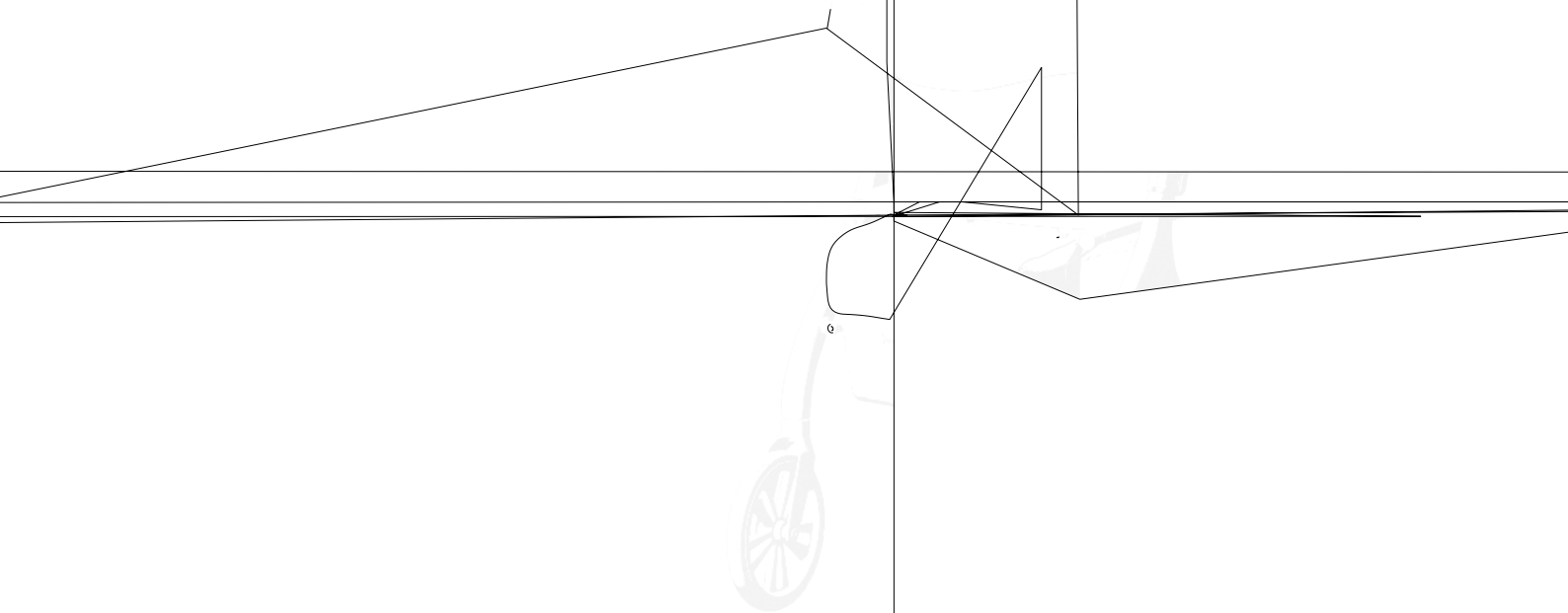

НАСТРОЙВАНЕ НА РОЛАТОРА

За да разгънете ролатора:

1. Уверете се, че ролаторът е върху здрава и равна основа;
2. С длани натиснете рамката на седалката надолу, докато повърхността ѝ се изравни и се фиксира напълно в рамката (снимка 1 – 2);
3. Закачете текстилната чанта на двата държача за чанти отпред на ролатора (снимка 6).

За да сгънете ролатора:

1. Намерете ремъка за сгъване на седалката (снимка 3);
2. Повдигнете седалката с помощта на ремъка за повдигане, за да повдигнете ролатора нагоре. По време на повдигането ролаторът се сгъва автоматично (снимка 1);
3. Ако е необходимо, закрепете сгънато положение и приберете ролатора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от прищипване на пръста!

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Спирачка

Ефективността на спирачките може да бъде повлияна от износването на колелата. Затова проверявайте редовно спирачките.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да седнете на седалката си, уверете се, че спирачките са включени!

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Регулиране на височината и дължината на облегалката

За да регулирате облегалката в разгънато положение, натиснете и задръжте бутона за регулиране с едната ръка. Едновременно с това издърпайте облегалката напред с другата ръка (снимка 7 (а.)). Повторете същата процедура от двете страни – лява и дясна, за да осигурите симетрично регулиране.

Височината на облегалката за гръб също може да се регулира. За да направите това, разхлабете копчето за заключване и повдигнете или спуснете облегалката до желаната позиция (снимка 7 (б.)). Извършете регулирането еднакво от двете страни, за да се осигури правилно подравняване.

Регулиране на височината на дръжките

Височината се регулира в две стъпки. Първо, освободете дръжката от рамката. Второ, докато натискате червения бутон с едната ръка, използвайте другата ръка, за да повдигнете или спуснете дръжката до желаната височина (снимки 4).

Повторете същото и за двете дръжки от лявата и дясната страна. Височината трябва да е еднаква от двете страни.

Височината може да се регулира в 6 различни позиции. Позициите са маркирани от вътрешната страна на дръжките (снимка 5).

Ходене

Когато ходите с ролатора, уверете се, че ходите изправени, а ролаторът е близо до тялото ви. Това ще осигури правилна стойка на тялото (снимка 8).

Седене върху ролатора

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

За да осигурите безопасна и надеждна работа, извършвайте редовно описаните по-долу проверки и поддръжка или ги

	Преди употреба	Веднъж седмично	Веднъж месечно	Веднъж годишно
Проверете дали колелата са поставени правилно		X		
Визуална проверка		X		
Проверете механизма за сгъване			X	
Проверете спирачките	X			
Почистете колелата			X	
Ролаторът с 4 колела трябва да бъде проверен от оторизиран представител				X

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонтът, почистването или регулирането на продукта трябва да се извършват от оторизиран сервизен техник, когато продуктът не се използва.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. Винаги трябва да се поддържа чист и без прах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продуктът не трябва да бъде излаган постоянно на температури по-високи от +40°C. В противен случай рамката и материалите може да прегреят, което може да причини изгаряния или материални щети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не поставяйте или съхранявайте други предмети върху продукта.

След продължително съхранение (повече от 3 месеца) продуктът трябва да бъде прегледан преди употреба (вижте глава „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“).

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Дръжте продукта при следните условия:

Ограничение на температурата -20°C до + 40°C;

Относителна влажност 20% до 75%;

Атмосферно налягане 800 hPa до 1060 hPa.

ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Продуктът е подходящ за повторна употреба. Трябва да се изпълнят следните действия:

Почистване и дезинфекция (вижте глава „ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ“); Проверка (вижте глава „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“);

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел	BEGO			
РЕФ	01-3560GR	01-3560TR	01-3560RD	01-3560BK
Цвят	Зелено	Турско синьо	Червено	Графитно черно
Максимално безопасно натоварване (kg)	135			
Тегло (kg)	6.9			
Обща дължина (cm)	66			
Обща ширина (cm)	55			
Обща височина (cm)	81.5 - 94			
Височина на седалката (cm)	59			
Дължина на кошницата (cm)	17			
Ширина на кошницата (cm)	34			
Дълбочина на кошницата (cm)	25			
Ширина между подлакътниците (cm)	45			

JAMSTVENI LIST / GARANCIALEVÉL / CARD DE GARANȚIE / ГАРАНЦІОННА КАРТА

Naziv proizvoda Termék neve Denumirea produsului Име на продукт	Model, REF Model, REF Model, REF		

Published by UAB Kasko Group | Kid-Man®

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 265 0000 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

Datum 2019-03-18 | Dátum 2019-03-18 | Data 2019-03-18 | Дата 2019-03-18

Datum zadnjeg ažuriranja 4. 2. 2026

Utolsó ellenőrzés napja 2026.02.04

Data ultimei actualizări 04.02.2026

Дата на последна актуализация 04.02.2026 г.